


Surgical Instruments





Stille scissors

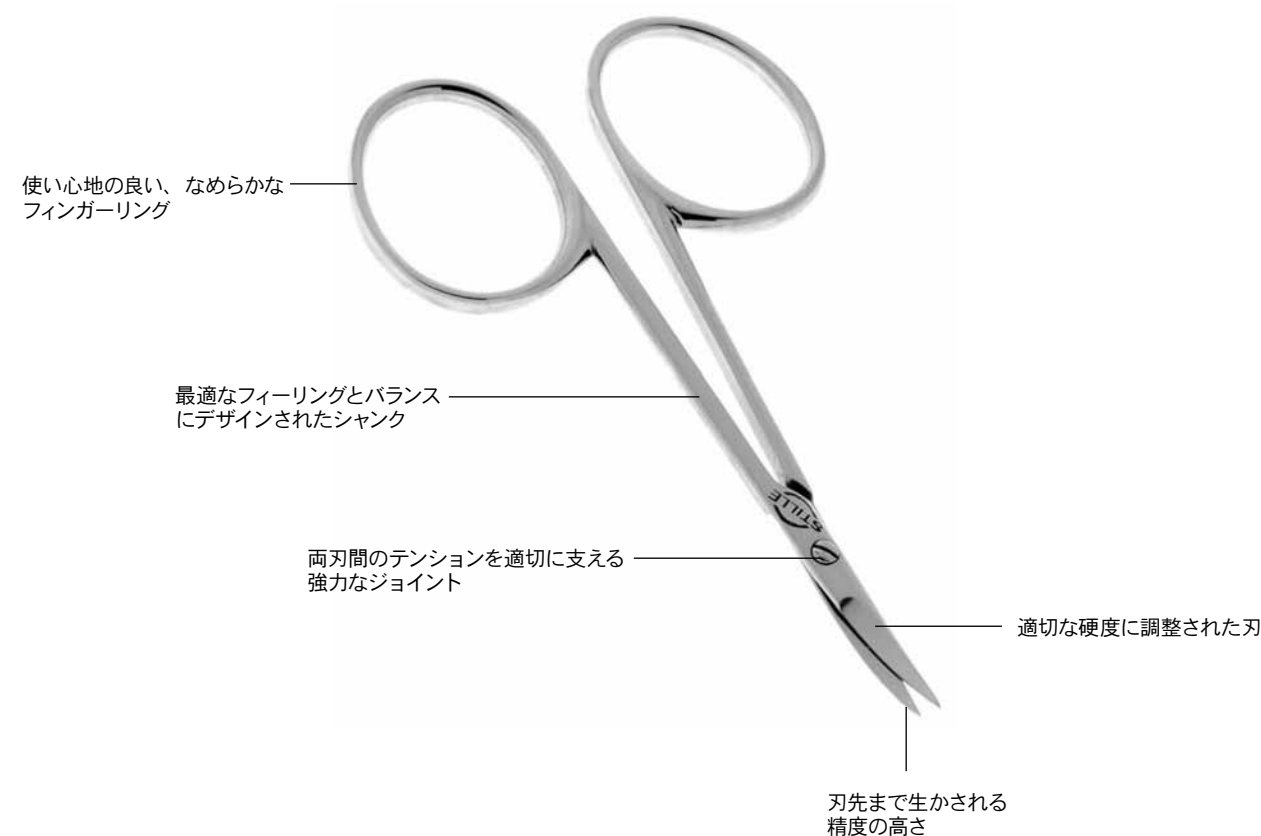

Stille は独特の高品質な剪刀で世界的に有名な会社です。Stille 剪刀は極めて軽量で、バランスの良い製品です。また、このシャープな切れ味には、古くからの長い実績があります。これは、剪刀のあらゆる部分に注意を払い、設計や製造をおこなってきたからです。

Stille 剪刀は、あらゆる種類の軟部組織に対して、最小限の力で、最大限の切断力を与えることができます。Stille 剪刀では、普通のステンレス鋼製剪刀、スーパーカット剪刀および、エルゴノミック剪刀がごございます。




スーパーカット剪刀

スーパーカット剪刀とは、どのようなものですか？

Stille スーパーカット剪刀は、優れた切れ味を持っています。従来の剪刀のあらゆる利点に、いっそうシャープになった切れ味が加わりました。

Stille スーパーカット剪刀は、何故、普通の剪刀よりも優れているのですか？

このスーパーカット剪刀の刃先は、特別にデザインされているからです。片方は普通の剪刀用の刃で、もう片方はナイフ用の刃になっています。実際、この剪刀は、組織をこのように切り開いていきます。

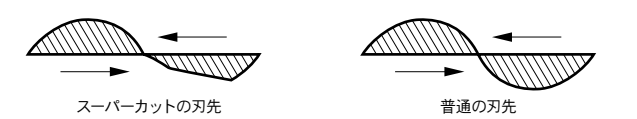

Stille スーパーカット剪刀には、他にどのような利点がありますか？

刃先に至るまで、極めて正確にカットします。この特殊な刃の噛み合わせにより、右利きおよび左利きの両方に適応します。

Stille スーパーカット剪刀をどこで見分けられますか？

シャフト部分が ” 黒色 ” になっています。

Stille スーパーカット剪刀は、用途の広い剪刀ですか？

はい。組織の場合、粗い組織を効率良くシャープに、また非常に正確にカットします。縫合糸は、剪刀の鋭い刃先を傷つける恐れがあるので、避けてください。縫合糸切断には専用の剪刀があります。

何故、Stille スーパーカット剪刀の『オリジナル』を選ぶ必要があるのですか？

理由は簡単です。『オリジナル』は、常にコピーよりも優れているからです。Stille は 1982 年に、世界で初めてスーパーカット剪刀を導入しました。スウェーデンの精密な製造と Stille のブランド名により、Stille のスーパーカット剪刀は、優れた品質を持つと考えられています。

スーパーカット剪刀は、研磨修正（研ぎなおし）できますか？

はい、できます。他の剪刀と同様に、スーパーカット剪刀も、時折研ぐ必要があります。研ぎなおしは、Stille のインスツルメントサービス部門が、最高の精度で確実に剪刀のお手入れをいたします。



Stille エルゴノミック剪刀

通常、手術用剪刀は、親指と中指または薬指を使って正確に把持します。手が「基本的な静止位置」に近いとき、すなわち最も握み心地が良い位置のときに、最も優れた性能を示します。従来の剪刀を使用する場合は、手はこの位置で握めず、緊張した状態に近い位置で握みます。

この「静止位置」にする方法は、従来の剪刀に比較してわずかに異なるシャंकデザインの剪刀を使用することです。

この新しい形状のコンセプトは、人間工学にあります。人間工学的にデザインされた剪刀を使用することで、時間のかかる手術も手に負担をかけずに行うことができます。こうしたデザイン効果で、使いやすくなり、手の疲労を避けることができます。

勿論、エルゴノミック剪刀は、Stille スーパーカット剪刀のその他の特徴も持っています。

剪刀は、その使用目的以外では使用しないでください。普通の剪刀やスーパーカット剪刀で、縫合糸やガーゼ、またはワイヤーを切断しないでください。この独特の切れ味を維持するために、定期的にメンテナンスに出すことをお勧めします。Stille 剪刀を不適切に取り扱ったり、使用したりすると、保証は無効となります。

Stille 剪刀の検査方法


- ・フィーリング：滑らかな動きと軟らかい抵抗感
- ・切れ味：刃の先端まですべて均等
- ・音：異音がしない
- ・外観：目視による検査で、刃に損傷が見当たらない



STILLE EYE SCISSORS

鈍または鋭の先端と大きなフィンガーリングを持つ、デリケート眼科剪刀。これらは虹彩鋏とも呼ばれ、神経、腱、血管用に使用されます。使用目的は、顔面手術や繊細な手術など。斜刃。


* 101-8001-	Straight	Sharp	9.5 cm 3.75"
101-8002-	Straight	Blunt	9.5 cm 3.75"
101-8003-	Curved	Sharp	9.5 cm 3.75"
101-8004-	Curved	Blunt	9.5 cm 3.75"

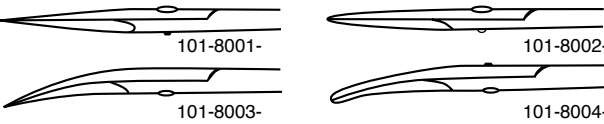

STILLE EYE SCISSORS

繊細な作業用の眼科剪刀。握り心地の良い大きなフィンガーリング。斜刃。


* 101-8010-	Straight	Sharp	10 cm 4"
101-8011-	Straight	Blunt	10 cm 4"
101-8015-	Curved	Sharp	10 cm 4"
101-8016-	Curved	Blunt	10 cm 4"

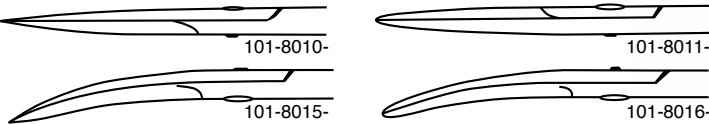

STILLE SUPER CUT EYE SCISSORS

鈍または鋭の先端と、極めて鋭利な刃を持つスーパーカット眼科剪刀。斜刃。

* 101-8010-1	Straight	Sharp	10 cm 4"
101-8011-1	Straight	Blunt	10 cm 4"
101-8015-1	Curved	Sharp	10 cm 4"
101-8016-1	Curved	Blunt	10 cm 4"

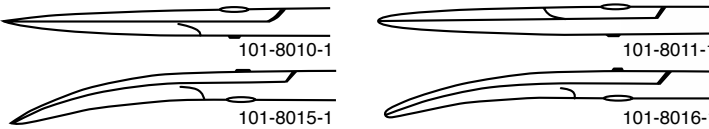


* Photo shows this instrument



STILLE SUPER CUT BLEPHAROPLASTY

眼瞼形成術に適した、短いデリケートスーパーカット剪刀。


101-8018-1	Straight	9.5 cm 3.75"
* 101-8019-1	Curved	9.5 cm 3.75"

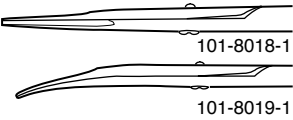

STILLE ERGO BLEPHAROPLASTY

ゆったりと握れるように人間工学的にデザインされたシャンクを持つ、眼瞼形成術用スーパーカット剪刀。

* 101-8019-2	Curved	9.5 cm 3.75"
--------------	--------	--------------

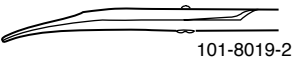

RAGNELL SUPER CUT BLEPHAROPLASTY

鈍で短いデリケート瞼形成術用先端薄刃型スーパーカット剪刀。


101-8031-1	Curved	Blunt	9.5 cm 3.75"
------------	--------	-------	--------------



RAGNELL ERGO BLEPHAROPLASTY

ゆったりと握れるように人間工学的にデザインされたシャンクを持つ、瞼形成術用先端薄刃型スーパーカット剪刀。


* 101-8031-2	Curved	9.5 cm 3.75"
--------------	--------	--------------

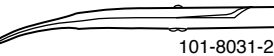

KAYE

組織のすべり防止のため、鋸歯状刃を持つ剪刀。組織を逃がさず正確に組織を切除できます。


* 101-8020-	Curved	Serrated blunt	10 cm 4"
101-8021-	Curved	Serrated blunt	12.5 cm 5"
101-8022-	Curved	Serrated sharp	12.5 cm 5"

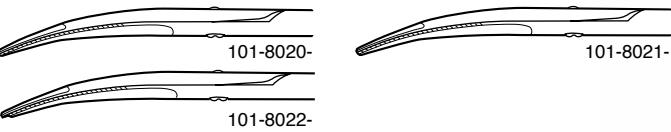

KAYE STILLE SUPERCUT DISSECTING SCISSORS

101-8021 カイエ剪刀のスーパーカットバージョン。

* 101-8021-1	Curved	Serrated blunt	12.5 cm 5"
--------------	--------	----------------	------------

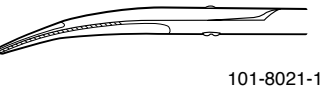

* Photo shows this instrument



* Photo shows this instrument



JABALEY

Hand Surgery 手術に適した鋭利な剪刀。斜刃。


* 101-8060-	Straight	Sharp	12.5 cm 5"
101-8062-	Curved	Sharp	12.5 cm 5"

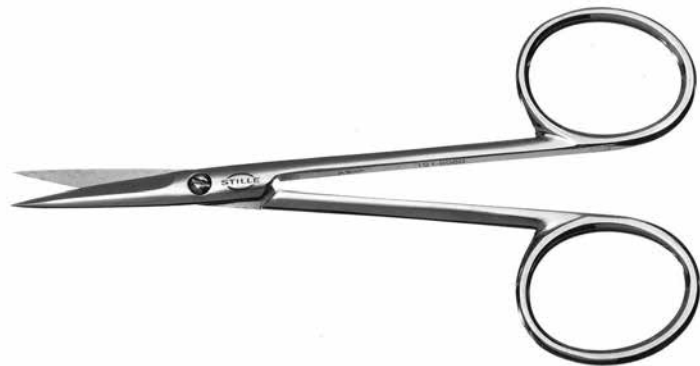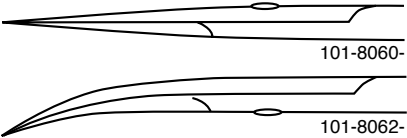

JABALEY SUPER CUT

Hand Surgery 手術で、硬い組織に使用されるスーパーカット剪刀。斜刃。



* 101-8060-1	Straight	Sharp	12.5 cm 5"
101-8062-1	Curved	Sharp	12.5 cm 5"

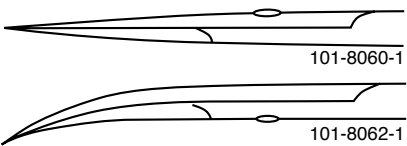

JABALEY STILLE ERGO

手の疲労を少なくするようデザインされたエルゴノミック（人間工学的）モデル。斜刃。

* 101-8060-2	Straight	Sharp	12.5 cm 5"
101-8062-2	Curved	Sharp	12.5 cm 5"

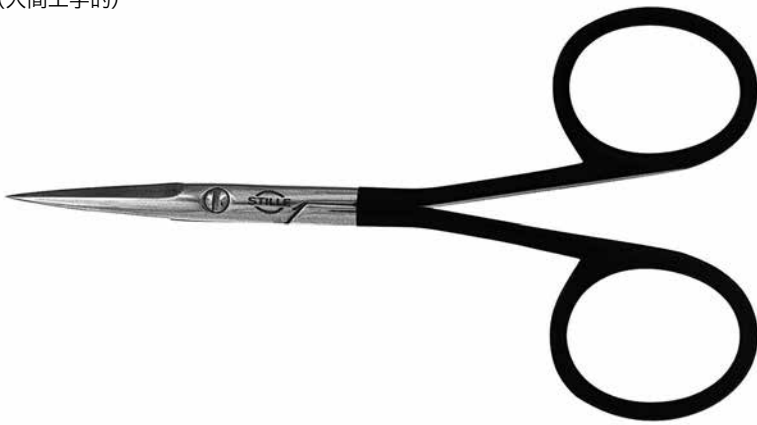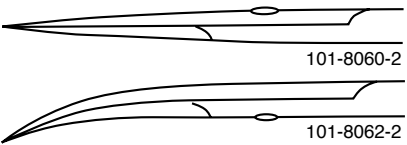



* Photo shows this instrument



MAYO-STILLE

いろいろな手術で、最も多く使用されている剪刀。組織の通常の剥離切開に使用。斜刃。


101-8080-15	Straight	15 cm 6"
101-8080-17	Straight	17 cm 6.75"
* 101-8082-15	Curved	15 cm 6"
101-8082-17	Curved	17 cm 6.75"

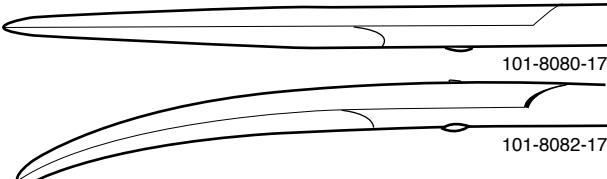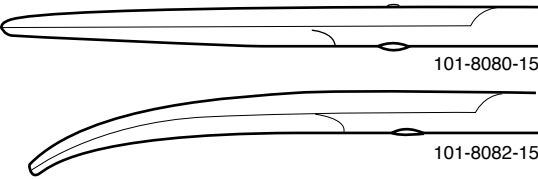

MAYO-STILLE SUPER CUT

硬い組織用のスーパーカットメイヨー剪刀。斜刃。

* 101-8081-15	Straight	15 cm 6"
101-8083-15	Curved	15 cm 6"

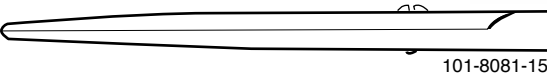



* Photo shows this instrument



STILLE-MAYO

丸みのある刃を持つ、メイヨー剪刀。


* 101-8084-15	Straight	15 cm 6"
101-8084-17	Straight	17 cm 6.75"
101-8084-19	Straight	19 cm 7.5"
101-8086-15	Curved	15 cm 6"
101-8086-17	Curved	17 cm 6.75"
101-8086-19	Curved	19 cm 7.5"

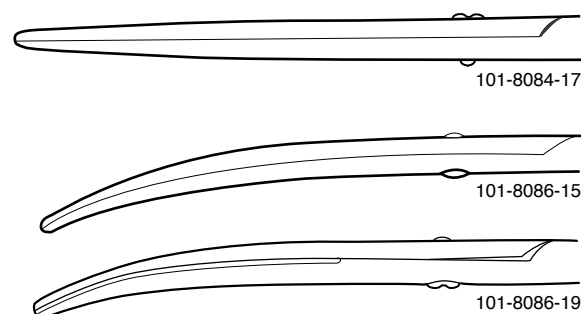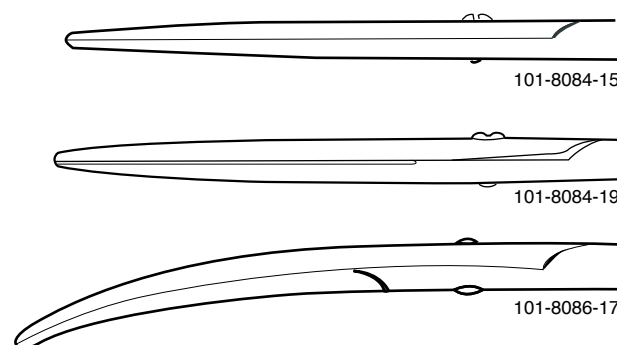

STILLE-MAYO SUPER CUT

硬い組織用で、丸みのある刃を持つメイヨースーパーカット剪刀。

101-8085-15	Straight	15 cm 6"
101-8085-17	Straight	17 cm 6.75"
101-8085-19	Straight	19 cm 7.5"
101-8087-15	Curved	15 cm 6"
* 101-8087-17	Curved	17 cm 6.75"
101-8087-19	Curved	19 cm 7.5"

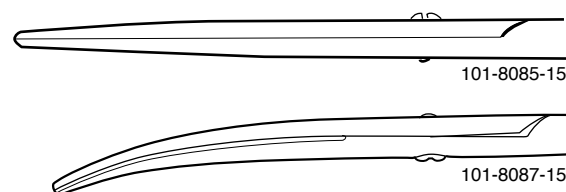

101-8085-17
101-8085-19
101-8087-17
101-8087-19


* Photo shows this instrument



MAYO-NOBLE

主に整形外科用として使用される、短く、頑丈なメイヨー剪刀。斜刃。


101-8090-	Straight	18 cm 7"
* 101-8092-	Curved	18 cm 7"

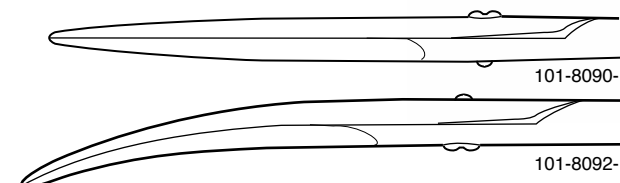

BABY MAYO

標準メイヨー剪刀デリケートバージョン。形成外科、Hand Surgery 手術に使用。斜刃。


101-8100-15	Straight	15 cm 6"
* 101-8102-15	Curved	15 cm 6"

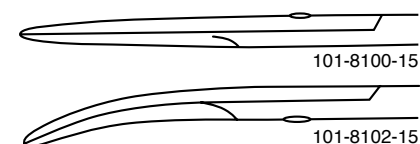

SIMS

主に婦人科手術および、他の骨盤手術に使用。斜刃。

* 101-8138-	Curved	20 cm 8"
-------------	--------	----------

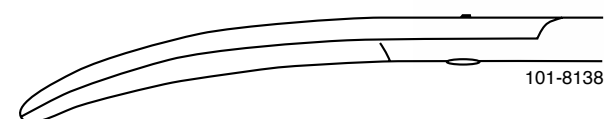


* Photo shows this instrument



BABY METZENBAUM

丸みのある刃を持つ、デリケートベビーメッツェンバウム剪刀。小型器具を必要とする細かな手術に使用。


* 101-8160-	Straight	Rounded blades	12.5 cm 5"
101-8162-	Curved	Rounded blades	12.5 cm 5"

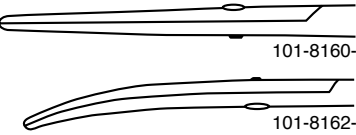

BABY METZENBAUM SUPER CUT

硬い組織用のスーパーカットベビーメッツェンバウム剪刀。小型器具を必要とする細かな手術に使用。


* 101-8161-	Straight	Rounded blades	12.5 cm 5"
101-8163-	Curved	Rounded blades	12.5 cm 5"

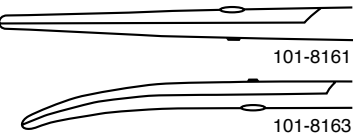

BABY METZENBAUM ERGO

コントロールしやすいベビーメッツェンバウムエルゴノミックモデル。丸みのある刃。

* 101-8163-2	Curved	12.5 cm 5"
--------------	--------	------------

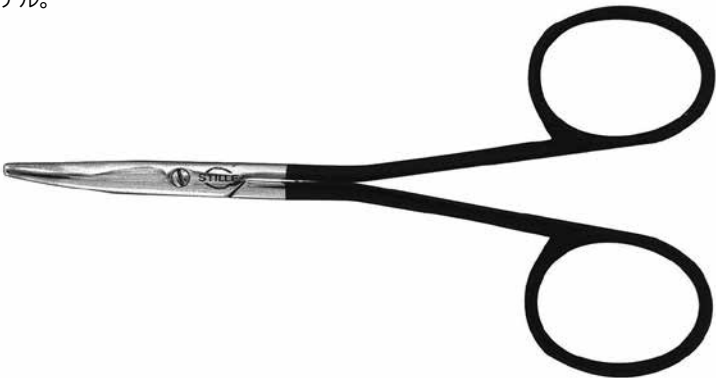


* Photo shows this instrument



METZENBAUM DELICATE

メッツェンバウム剪刀の極めてデリケートなバージョン。丸みのある刃。



* 101-8172-18	Curved	18 cm 7"
101-8172-23	Curved	23 cm 9"

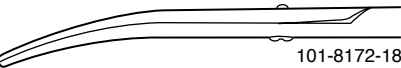

METZENBAUM DELICATE SUPER CUT

細く丸みのある先端を持つ極めてデリケートなスーパーカットメッツェンバウム剪刀。




101-8173-15	Curved	15 cm 6"
* 101-8173-18	Curved	18 cm 7"
101-8173-20	Curved	20 cm 8"

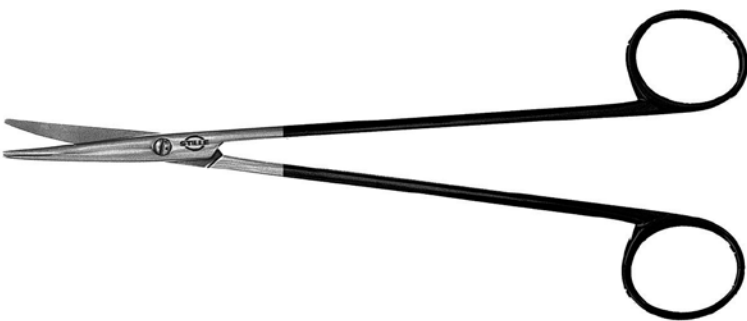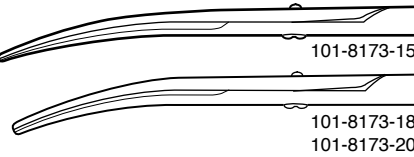

METZENBAUM

丸刃と丸い先端を持つメッツェンバウム剪刀。あらゆる専門手術の微細な剥離に使用。メッツェンバウムは、Stille 製品で最も人気のある剪刀モデルの一つであり、さまざまな形状とサイズでご利用いただけます。

101-8174-15	Curved	15 cm 6"
* 101-8174-18	Curved	18 cm 7"
101-8174-20	Curved	20 cm 8"
101-8174-23	Curved	23 cm 9"
101-8174-26	Curved	26 cm 10.25"

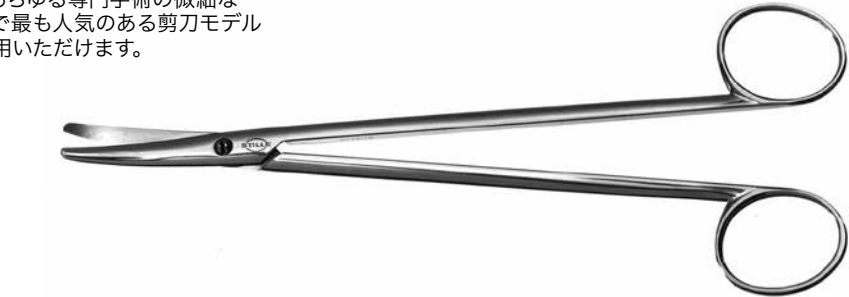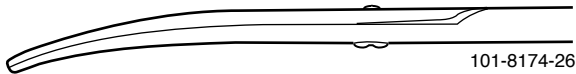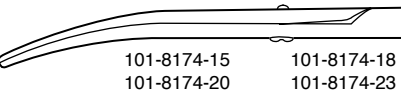


* Photo shows this instrument



METZENBAUM SUPER CUT

スーパーカットタイプで、人気のあるメッツェンバウム剥離剪刀。丸刃／斜刃。


101-8175-15	Curved	15 cm 6"
101-8175-18	Curved	18 cm 7"
101-8175-20	Curved	20 cm 8"
101-8175-23	Curved	23 cm 9"
101-8175-26	Curved	26 cm 10.25"
101-8175-30	Curved	30 cm 12 "
101-8175-33	Curved	33 cm 13 "
101-8176-15	Straight	15 cm 6"
* 101-8176-18	Straight	18 cm 7"
101-8176-20	Straight	20 cm 8"
101-8176-23	Straight	23 cm 9"
101-8176-26	Straight	26 cm 10.25"

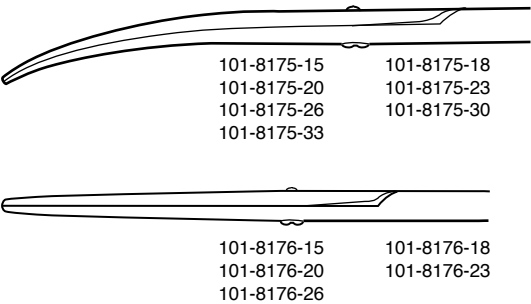

METZENBAUM STILLE ERGO

握り心地が良いようにエルゴノミックデザインされたメッツェンバウムスーパーカット剪刀。

* 101-8175-152	Curved	15 cm 6"
101-8175-182	Curved	18 cm 7"

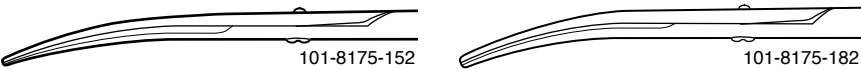



* Photo shows this instrument



RAGNELL

丸い先端と薄刃の剥離剪刀。形成手術にしばしば使用され、メーカーによってはキルナー(Killner)とも呼ばれます。短いモデルは形成手術の剥離用に、長いモデルは深層剥離用に使用します。


* 101-8378-	Straight	12.5 cm 5"
101-8380-12	Curved	12.5 cm 5"
101-8380-15	Curved	15 cm 6"
101-8380-18	Curved	18 cm 7"
101-8380-20	Curved	20 cm 8"
101-8380-23	Curved	23 cm 9"

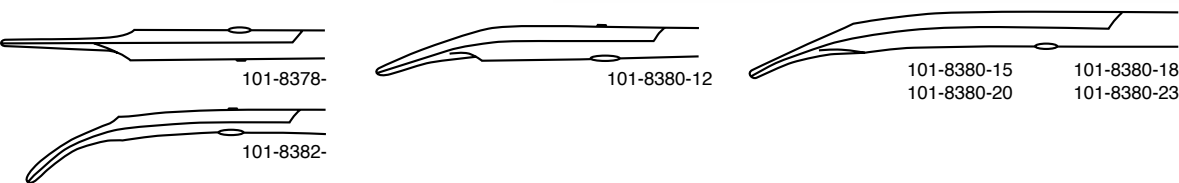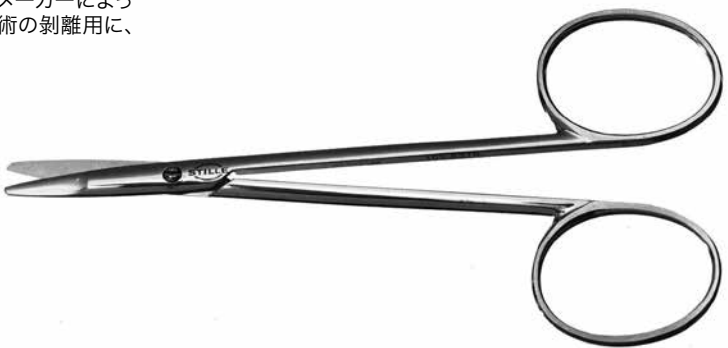

RAGNELL SUPER CUT

ラグネル剪刀のスーパーカットバージョン。組織の正確な剥離に使用。



101-8380-121	Curved	12.5 cm 5"
101-8380-151	Curved	15 cm 6"
101-8380-181	Curved	18 cm 7"
* 101-8380-201	Curved	20 cm 8"
101-8380-231	Curved	23 cm 9"

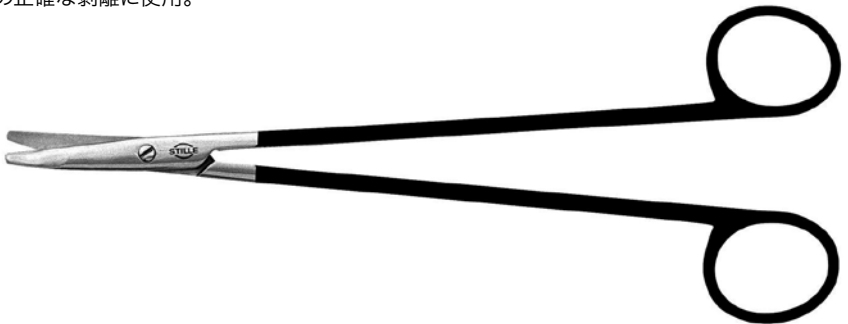

RAGNELL ERGO

握り心地が良い、ラグネル剪刀のエルゴノミックスーパーカットバージョン。組織の微細な剥離に使用。

* 101-8380-122	Curved	12.5 cm 5"
101-8380-152	Curved	15 cm 6"

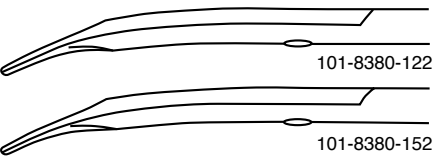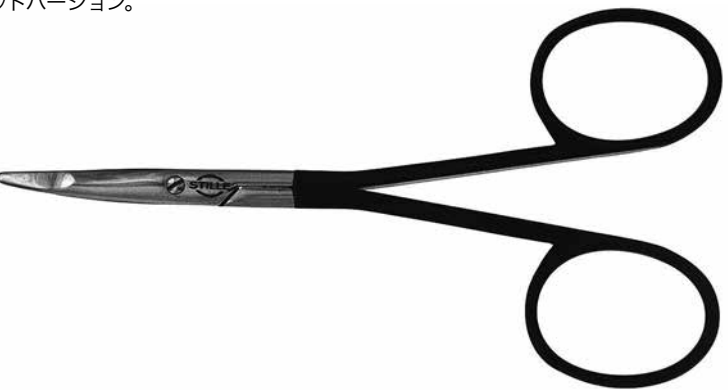


* Photo shows this instrument



THOREK

良好な視界が得られる強彎曲型剥離剪刀。丸刃。


* 101-8470- Strongly curved 21 cm 8.25"

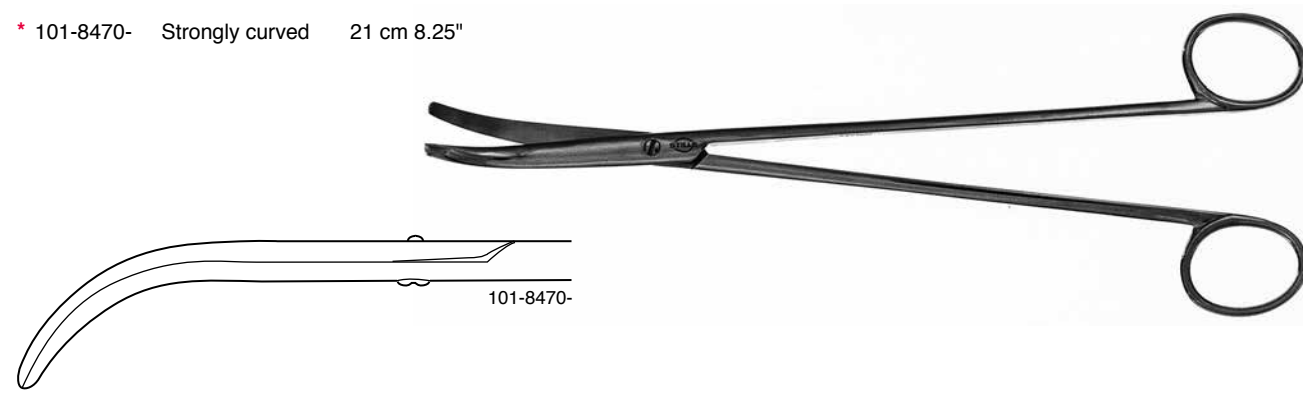

STILLE-COOPER

縫合糸やガーゼなどに対して多く用いられる一般的な剪刀。斜刃。


* 101-8042-15 Straight Sharp/blunt 15 cm 6"
101-8043-15 Straight Blunt/blunt 15 cm 6"
101-8047-13 Curved Sharp/blunt 13.5 cm 5.25"
101-8047-15 Curved Sharp/blunt 15 cm 6"
101-8048-15 Curved Blunt/blunt 15 cm 6"
101-8048-18 Curved Blunt/blunt 18 cm 7"

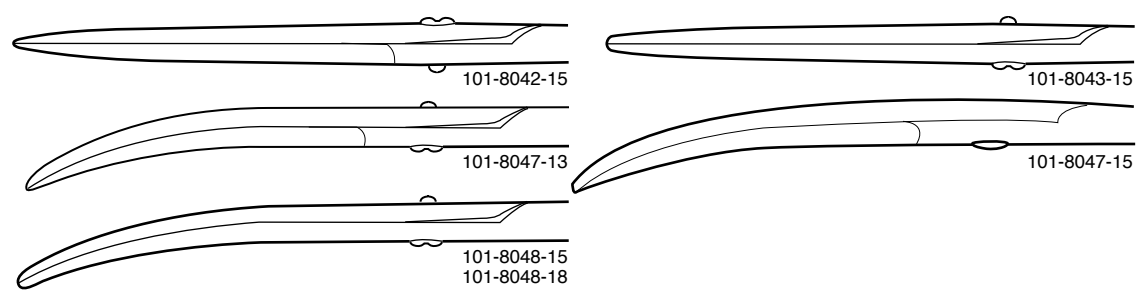

MAYO-HARRINGTON

婦人科手術や胸部手術のような深層手術に使用される手術用剪刀。斜刃。

101-8096-20 Straight 20 cm 8"
101-8096-23 Straight 23 cm 9"
* 101-8098-20 Curved 20 cm 8"
101-8098-23 Curved 23 cm 9"
101-8098-30 Curved 30 cm 12"

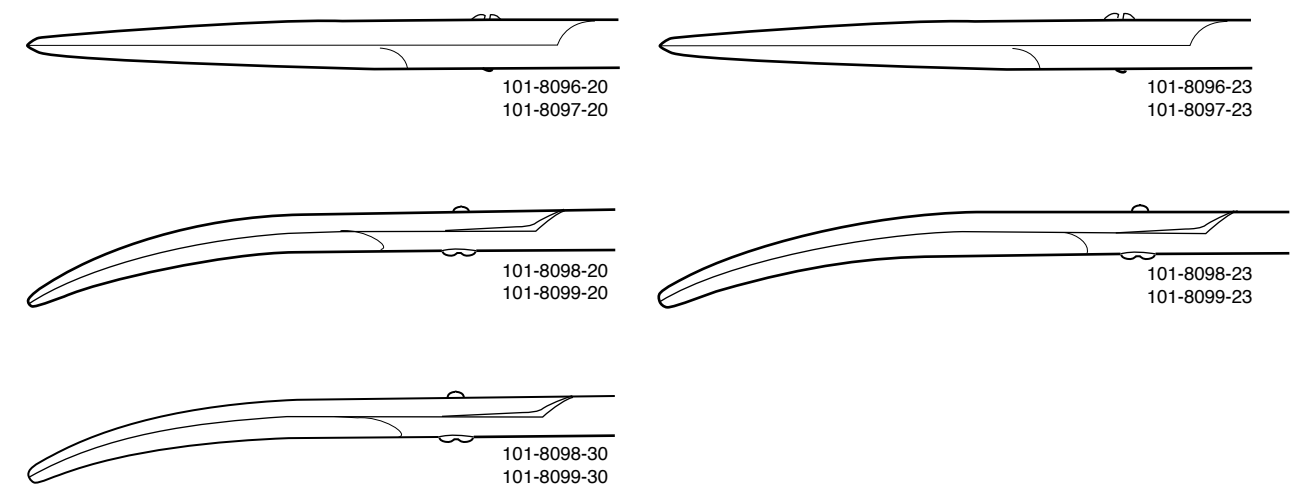

MAYO-HARRINGTON SUPER CUT

胸部手術や婦人科手術用スーパーカット剪刀。斜刃。

101-8097-20 Straight 20 cm 8"
101-8097-23 Straight 23 cm 9"
* 101-8099-20 Curved 20 cm 8"
101-8099-23 Curved 23 cm 9"
101-8099-30 Curved 30 cm 12"



刃先形状は、上記 Mayo-Harrington と同じです。

* Photo shows this instrument

* Photo shows this instrument



BOYD

優れた視界が得られる、鋭利な先端と S 状シャンクを持つ剪刀。丸刃。


* 101-8420- Curved 17 cm 6.75"



RAGNELL-STILLE

乳房手術用の乳房形成剪刀。丸刃。


* 101-8460- Angled on flat 17 cm 6.75"

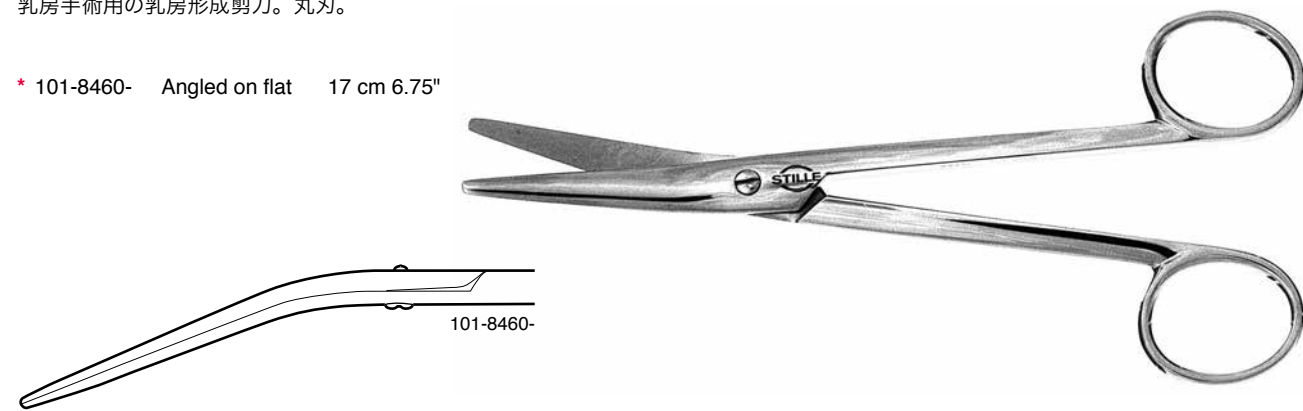

KÖNIG-STILLE

嵌入爪を切除するための爪裂症用剪刀。斜刃。

* 101-8580- Straight 15 cm 6"

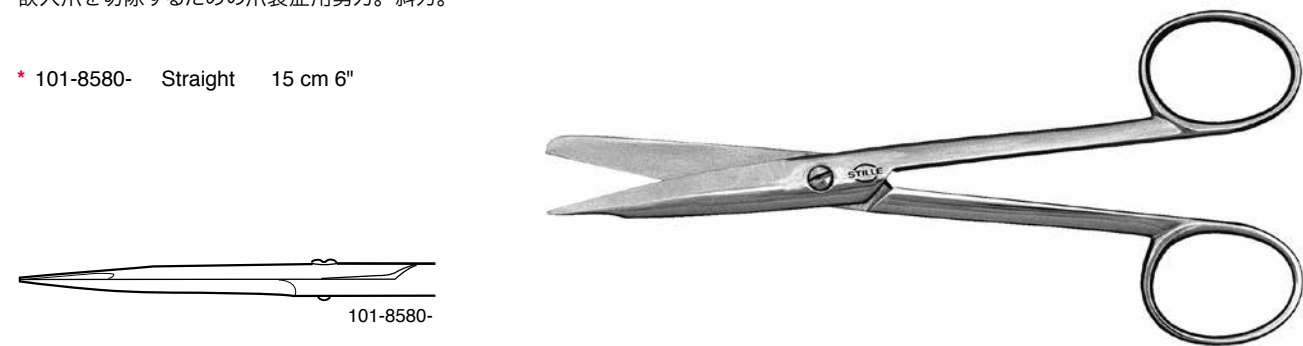

* Photo shows this instrument



LITTLER

縫合糸保持剪刀。丸刃。

* 101-8164- Curved 12.5 cm 5"



STEVENS

丸く、非常に薄い刃とテーパ型先端を持つ腱切除用剪刀。形成手術や Hand Surgery 手術において、小切開で極めて正確な切除が求められる場合に使用します。


* 101-8166- Straight 12.5 cm 5"
101-8167- Curved 12.5 cm 5"



STEVENS SUPER CUT

細かい組織の正確な切除や剥離に使用されるスティープンスーパーカット剪刀。丸刃。

* 101-8166-1 Straight 12.5 cm 5"
101-8167-1 Curved 12.5 cm 5"
101-8167-151 Curved 15 cm 6"
101-8167-181 Curved 18 cm 7"
101-8170-1 Straight 9.5 cm 3.75"
101-8171-1 Curved 9.5 cm 3.75"

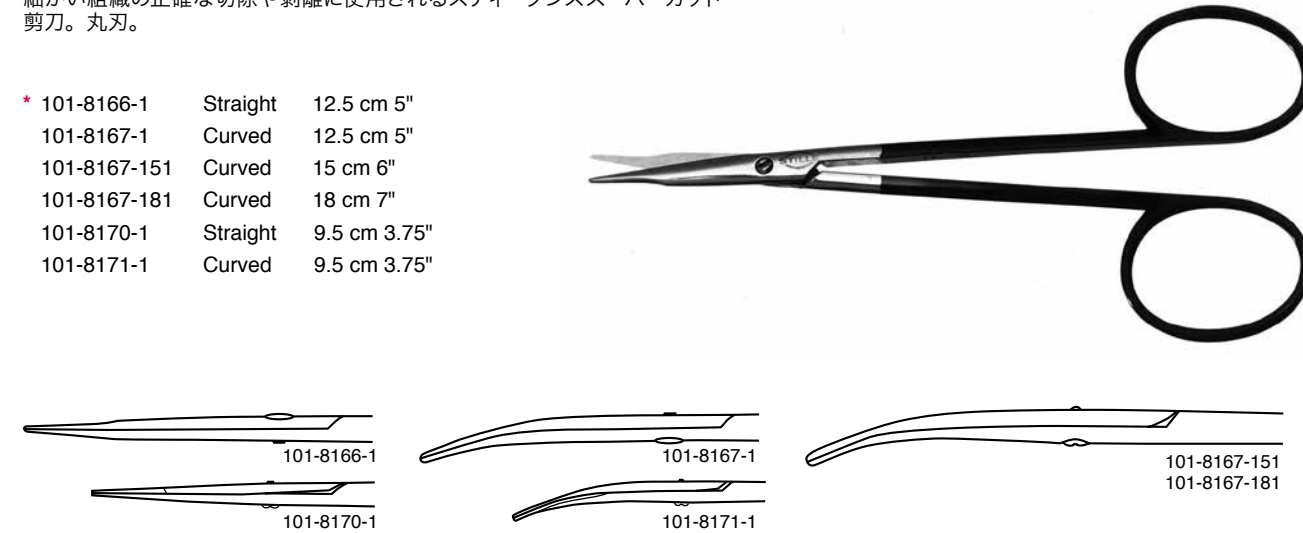


* Photo shows this instrument



STEVENS STILLE ERGO

エルゴノミックデザインのスティーブンスーパーカット腱切除剪刀。


* 101-8166-2	Straight	12.5 cm 5"
101-8167-2	Curved	12.5 cm 5"
101-8167-152	Curved	15 cm 6"
101-8167-182	Curved	18 cm 7"

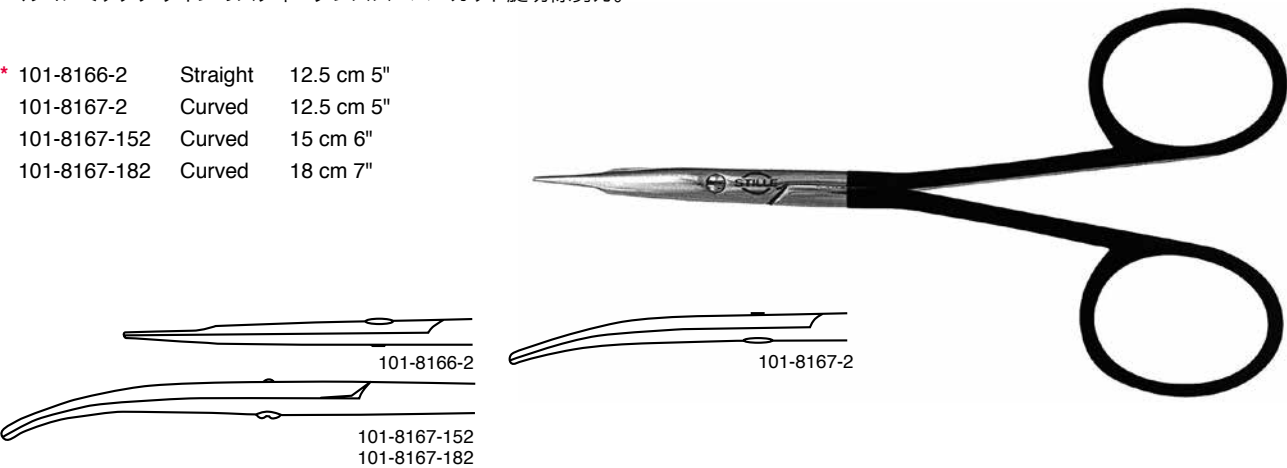

STILLE SUPER CUT VASCULAR SCISSORS

血管用にデザインされた角度付の刃を持つスーパーカット剪刀。血管手術に使用。


* 101-8200-25	Angled 25	18 cm 7"
101-8200-45	Angled 45	18 cm 7"
101-8200-60	Angled 60	18 cm 7"
101-8200-90	Angled 90	17 cm 6.75"
101-8200-125	Angled 125	17 cm 6.75"

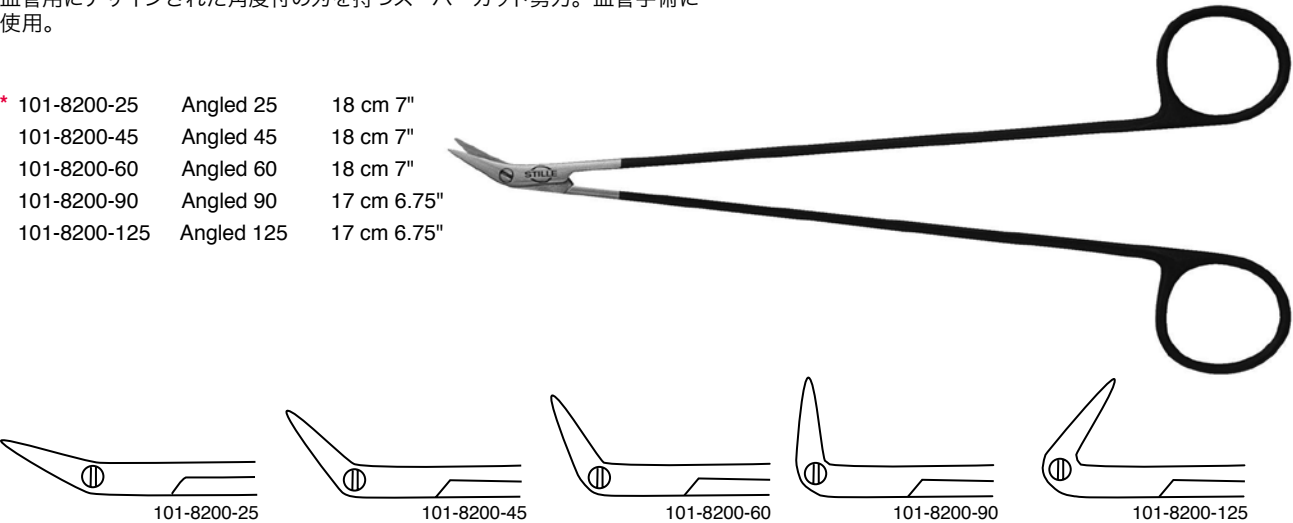

STILLE SUPER CUT VASCULAR SCISSORS

101-8200-xx 血管剪刀シリーズより微細な刃を持つエクストラデリケートバージョン。

101-8201-25	Angled 25	18 cm 7"
101-8201-45	Angled 45	18 cm 7"
101-8201-60	Angled 60	19 cm 7"
101-8201-90	Angled 90	17 cm 6.75"
101-8201-125	Angled 125	17 cm 6.75"

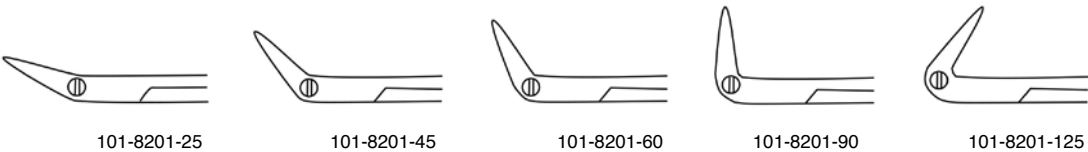

* Photo shows this instrument


* Photo shows this instrument



JOSEPH NASAL

軟骨用の鼻用剪刀。硬い組織の切除に使います。斜刃。

- * 101-8110- Straight Sharp 15 cm 6"
- 101-8115- Curved Sharp 15 cm 6"

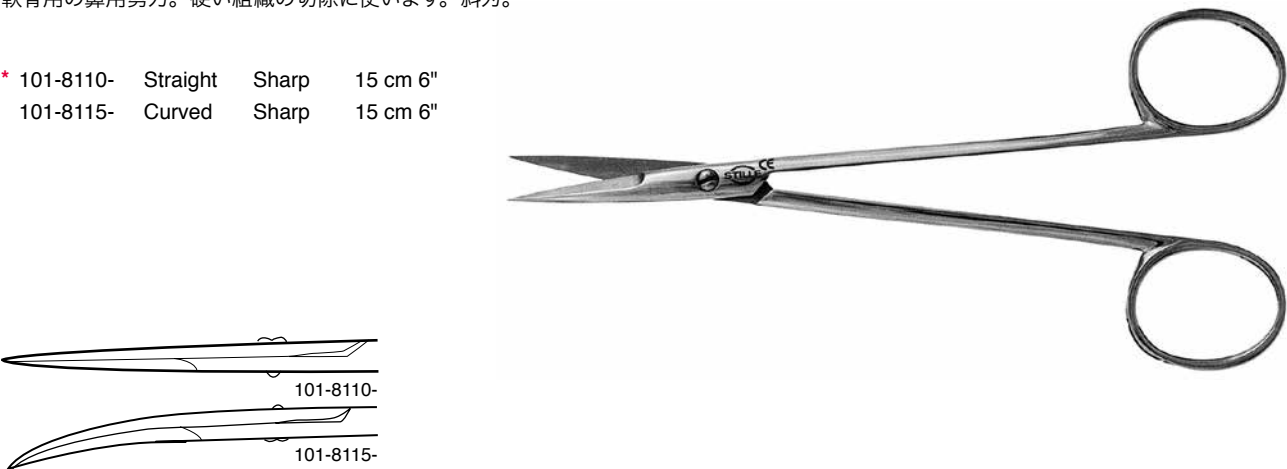

JOSEPH NASAL SUPER CUT

軟骨用のスーパーカット鼻用剪刀。硬い組織の剥離や切除に使います。斜刃。


- * 101-8110-1 Straight 15 cm 6"
- 101-8115-1 Curved 15 cm 6"



PECK-JOSEPH

鼻形成術用二重斜め剪刀。

- * 101-8120- Straight Sharp 15 cm 6"
- 101-8122- Straight Blunt 15 cm 6"
- 101-8123- Curved Sharp 15 cm 6"
- 101-8125- Curved Blunt 15 cm 6"

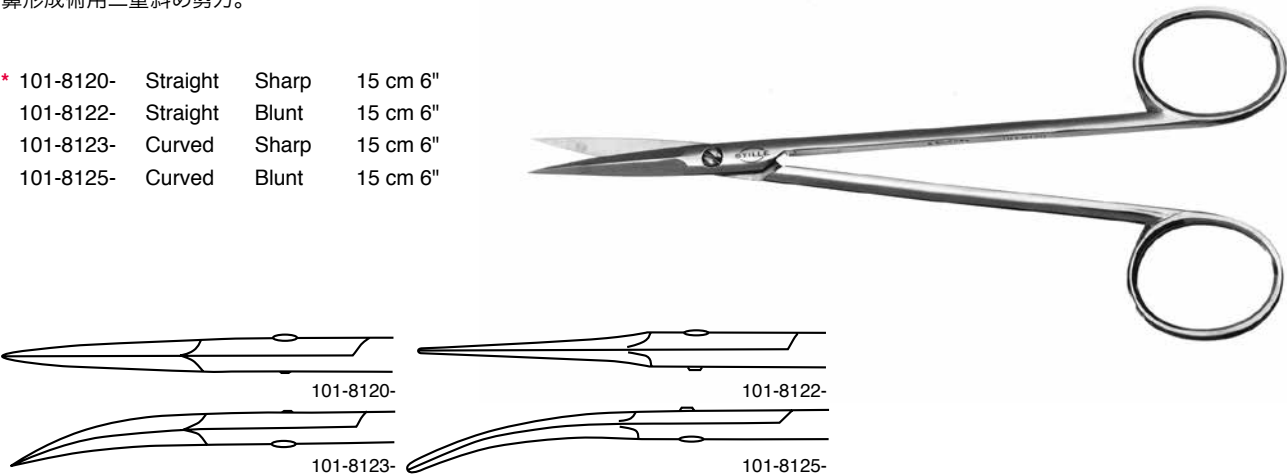

* Photo shows this instrument



FOMON

鼻形成術用剪刀。二重斜刃。


- * 101-8025- Curved 12.5 cm 5"



STILLE NASAL SUPER CUT

軟骨切除用スーパーカット鼻用剪刀。


- * 101-8411- Straight Angled shanks 18 cm 7"

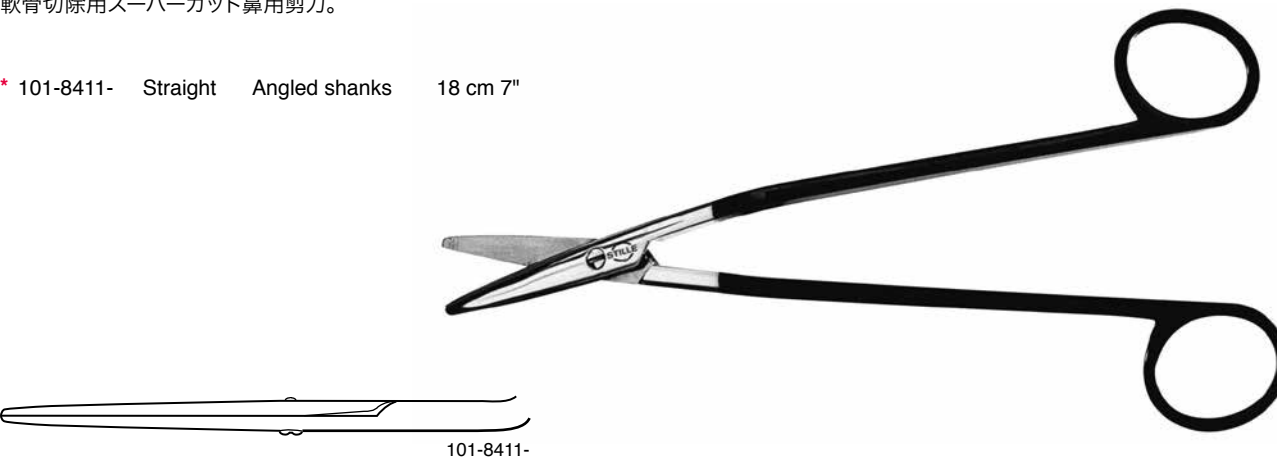

PECK-JOSEPH STILLE SUPER CUT NASAL SCISSORS

101-8120, 8123 ペックジョセフ剪刀のスーパーカットバージョン。

- 101-8120-1 Straight Sharp 15 cm 6"
- 101-8123-1 Curved Sharp 15 cm 6"

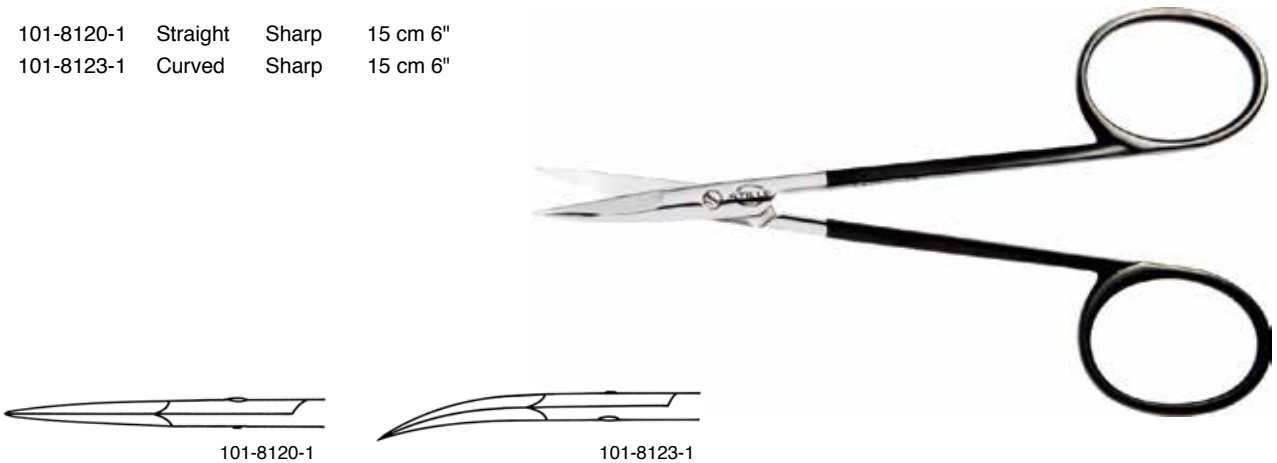



* Photo shows this instrument



GORNEY SUPER CUT

薄刃先端と半鋭利の外刃を持つ、スーパーカット二重斜面のフェイスリフト用剪刀。組織でのすべりを防止する鋸歯状刃モデル。



101-8430-171	Straight	17 cm 6.75"
* 101-8431-171	Curved	17 cm 6.75"
101-8433-20	Curved	20 cm 8"
101-8435-20	Curved Serrated	20 cm 8"

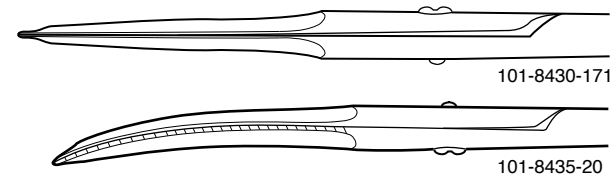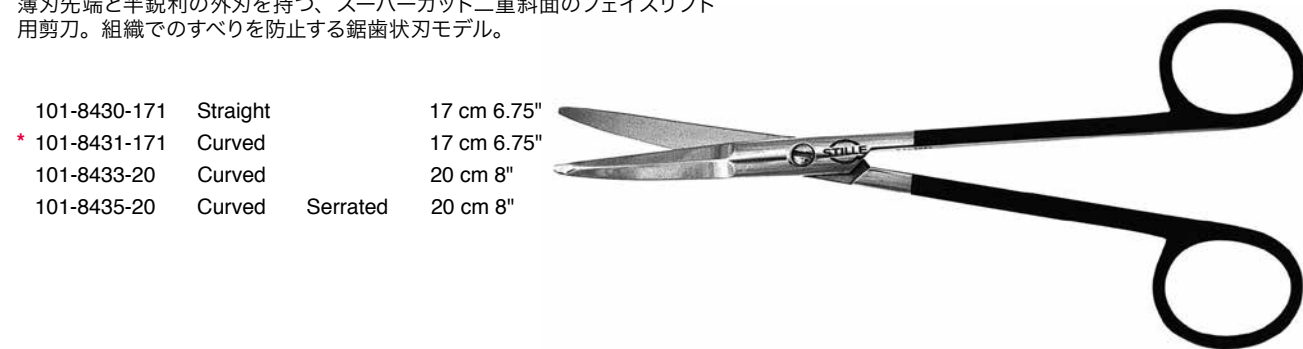

GORNEY ERGO

手の疲労を少なくするエルゴノミックデザイン。組織でのすべりを防止する鋸歯状刃モデル。薄刃先端と半鋭利外刃。


* 101-8430-172	Straight	17 cm 6.75"
101-8431-172	Curved	17 cm 6.75"
101-8433-202	Curved	20 cm 8"
101-8435-202	Curved Serrated	20 cm 8"

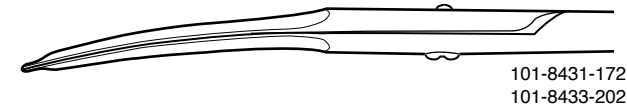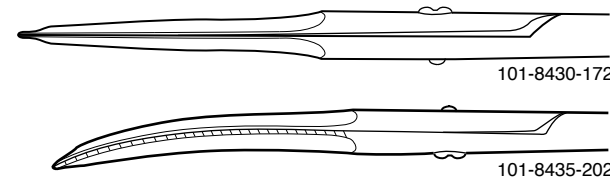

ASTON SUPER CUT

皮弁剥離用で、半鋭利外刃を持つ、スーパーカット二重斜面のフェイスリフト用剪刀。

* 101-8440-201	Straight	20 cm 8"
101-8441-201	Curved	20 cm 8"

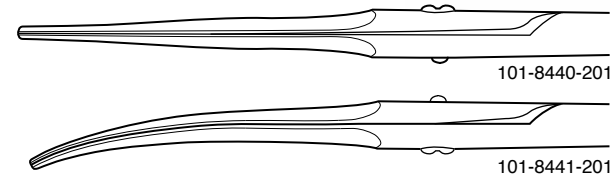


* Photo shows this instrument



DAVIS SUPER CUT

正確な切開および剥離用で、テーパー型刃と鋭利な先端を持つ、スーパーカットフェイスリフト用剪刀。


* 101-8452-	Curved	17 cm 6.75"
-------------	--------	-------------

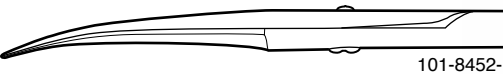

REES SUPER CUT

皮弁剥離用で、半鋭利の外刃を持つ、二重スーパーカットフェイスリフト用剪刀。


* 101-8456-171	Curved	17 cm 6.75"
----------------	--------	-------------

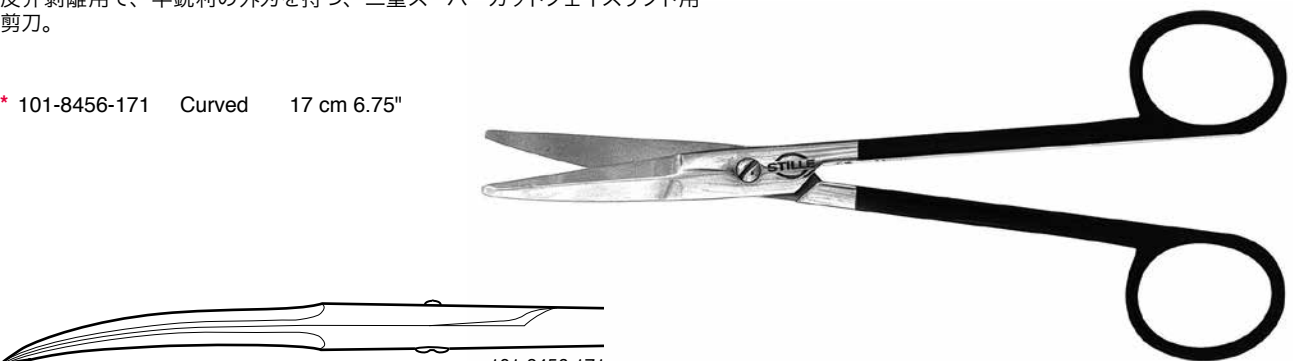

MATARASSO SUPER CUT

二重斜面半鋭利の外刃を持つ、スーパーカットフェイスリフト用剪刀。

101-8458-17	Curved	17 cm 6.75"
* 101-8458-20	Curved	20 cm 8"
101-8459-20	Straight	20 cm 8"

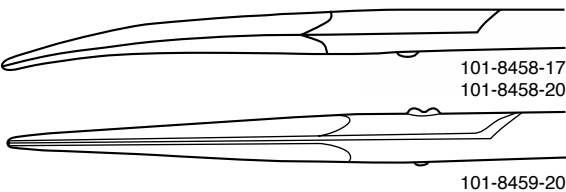

* Photo shows this instrument



MATARASSO ERGO

二重斜面半鋭利の外刃を持ち、マタラッソスーパーカットフェイスリフト用剪刀のエルゴノミックデザインバージョン。


- 101-8458-172 Curved 17 cm 6.75"
- * 101-8458-202 Curved 20 cm 8"



STILLE SUTURE SCISSORS

抜糸用剪刀。

- * 101-8584- Curved 13.5 cm 5.25"

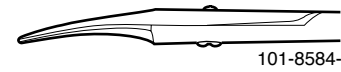

SPENCER STILLE SUTURE SCISSORS

縫合糸用剪刀。デリケートタイプ。

- * 101-8586-9 9cm 3.5"



* Photo shows this instrument



LISTER STILLE TC BANDAGE SCISSORS

耐久性を高める為 TC チップをインサートした包帯用剪刀。

- * 101-8595-18 TC-inserts 18 cm 7"



LITTAUER STILLE SUTURE SCISSORS

101-8586-9 スペンサー剪刀より大きな刃を持つ縫合糸用剪刀。様々な手術に使用できます。

- * 101-8597-14 delicate pattern 14 cm 5.5"



UNIVERSAL STILLE WIRE CUTTING SCISSORS

ワイヤーカット剪刀、TC チップ付き。ソフトワイヤー 1.2mm , ハードワイヤー 0.8mmまで。


- * 101-8815-12 TC 12 cm 4.75"



* Photo shows this instrument



Stille forceps

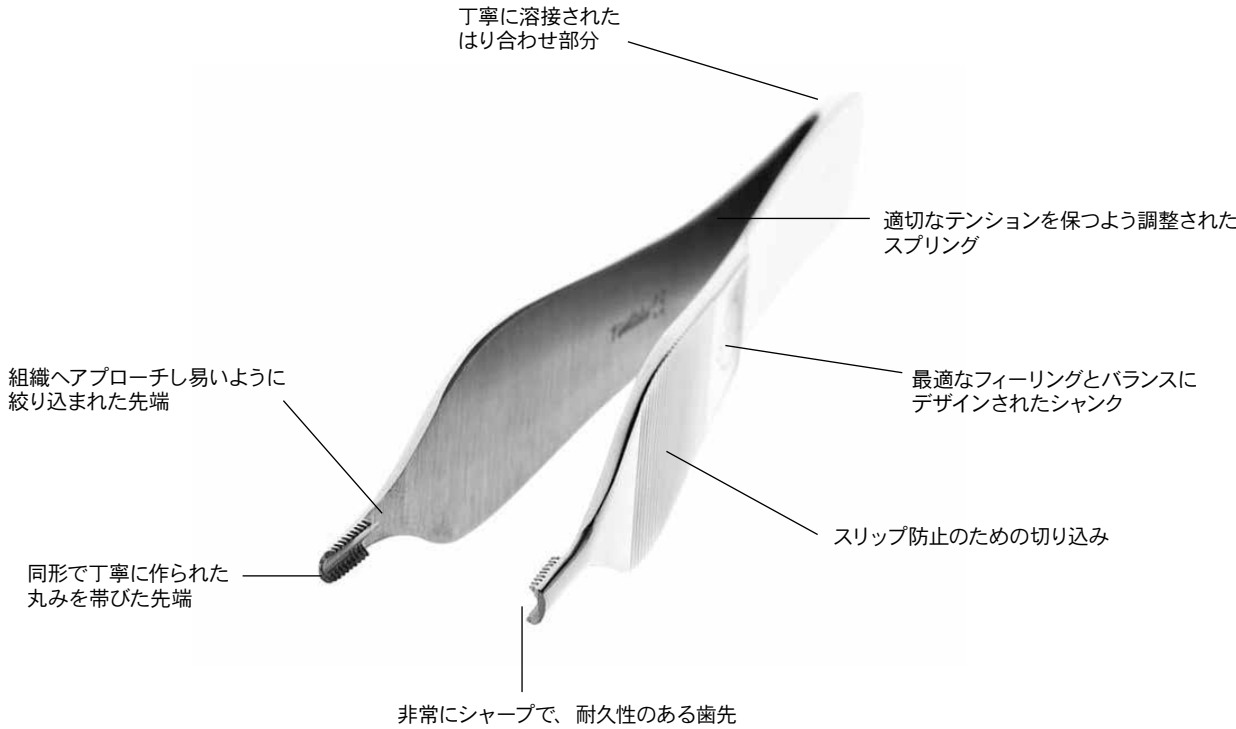

Stille 鑷子は、優れたバランスとフィーリングを持っています。手に負担をかけないように、しかし、器具をコントロールできる十分なスプリング機能を持つように、製造過程で鑷子のテンションは調整されています。

容易に把持し、離せるように、歯には入念な注意が施されています。同様に、鋸歯状の切り込みにも注意が施されており、完全な嵌合ができるようになっています。両先端は閉じたときに重ならないようになっています。


Stille 鑷子の検査方法

- ・ ゆっくりと両方の柄を押さえます。両方の先端が均等に閉じ、重ならないことをチェックします。
- ・ 鋸歯状の切り込みと歯が、適切に嵌合することを確認します。
- ・ 両方の柄をいっしょに強く押さえます。このとき、先端が開かないようにします。

ADSON

非常にデリケートな先端で 1x2 微歯を持つ組織鑷子。専門性の高い手術の細かい手術に使用。


102-9019-	Very delicate	1x2 Fine teeth	12 cm 4.75"
102-9022-	Cross-serrated	1x2 Fine teeth	12 cm 4.75"
* 102-9022-15	Cross-serrated	1x2 Fine teeth	15 cm 6"

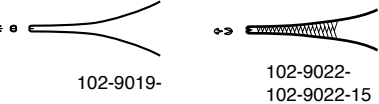

ADSON-CALLISON

結紮用プラットフォームと 1x2 微歯を持つ組織鑷子。


* 102-9021-	Tying platform	1x2 Teeth	12 cm 4.75"
102-9021-1	Delicate Tying platform	1x2 Teeth	12 cm 4.75"

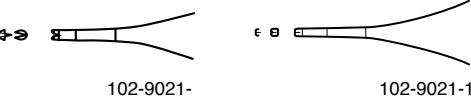

ADSON-BROWN

軟部組織や軟骨を強固に、しかも傷つけずに（無外傷的に）把持するために、先端にサイド把持用歯（ティース）がついた、組織鑷子。

102-9023-12	Side-grasping teeth	12 cm 4.75"
-------------	---------------------	-------------

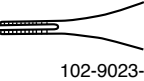

* Photo shows this instrument



GILLIES

1×2 微歯とスタビライザー付の組織鑷子。アドソンサイズの先端のさらに長い鑷子。

* 102-9027- 1x2 Fine teeth Serrated 15.5 cm 6.25"



STILLE TISSUE FORCEPS

1×2 微歯とスタビライザー付の組織鑷子。


* 102-9028- 1x2 Fine teeth Serrated 15.5 cm 6.25"



STILLE TISSUE FORCEPS

1×2 微歯付の組織鑷子。

* 102-9050-13 1x2 Fine teeth 13 cm 5"

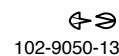


* Photo shows this instrument



STILLE TISSUE FORCEPS

1×2 歯付の組織鑷子。


* 102-9060-15 1x2 Teeth 15 cm 6"
102-9060-17 1x2 Teeth 17 cm 6.75"
102-9060-20 1x2 Teeth 20 cm 8"

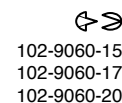

STILLE TISSUE FORCEPS

2×3 歯付の組織鑷子。1×2 歯付よりも強い把持力が必要な場合に使用。


* 102-9062-15 2x3 Teeth 15 cm 6"
102-9062-17 2x3 Teeth 17 cm 6.75"
102-9062-20 2x3 Teeth 20 cm 8"

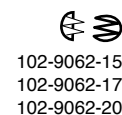

ADLERCREUTZ

4×5 微歯付組織鑷子。神経手術では硬膜を、心血管手術では心膜を保持するのに有用。

* 102-9248-15 4x5 Fine teeth 15 cm 6"
102-9248-20 4x5 Fine teeth 20 cm 8"
102-9248-25 4x5 Fine teeth 25 cm 10"

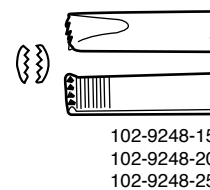


* Photo shows this instrument



WAUGH-BROPHY

1×2 微歯付組織鑷子。アドソン型のように、非常に細い先端を持っています。細長い器具を必要とする場合に有用。



* 102-9252-20	1x2 Fine teeth	Cross-serrated	20 cm 8"
102-9252-25	1x2 Fine teeth	Cross-serrated	25 cm 10"
102-9252-30	1x2 Fine teeth	Cross-serrated	30 cm 12"

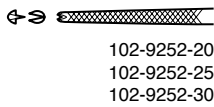

RUSSIAN-STILLE

組織を強固に把持するための鑷子。ドレッシング鑷子よりも強く把持し、組織への損傷を避ける必要がある場合に使用。硬く、滑りやすい組織用。


102-9270-20	20 cm 8"
-------------	----------

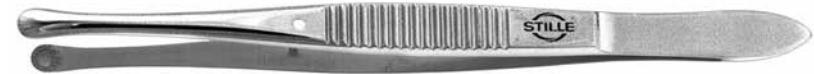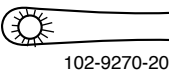

ADSON

さまざまなタイプの先端を持つ多目的ドレッシング鑷子。

102-9020-	Serrated	12 cm 4.75"
* 102-9020-15	Serrated	15 cm 6"
102-9020-1	Diamond jaws	12 cm 4.75"
102-9024-	Cross-serrated TC jaws	12 cm 4.75"

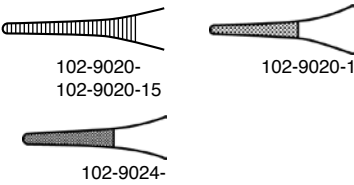



* Photo shows this instrument



MCINDOE

細かい組織の把持用で、スタビライザーとデリケートなジョーを持つドレッシング鑷子。


* 102-9025-	Serrated	15.5 cm 6.25"
102-9025-1	Diamond jaws	15.5 cm 6.25"

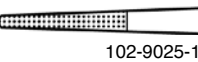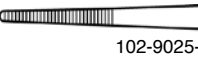

STILLE DRESSING FORCEPS

角先端鋸刃状ジョーの組織鑷子で、あらゆる手術に使用。


102-9030-13	Square points	13 cm 5"
* 102-9030-15	Square points	15 cm 6"
102-9030-17	Square points	17 cm 6.75"
102-9030-20	Square points	20 cm 8"
102-9030-25	Square points	25 cm 10"

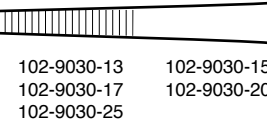

STILLE DRESSING FORCEPS

丸先端鋸刃状ジョーの組織鑷子で、あらゆる手術に使用。

* 102-9040-15	Rounded points	15 cm 6"
102-9040-17	Rounded points	17 cm 6.75"
102-9040-20	Rounded points	20 cm 8"
102-9040-25	Rounded points	25 cm 10"
102-9040-30	Rounded points	30 cm 12"

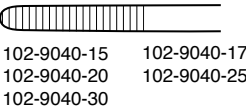



* Photo shows this instrument



CRAFOORD-STILLE

丸先端組織鑷子。完全なバランスとデリケートなシャンクにより、独特のフィーリングを与えています。



102-9077-20	Rounded points	Serrated	20 cm 8"
* 102-9078-20	Rounded points	Diamond jaws	20 cm 8"

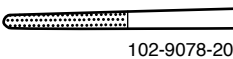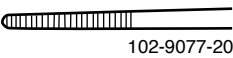

WAUGH-BROPHY

非常に細い先端と2種類のジョーデザインのある、ドレッシング鑷子。クロス鋸歯先端には優れた把持力があります。


* 102-9254-	Cross-serrated	20 cm 8"
102-9255-20	Diamond jaws	20 cm 8"
102-9255-25	Diamond jaws	25 cm 10"

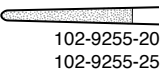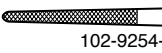


OLIVECRONA-STILLE

2x3 微歯付硬膜鑷子。非貫通型チップなので、組織を傷つけずに最大の力で把持することができます。

* 102-9244-15	2x3 Fine teeth	15 cm 6"
102-9244-20	2x3 Fine teeth	20 cm 8"
102-9244-25	2x3 Fine teeth	25 cm 10"

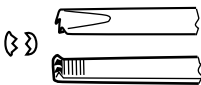

102-9244-15
102-9244-20
102-9244-25

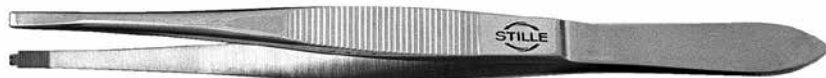


* Photo shows this instrument




STILLE DE BAKEY

細かい組織、または血管用で、ドベイキージョーを持つ、無外傷性鑷子。

102-9340	1 mm	De Bakey type	15 cm 6"
102-9342	1 mm	De Bakey type	20 cm 8"
102-9354	1.5 mm	De Bakey type	25 cm 10"
* 102-9300-	2 mm	De Bakey type	15 cm 6"
102-9302-	2 mm	De Bakey type	20 cm 8"
102-9304-	2 mm	De Bakey type	25 cm 10"
102-9312-	2.7 mm	De Bakey type	15 cm 6"
102-9314-	2.7 mm	De Bakey type	20 cm 8"
102-9316-	2.7 mm	De Bakey type	25 cm 10"
102-9318-	2.7 mm	De Bakey type	30 cm 12"
102-9320-	3.2 mm	De Bakey type	20 cm 8"
102-9322-	3.2 mm	De Bakey type	25 cm 10"

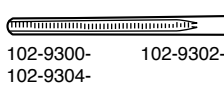


102-9300-
102-9304-

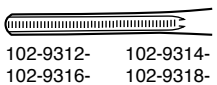

102-9302-
102-9312-



102-9314-
102-9316-

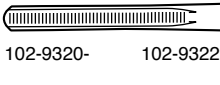


102-9320-
102-9322-

STILLE DE BAKEY

細かい組織、または血管用で、ドベイキージョーを持つ、角度付無外傷性鑷子。

* 102-9308-	Angled 30, atraumatic	De Bakey type, 2 mm	20 cm 8"
-------------	-----------------------	---------------------	----------

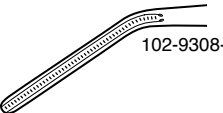


102-9308-



STILLE DE BAKEY

細かい組織、または血管用で、ドベイキージョーと非鋸歯状ハンドルを持つ、無外傷性鑷子。組織を強く把持しすぎないためのストッパー（固定ピン）が付いています。

* 102-9330-	2 mm	De Bakey type	20 cm 8"
-------------	------	---------------	----------

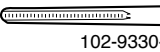

102-9330-




* Photo shows this instrument



STILLE IRIS FORCEPS

1×2 微歯または鋸歯状ジョーの 2 タイプ。短いデリケート鑷子。


* 102-9460-	Serrated	10 cm 4"
102-9470-	1x2 Fine teeth	10 cm 4"

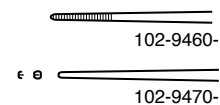

BJÖRK-STILLE DIATHERMY FORCEPS

ジアテルミー用絶縁鑷子。鋸歯により、細かい構造の把持が可能です。

* 102-9845-15	Insulated	15 cm 6"
102-9845-20	Insulated	20 cm 8"
102-9845-25	Insulated	25 cm 10"

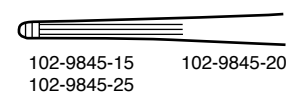

BJÖRK-STILLE KNOT HOLDING FORCEPS

ジアテルミー用鑷子と同型ですが、絶縁はされていません。

* 102-9846-20	20 cm 8"
---------------	----------



* Photo shows this instrument



WAUGH-BROPHY STILLE INSULATED DIATHERMY FORCEPS

102-9252-xx フォフプロフィ組織鑷子の絶縁コーティングバージョン。


* 102-9852-20	1x2 teeth Cross-serrated	20 cm 8"
102-9852-25	1x2 teeth Cross-serrated	25 cm 10"
102-9852-30	1x2 teeth Cross-serrated	30 cm 12"



WAUGH-BROPHY STILLE INSULATED DIATHERMY

102-9254, 9255-xx フォフプロフィ包帯鑷子の絶縁コーティングバージョン。


102-9855-20	Cross-serrated	20 cm 8"
102-9855-25	Cross-serrated	25 cm 10"

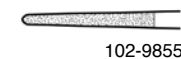

* Photo shows this instrument



Stille artery forceps

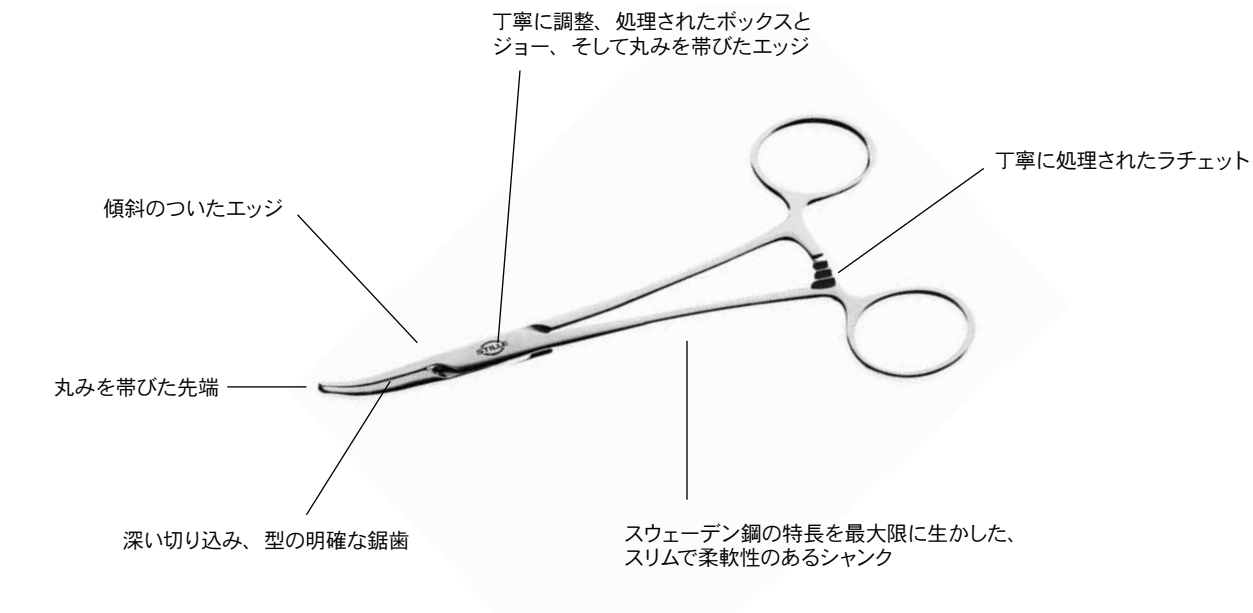

Stille 止血鉗子は、利用できる最も高品質なステンレス鋼製で、外科医の特別なニーズに合わせてデザインされています。止血鉗子は常に、容易に開閉し、思いどおりのコントロールが可能です。安定したグリップにより、この止血鉗子は手術中にすべらないようになっています。鋸歯状の切り込みにより、完全に嵌合します。出血血管を挟むと、血流が抑えられ調整に貴重な時間を費やすことはありません。Stille 製品は寿命が長く、病院の経費を低減します。

Stille 止血鉗子の検査方法

- ・両方のジョーが合うまでゆっくり閉じます。
- ・ジョーの溝と溝、山と山が重なる場合は、位置が不良となっています。
- ・先端にティースがある場合は、このティースが適切に嵌合しているかどうか調べます。
- ・鉗子のリングハンドルを手で把持し、できるだけ大きく開きます。ボックスロックにかなりのあそびがあり、非常に緩いと位置調整不良が生じます。このような場合、この鉗子は修理が必要です。
- ・鉗子の洗浄および滅菌は、必ずラチェットを開いた状態でおこなってください。



PEAN STILLE ARTERY FORCEPS

一般外科用多目的鉗子。



* 103-10015-131 Straight 13.5 cm 5.25"



HALSTED-MOSQUITO DELICATE

小術野用無菌のデリケート止血鉗子。


* 103-10026-121 Straight 12 cm 4.75"
103-10028-121 Curved 12 cm 4.75"

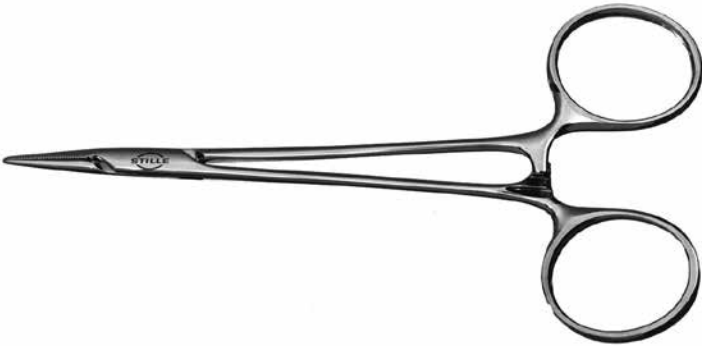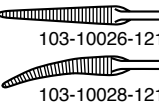

HALSTED-MOSQUITO

小術野用無菌の止血鉗子。形成手術、神経手術、Hand Surgery など細かい手術に使用。

* 103-10030-121 Straight 12 cm 4.75"
103-10032-121 Curved 12 cm 4.75"
103-10032-181 Curved 18 cm 7"

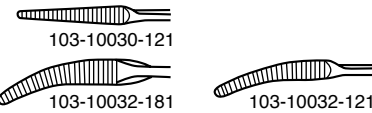


* Photo shows this instrument



HALSTED-MOSQUITO

小術野用 1×2 の歯付止血鉗子。形成手術、神経手術、Hand Surgery など細かい手術に使用。


* 103-10035-121	Straight	1x2 Teeth	12 cm 4.75"
103-10037-121	Curved	1x2 Teeth	12 cm 4.75"

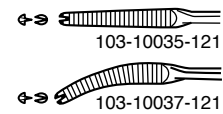

KOCHER

1×2 歯付止血鉗子。短い器具を要する場合に幅広く使用。臓器を牽引または挙上するための組織鉗子としても使用できます。


* 103-10115-141	Straight	1x2 Teeth	14 cm 5.5"
103-10117-141	Curved	1x2 Teeth	14 cm 5.5"

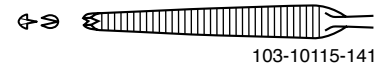

KELLY STILLE ARTERY FORCEPS

適度な短さの半鋸歯ジョー ケリー止血鉗子。

* 103-10150-141	Straight	14 cm 5.5"
103-10152-141	Curved	14 cm 5.5"

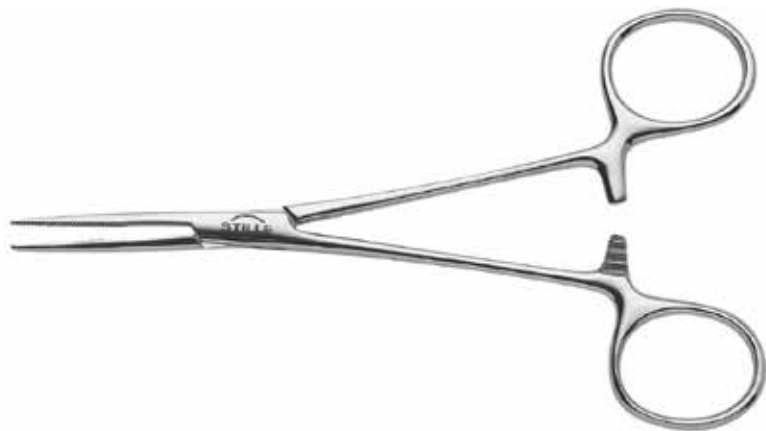

* Photo shows this instrument



KELLY-RANKIN STILLE ARTERY FORCEPS

半鋸歯ジョー ケリー止血鉗子。

* 103-10160-161	Straight	16 cm 6.25"
103-10162-161	Curved	16 cm 6.25"



CHRISTOPHE-STILLE

無歯の反型止血鉗子。


* 103-10172-	Curved	16 cm 6.25"
--------------	--------	-------------



CRILE

無歯の多目的止血鉗子。モスキート止血鉗子よりも高い強度が必要で、比較的小さい術野に使用。

* 103-10180-141	Straight	14 cm 5.5"
103-10180-161	Straight	16 cm 6.25"
103-10180-181	Straight	18 cm 7"
103-10182-141	Curved	14 cm 5.5"
103-10182-161	Curved	16 cm 6.25"
103-10182-181	Curved	18 cm 7"

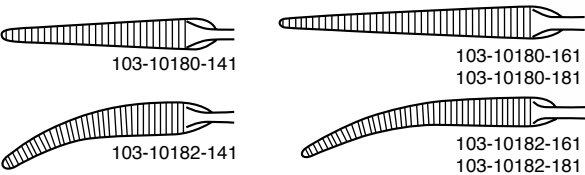


* Photo shows this instrument



CRILE

1×2 歯付多目的止血鉗子。モスキート止血鉗子よりも高い強度が必要で、比較的小さい術野に使用。



* 103-10185-	Straight	1x2 Teeth	14 cm 5.5"
103-10185-161	Straight	1x2 Teeth	16 cm 6.25"
103-10187-141	Curved	1x2 Teeth	14 cm 5.5"
103-10187-161	Curved	1x2 Teeth	16 cm 6.25"

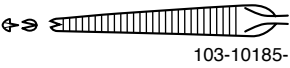

LERICHE

高度テーパー型止血鉗子。小さい術野に使用。



* 103-10190-	Straight		15 cm 6"
103-10192-	Curved		15 cm 6"
103-10195-	Straight	1x2 Teeth	15 cm 6"
103-10197-	Curved	1x2 Teeth	15 cm 6"

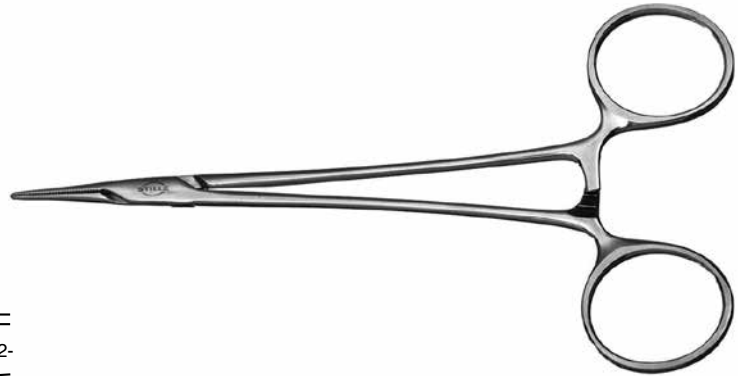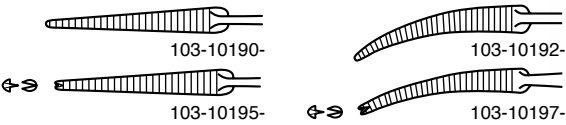

ROCHESTER-PÉAN

止血鉗子。比較的、鈍な先端。あらゆるタイプの手術に使用。

* 103-10200-161	Straight	16 cm 6.25"
103-10200-181	Straight	18 cm 7"
103-10202-161	Curved	16 cm 6.25"
103-10202-181	Curved	18 cm 7"

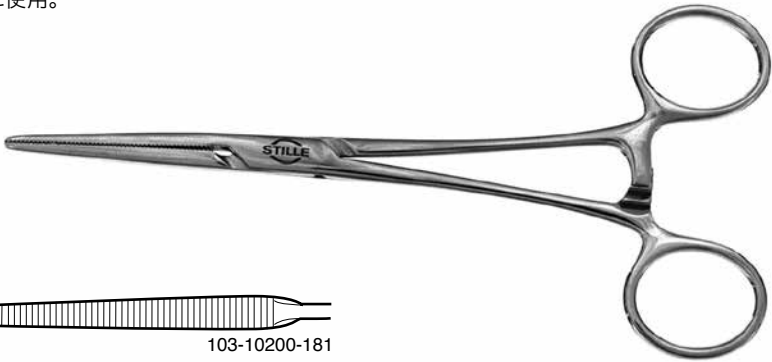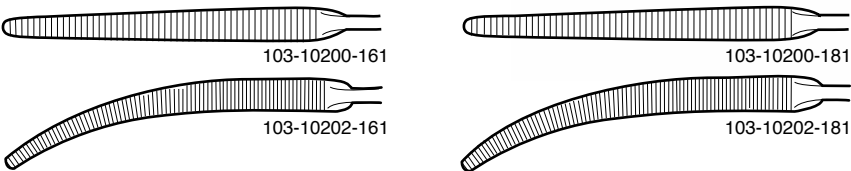




* Photo shows this instrument



ROCHESTER-OCHSNER

1×2 歯付止血鉗子。血管の閉塞と臓器の挙上または牽引の両方に、強力な鉗子が必要な場合に使用。






103-10205-161	Straight	1x2 Teeth	16 cm 6.25"
* 103-10205-181	Straight	1x2 Teeth	18 cm 7"
103-10207-161	Curved	1x2 Teeth	16 cm 6.25"
103-10207-181	Curved	1x2 Teeth	18 cm 7"

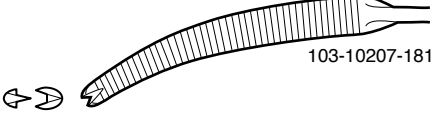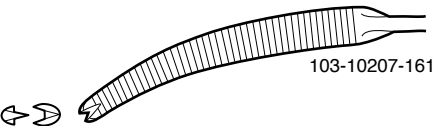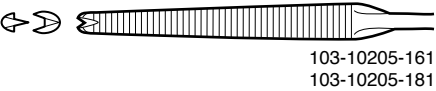

ROCHESTER-PÉAN

止血鉗子。20cmと24cmの2タイプ。子宮切除鉗子とも呼ばれます。





* 103-10210-201	Straight	20 cm 8"
103-10210-241	Straight	24 cm 9.5"
103-10212-201	Curved	20 cm 8"
103-10212-241	Curved	24 cm 9.5"
103-10212-301	Curved	30 cm 12"

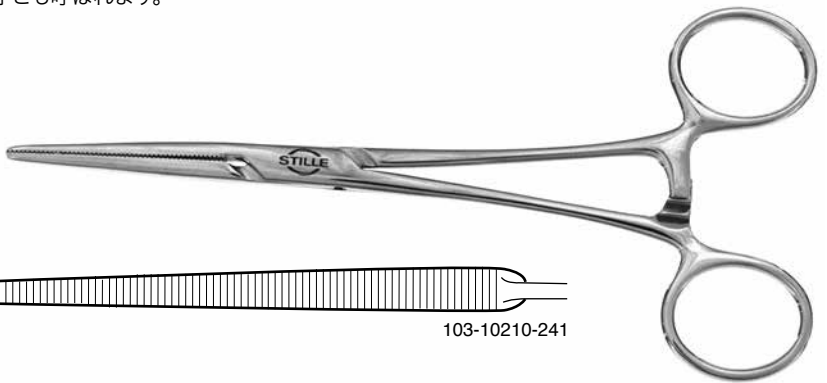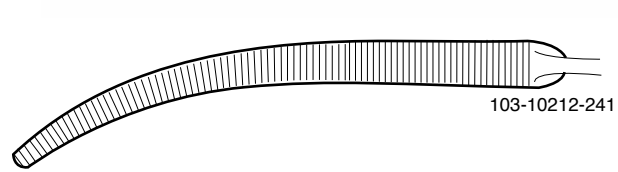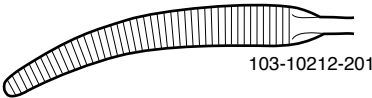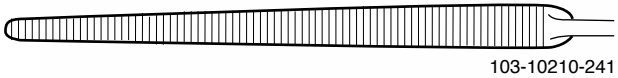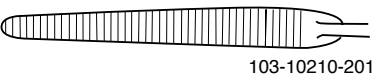

ROCHESTER-OCHSNER

1×2 歯付止血鉗子。血管の閉塞と臓器の挙上または牽引の両方に、強力な鉗子が必要な場合に使用。

* 103-10215-201	Straight	1x2 Teeth	20 cm 8"
103-10215-241	Straight	1x2 Teeth	24 cm 9.5"
103-10217-201	Curved	1x2 Teeth	20 cm 8"
103-10217-241	Curved	1x2 Teeth	24 cm 9.5"

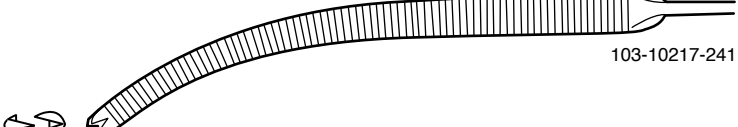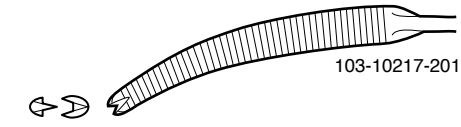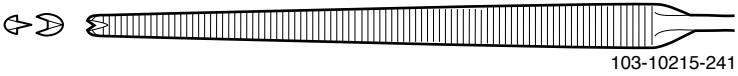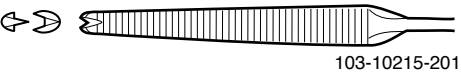



* Photo shows this instrument



BENGOLEA STILLE

無歯の直型または反型の長い止血鉗子。


- 103-10220-201 Straight 20 cm 8"
- * 103-10222-201 Curved 20 cm 8"

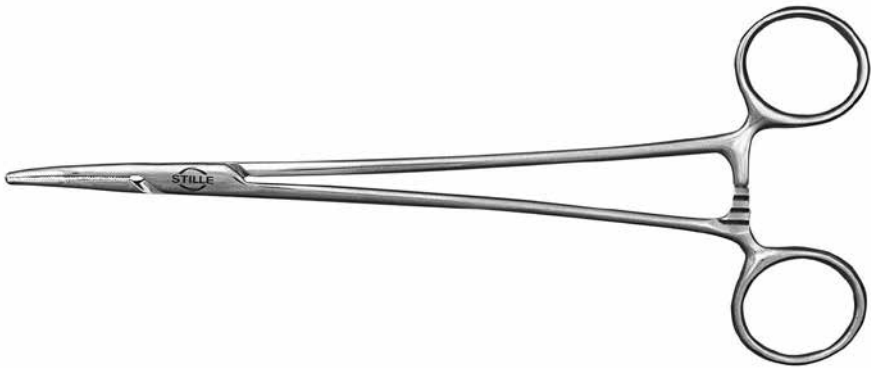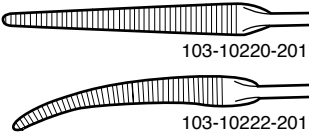

OLIVECRONA-STILLE

16cmの直型止血鉗子。細い先端の長い止血鉗子として有用。


- * 103-10240-161 Straight 16 cm 6.25"

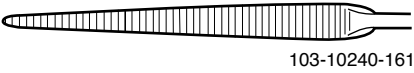

ADSON STILLE ARTERY FORCEPS

若干長さや繊細さが必要とされる部位に適したポピュラーな止血鉗子。

- * 103-10260-191 Straight 19 cm 7.5"
- 103-10262-191 Curved 24 cm 7.5"

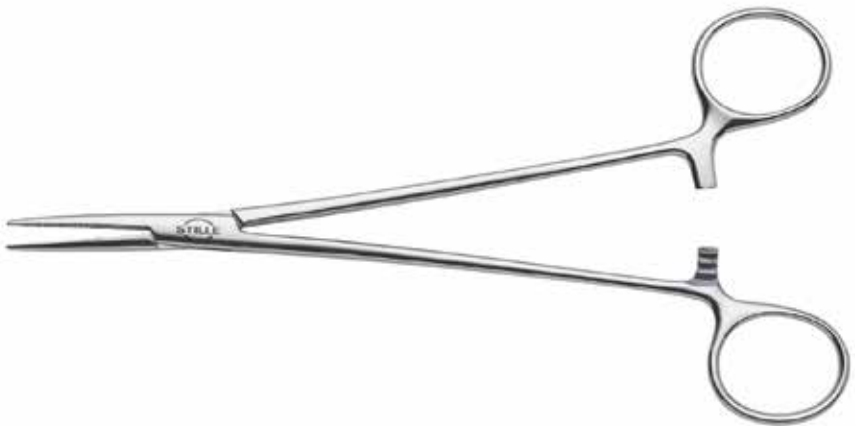

* Photo shows this instrument



DANDY-STILLE

無歯の反型止血鉗子。神経手術に使用。


- * 103-10310- Side curved 14 cm 5.5"



SCHNIDT

一般手術に使用する止血鉗子。



- * 103-10411-201 Curved 20 cm 8"

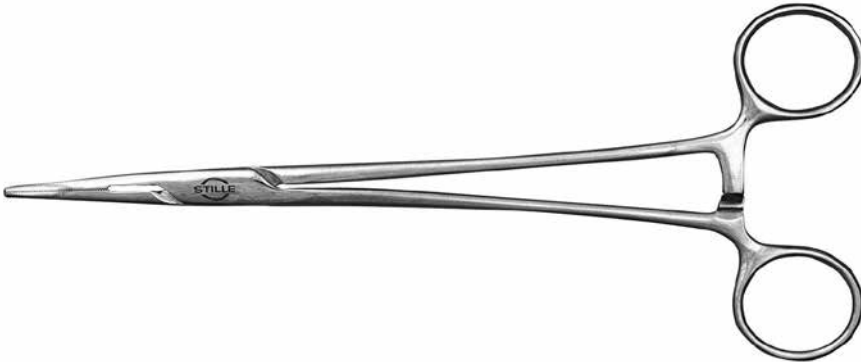

SAWTELL

半鋸歯状強彎型の止血鉗子。

- * 103-10413-211 Curved 21 cm 8.25"
- 103-10413-241 Curved 24 cm 9.5"

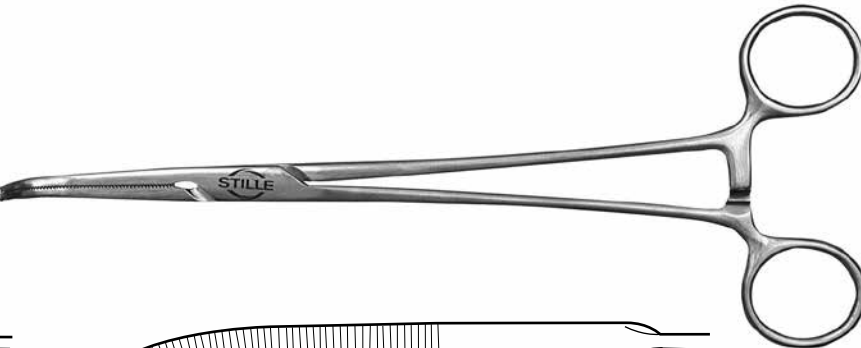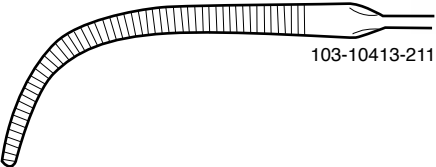


* Photo shows this instrument



CRAFOORD-STILLE

胸部手術および心血管手術用。非常に有用な細いモスキート型先端ですが、長さがあり深い術野での作業も可能です。

- * 103-10416- Curved 18 cm 7"
- 103-10430-241 Curved 24 cm 9.5"

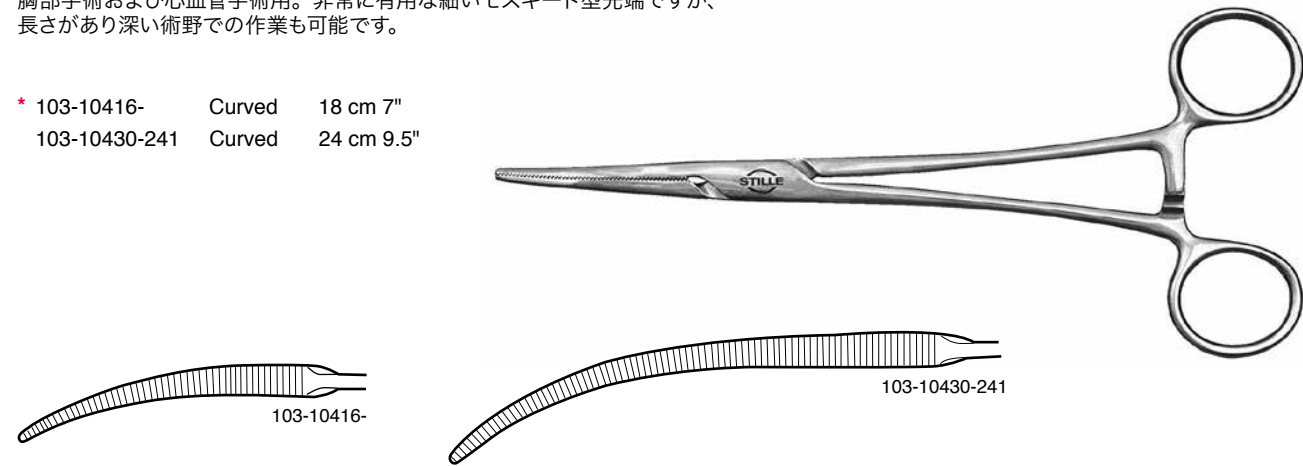

HEISS-STILLE

半鋸歯状強彎型の剥離および結紮クランプ。


- 103-10421-211 Straight 20 cm 8"
- 103-10422-211 Curved 20 cm 8"
- * 103-10420-201 Strongly curved 20 cm 8"



STILLE ARTERY AND LIGATURE CLAMP

ジョー部分の彎曲程度が異なる、4 タイプのデリケート剥離鉗子。

- * 103-10423-1 Slightly curved 20 cm 8"
- 103-10423-2 Curved 20 cm 8"
- 103-10423-3 Strongly curved 19.5 cm 7.75"
- 103-10423-4 Angled 90 19 cm 7.5"

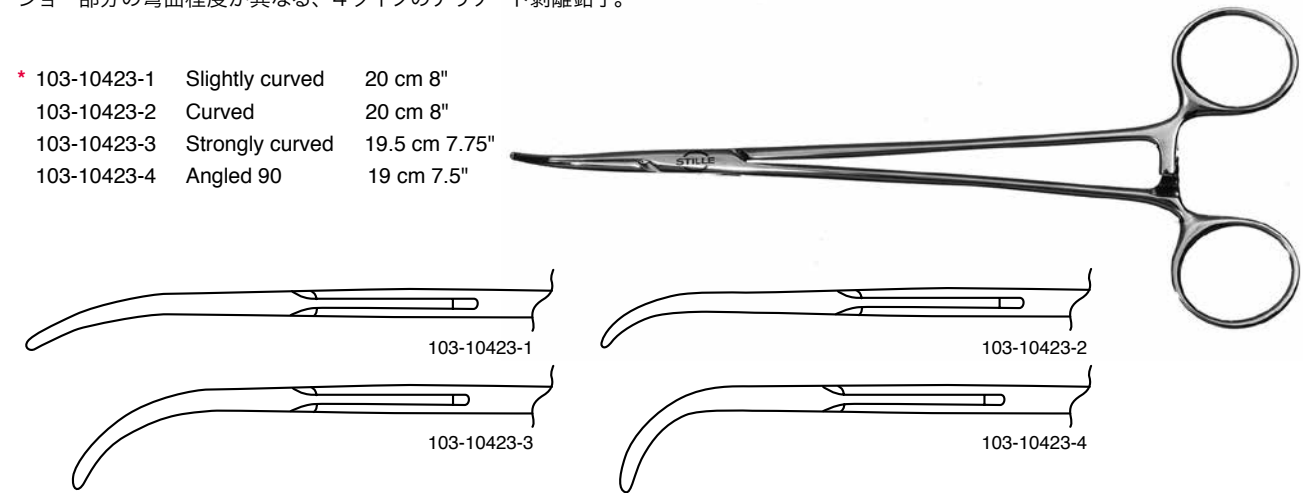


* Photo shows this instrument



OVERHOLT

強彎型剥離鉗子。


- * 103-10425- Strongly curved 14 cm 5.5"

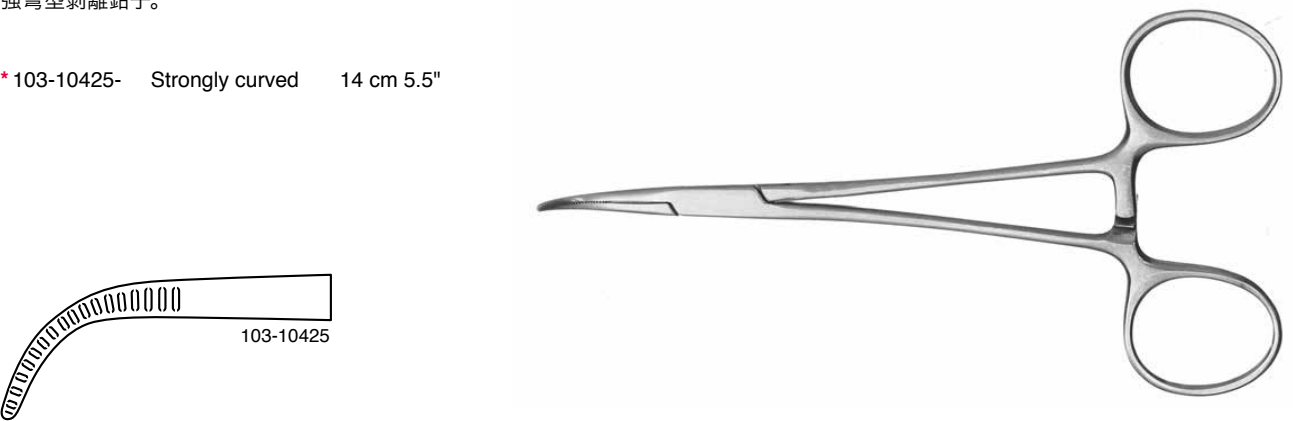

* Photo shows this instrument



Stille needle holders

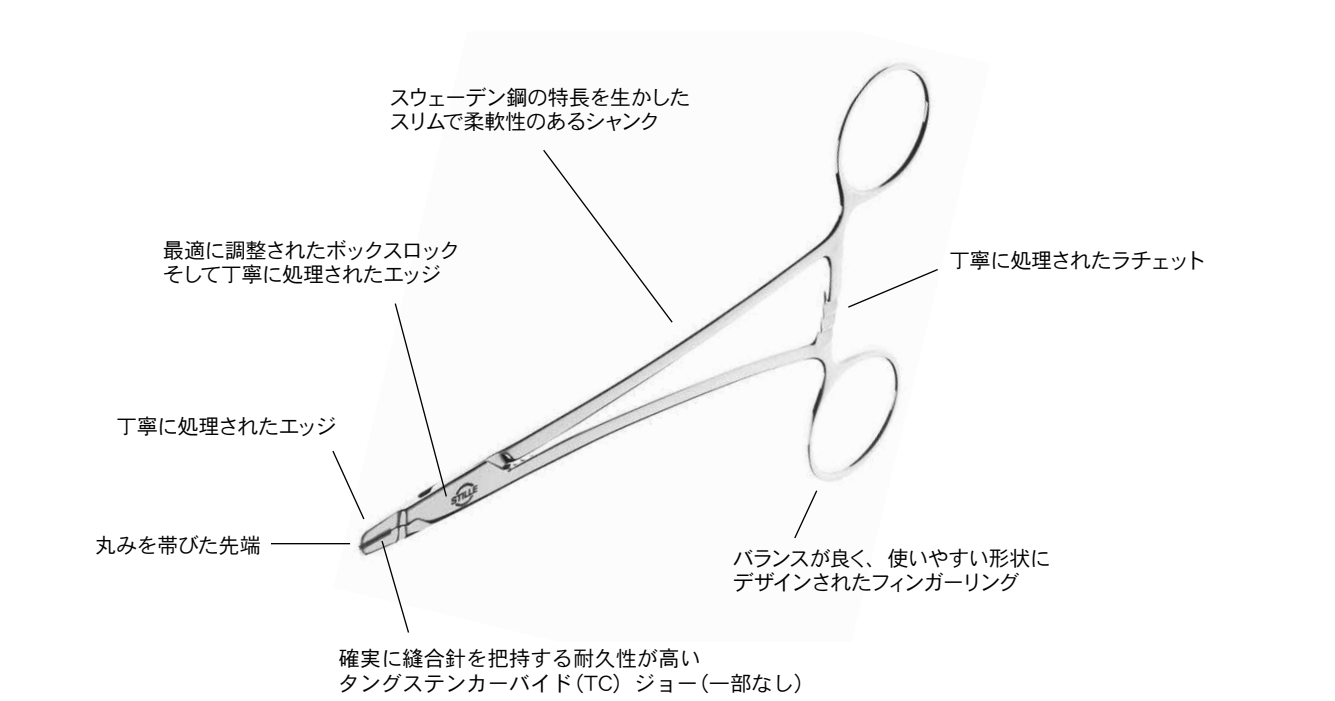

持針器は、非常に誤用されることの多い手術器具です。それゆえ、当社では、高品質の持針器を製造するために、多大な努力を重ねています。Stille 持針器は、針をしっかりと安全に保持します。多くの Stille 持針器には、耐久性を高め、確実に扱えるように、タングステンカーバイドインサートが装備されています。Stille 持針器は、長時間使用しても完全なバランスと正確な位置調整が保たれ、Stille 独特の感触を提供し続けます。

推奨サイズよりも大きい縫合針は、持針器に損傷を与える可能性があります。保証が無効になります。縫合糸サイズによる持針器の推奨については「縫合糸サイズによる持針器の選択ガイド」をご覧ください。

Stille 持針器の検査方法

- 持針器のジョーに縫合針を把持し、次に 2 段目のラチェットで持針器をロックします。
- その際、縫合針が手で簡単に回るようなら、その持針器はメンテナンスが必要です。
- 持針器が新しい場合は時間をかけて最初のラチェットの歯にしっかり固定します。
- 持針器のリングを手で保持しながら、できる限り持針器を開きます。ボックスロックにかなりあそびがあり、非常に緩んでいる場合は、位置調整不良です。この持針器はメンテナンスが必要です。
- 持針器の洗浄および滅菌は、必ずラチェットを開いた状態でおこなってください。



Guide for choice of needle holder in relation to suture size

Suture size	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0	11/0
104-15542					X	X					
104-15545							X	X			
104-15546							X	X			
104-15550				X	X	X					
104-15551				X	X	X					
104-15553-17					X	X	X				
104-15556					X	X					
104-15557					X	X					
104-15558					X	X					
104-15559					X	X					
104-15560				X	X	X					
104-15560-2				X	X	X					
104-15561-141	X	X	X	X							
-161	X	X	X	X							
-181	X	X	X	X							
-201	X	X	X	X							
-251	X	X	X	X							
104-15565-151				X	X	X					
-181				X	X	X					
-201				X	X	X					
-231				X	X	X					
104-15566-151				X	X	X					
-181				X	X	X					
-201				X	X	X					
-231				X	X	X					
104-15569				X	X	X					
104-15571			X	X	X	X					
104-15573-161				X	X	X					
-181				X	X	X					
-201				X	X	X					
104-15585-161						X	X	X			
-181						X	X	X			
-221						X	X	X			
-251						X	X	X			
104-15586						X	X	X			
104-15586-201						X	X	X			
104-15621-179	X	X	X								
-209	X	X	X								
104-15777						X	X	X			
104-15778						X	X	X			



RAPP-STILLE

滑らかなジョーを持つ、13cm結び目保持鉗子。

* 104-15140- 13 cm 5"



DERF

形成手術用で、かなり短いTC ジョーを持つ持針器。5/0 ～ 6/0 縫合糸用。

* 104-15542- TC jaws 12 cm 4.75"



KILNER STILLE NEEDLE HOLDER

バイオネットシャンクのデリケート持針器。TC ジョー付き。
4/0 以下縫合糸用。

* 104-15549-131 13 cm 5"




* Photo shows this instrument



GILLIES

剪刀付持針器。人間工学を基にしたジョーとフィンガーリング。
親指の根元に合わせてかなり大きめのリングハンドルが角度付で設置されて
います。ラチェット無し。TC ジョーのあるものと無いものがあります。剪刀
部があるので、この持針器ひとつで縫合と切断が可能です。4/0 ～ 6/0 縫
合糸用。



* 104-15550- With Scissors 16 cm 6.25"
104-15551- With Scissors TC jaws 16 cm 6.25"

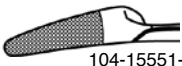

WEBSTER DELICATE

極細縫合糸用の非常にデリケートな持針器。スムーズジョーまたはTC
ジョー。7/0 ～ 8/0 縫合糸用。





* 104-15545- Ultra delicate TC-sprayed jaws 12 cm 4.75"
104-15546- Ultra delicate Smooth jaws 12 cm 4.75"

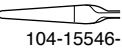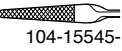

WEBSTER/KLEINERT

細縫合針用デリケート持針器。スムーズジョーまたはTCジョー。5/0 ～
6/0 縫合糸用。Webster-Kleinert (104-15557) は握り心地が良いよう
にオフセット彎曲になっています。

104-15556- Delicate Smooth 12 cm 4.75"
* 104-15557- Delicate Smooth 12 cm 4.75"
Offset bows
104-15559- Delicate Serrated TC jaws 12 cm 4.75"

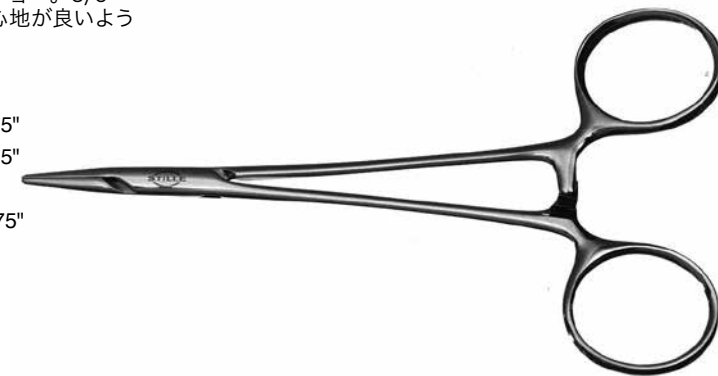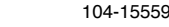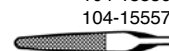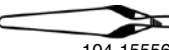



* Photo shows this instrument



WEBSTER-STILLE

細縫合針用デリケート持針器。スムーズ TC ジョー。5/0 ～ 6/0 縫合糸用。



- * 104-15558- Smooth TC jaws 12 cm 4.75"

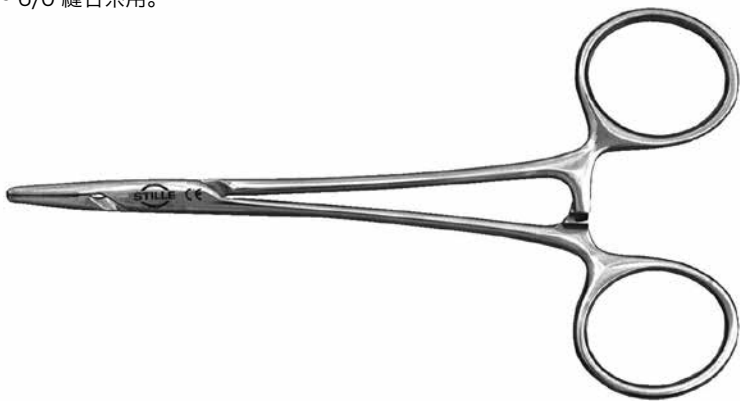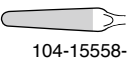

HALSEY

多くの手術に使用される TC ジョーを持つ持針器。人間工学に基づいて設計された親指用フィンガーリング付モデル。Webster 持針器よりもわずかに大きい縫合糸用。4/0 ～ 6/0 縫合糸用。



- * 104-15560- TC jaws 12.5 cm 5"
- 104-15560-2 Ergo TC jaws 12.5 cm 5"

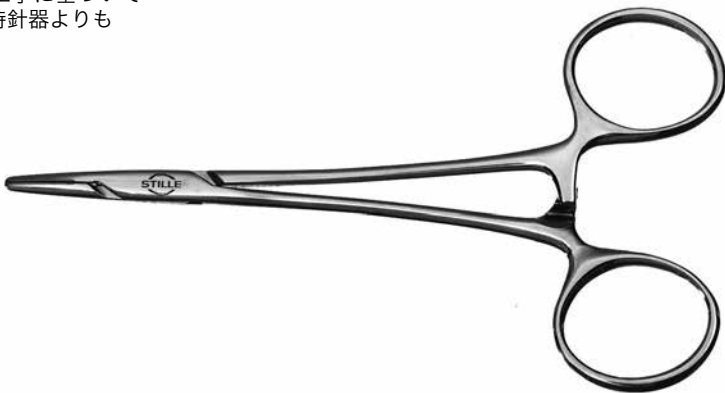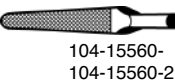

MAYO-HEGAR

TC ジョーを持つ、一般的な多目的持針器。1/0 ～ 4/0 縫合針糸用。

- * 104-15561-141 TC jaws 14 cm 5.5"
- 104-15561-161 TC jaws 16 cm 6.25"
- 104-15561-181 TC jaws 18 cm 7"
- 104-15561-201 TC jaws 20 cm 8"
- 104-15561-251 TC jaws 25 cm 10"

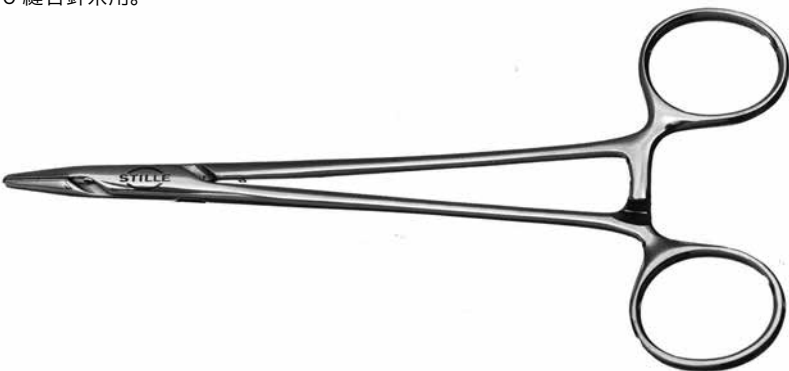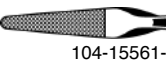

* Photo shows this instrument



MAYO-HEGAR STILLE HEAVY NEEDLE HOLDER



メイヨーヘガールのヘビージョーバージョン。1 以下縫合糸用。

- | | | | |
|---------------|---------------|---------|---------------|
| 104-15562-161 | Heavy Pattern | TC jaws | 16 cm 6.25" |
| 104-15562-181 | Heavy Pattern | TC jaws | 18.5 cm 7.25" |
| 104-15562-201 | Heavy Pattern | TC jaws | 20.5 cm 8" |
| 104-15562-241 | Heavy Pattern | TC jaws | 24 cm 9.5" |
| 104-15562-271 | Heavy Pattern | TC jaws | 27 cm 10.75" |
| 104-15562-301 | Heavy Pattern | TC jaws | 30.5 cm 12" |

CRILE-WOOD

TC ジョーおよび 2 種類のジョー幅を持つ多目的持針器。4/0 ～ 6/0 縫合糸用。



- | | | |
|-----------------|------------------|----------|
| 104-15565-151 | TC jaws | 15 cm 6" |
| 104-15565-181 | TC jaws | 18 cm 7" |
| 104-15565-201 | TC jaws | 20 cm 8" |
| 104-15565-231 | TC jaws | 23 cm 9" |
| * 104-15566-151 | Delicate TC jaws | 15 cm 6" |
| 104-15566-181 | Delicate TC jaws | 18 cm 7" |
| 104-15566-201 | Delicate TC jaws | 20 cm 8" |
| 104-15566-231 | Delicate TC jaws | 23 cm 9" |

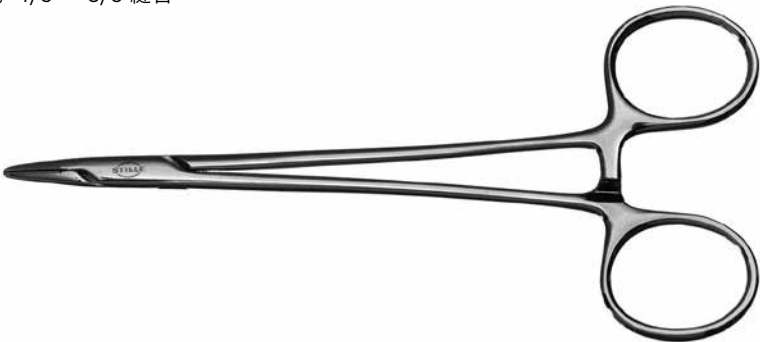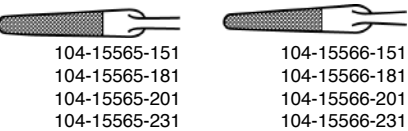

NEW ORLEANS

短テーパー型 TC ジョー。片方のジョーは直型鋸歯状。もう片方はクロス鋸歯状。3/0 ～ 6/0 縫合糸用。

- * 104-15571- TC jaws, 18 cm 7"
- serrated/cross serrated

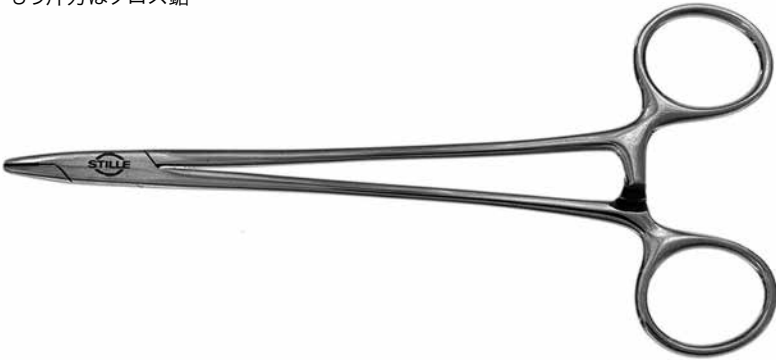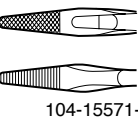


* Photo shows this instrument




RYDER

極細、非テーバー型、鋸歯状 TC ジョーを持つ持針器。血管手術に有用。
4/0 ～ 6/0 縫合糸用。

* 104-15573-161	TC jaws	16 cm 6.25"
104-15573-181	TC jaws	18 cm 7"
104-15573-201	TC jaws	20 cm 8"

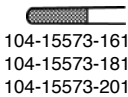

104-15573-161
104-15573-181
104-15573-201

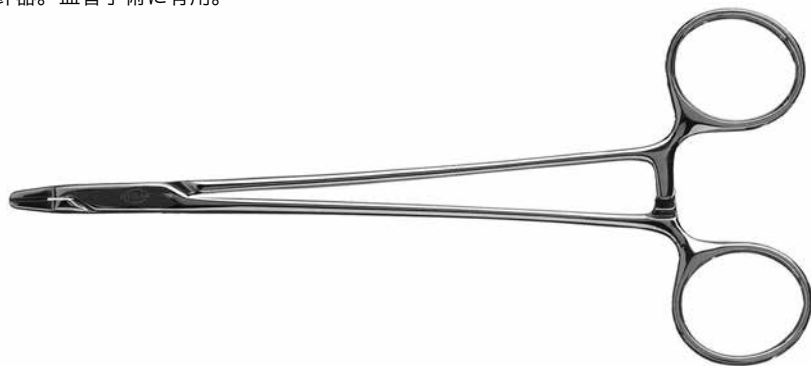


STILLE NEEDLE HOLDER

TC 吹き付けタイプのジョー。細縫合糸 6/0 ～ 8/0 用。

* 104-15585-161	TC sprayed, Diamond jaws	16 cm 6.25"
104-15585-181	TC sprayed, Diamond jaws	18 cm 7"
104-15585-221	TC sprayed, Diamond jaws	22 cm 8.75"
104-15585-251	TC sprayed, Diamond jaws	25 cm 10"



104-15585-161
104-15585-181
104-15585-221
104-15585-251

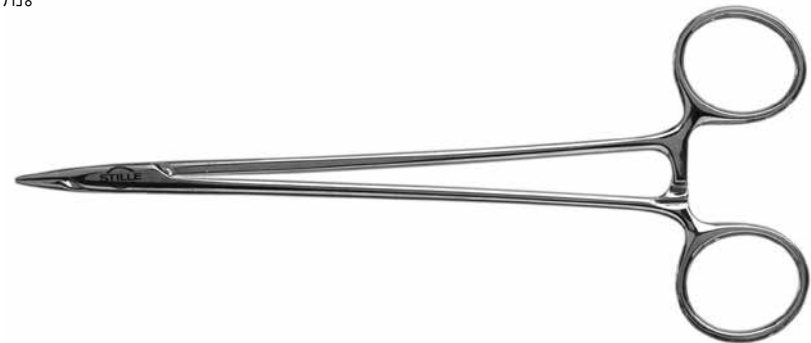


STILLE NEEDLE HOLDER

TC ジョー付デリケート持針器。6/0 ～ 8/0 縫合糸用。

* 104-15586-	TC jaws	18 cm 7"
--------------	---------	----------



104-15586-

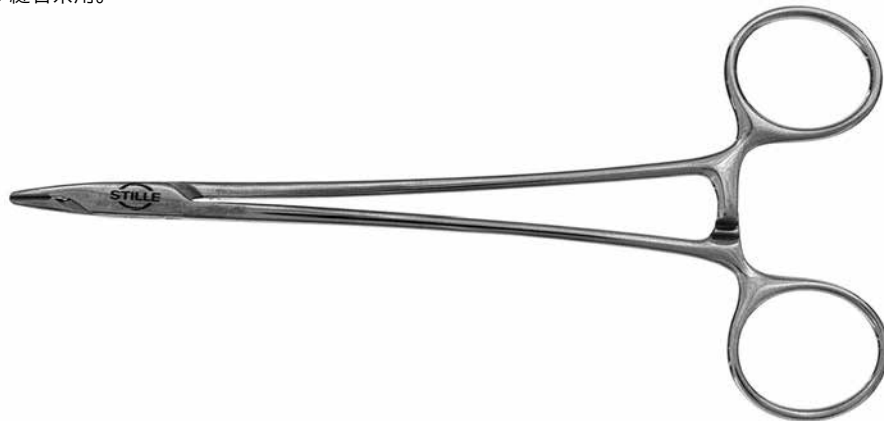

* Photo shows this instrument




MATHIEU

直型 TC ジョーを持つ持針器。持針器の一方方向操作での開閉を可能にするラチェット付プライヤー型ハンドル。メッツェンバウム持針器よりもわずかに長いジョー。1/0 ～ 3/0 縫合糸用。

* 104-15621-179	TC jaws	17 cm 6.75"
104-15621-209	TC jaws	20 cm 8"



104-15621-179
104-15621-209

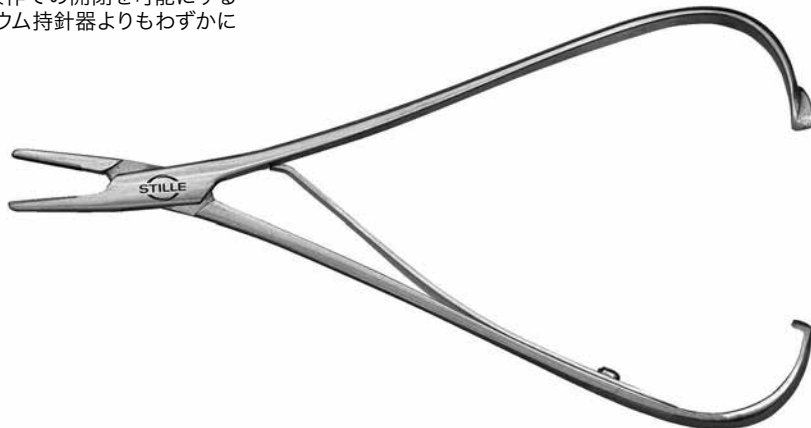

KAYE

短く細い TC ジョーおよび鋭利な剪刀を持つデリケート持針器。この剪刀部分によりこの持針器ひとつで縫合と切断が可能です。6/0 ～ 8/0 縫合糸用。

* 104-15777-	Delicate, with scissors	Serrated TC jaws	12 cm 4.75"
--------------	-------------------------	------------------	-------------



104-15777-



OLSEN-HEGAR STILLE NEEDLE HOLDER

ハサミを併せ持った持針器。0 以下縫合糸用。

104-15590-121	Scissors	12 cm 4.75"
* 104-15590-131	Scissors	13.5 cm 5.25"
104-15590-171	Scissors	17 cm 6.75"
104-15590-181	Scissors	18.5 cm 7.25"



* Photo shows this instrument



Stille bone cutters and rongeurs



他社に頻繁に、しかも多く模倣されてきた Stille オリジナルの一つに「ダブルアクションジョイント」があります。Stille は、1872 年以降、世界中でシングルアクション式だけでなく、最も優れたダブルアクションジョイントのロンジュールおよびボーンカッターを製造してきました。この利点は、術者が片手のみで骨を容易に、しかもスムーズに切除できることです。Stille ロンジュールは、優れたデザインで、多くの脳神経外科医や整形外科医に使用されています。また、この特殊な形状により、良好な視野を得ることができます。


骨を切除する場合、ダブルアクションジョイントを使用すると、先端の切除面に 4 ～ 5 倍大きい力がかかります。Stille ボーンカッターおよびロンジュールは、ジョイントをボルトで締めておらず、ネジ固定しています。それゆえ、切刃の研ぎなおしを必要とする際には分解が可能であり、また、容易に組み立てができます。同じ器具でも、切刃部分とハンドル部分では材質の硬度が異なります。これにより、術者は最高のフィーリングと最も優れた切れ味を得ることができます。



STILLE FLAT PLIERS

クロス鋸歯状ジョーを持つ多目的フラット型プライヤー。


* 105-16015- 17 cm 6.75"

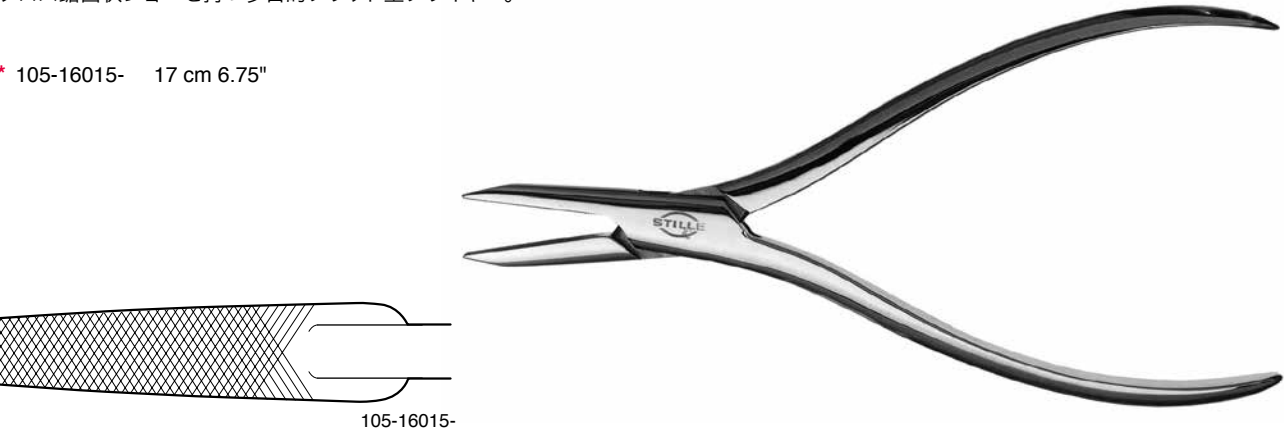

STILLE EXTRACTION PLIERS

Stille オリジナルのダブルアクションジョイントにより、ピンおよびワイヤーの抜去が容易です。

* 105-16020 19 cm 7.5"
105-16020-1 Narrow jaws 19 cm 7.5"

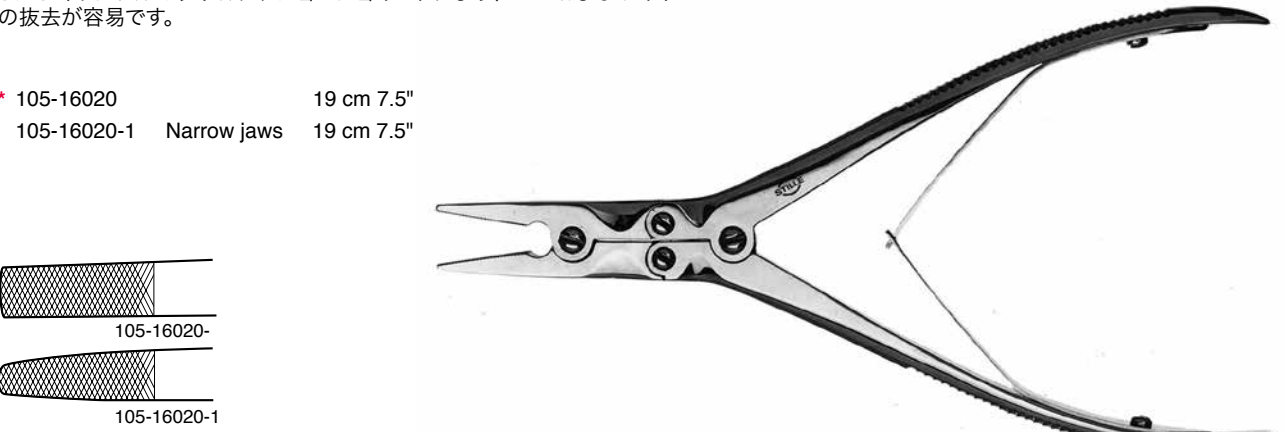

STILLE BONE CUTTING FORCEPS

Stille オリジナルのダブルアクションジョイント骨切り鉗子。

* 105-16510- Straight 17 cm 6.75"



* Photo shows this instrument



STILLE BONE CUTTING FORCEPS DELICATE

Stille オリジナルのダブルアクションジョイントデリケート骨切り鉗子。

* 105-16512- Slightly angled 18 cm 7"



STILLE ORIGINAL

Stille オリジナルのダブルアクションジョイント角度付骨切り鉗子。

* 105-16811- Angled 19 cm 7.5"




* Photo shows this instrument



RUSKIN-STILLE ORIGINAL

Stille オリジナルダブルアクションジョイントおよび反型ジョーを持つ骨口ンジュール。


* 105-17220- Curved 19 cm 7.5"

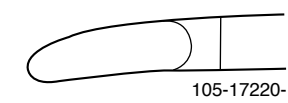

LUER-STILLE ORIGINAL

Stille オリジナルダブルアクションジョイント、強彎型幅広ジョーを持つ骨口ンジュール。


* 105-17230- Strongly curved 22 cm 8.75"

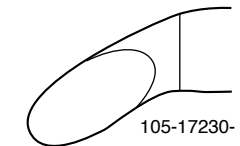

STILLE ORIGINAL

Stille オリジナルダブルアクションジョイント、斜彎型ジョーを持つ骨口ンジュール。

* 105-17250- Curved sideways 22 cm 8.75"

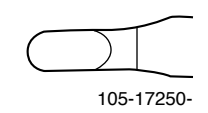


* Photo shows this instrument



LEKSELL-STILLE ORIGINAL

Stille オリジナルダブルアクションジョイント、斜弱彎型ジョーを持つ骨ロングジュール。


- * 105-17260- Slightly curved Nide jaws 24 cm 9.5"
- 105-17261- Slightly curved Narrow jaws 24 cm 9.5"

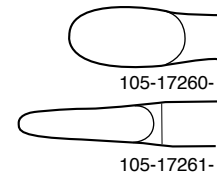

LEKSELL-STILLE ORIGINAL

Stille オリジナルダブルアクションジョイント、斜強彎型ジョーを持つ骨ロングジュール。

- * 105-17265- Strongly curved Wide jaws 24 cm 9.5"
- 105-17266- Strongly curved Narrow jaws 24 cm 9.5"

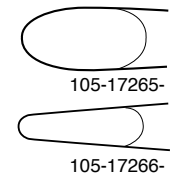


* Photo shows this instrument



STILLE ORIGINAL

Stille オリジナルダブルアクションジョイント、斜強彎型ジョーを持つ種々のサイズの骨ロングジュール。


- * 105-17267- Strongly curved 2 mm 24 cm 9.5"
- 105-17268- Strongly curved 3 mm 24 cm 9.5"
- 105-17269- Strongly curved 4 mm 24 cm 9.5"

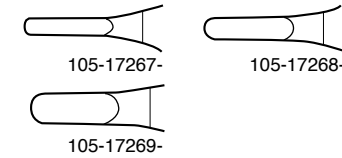

STILLE BONE RONGEUR

Stille ダブルアクションジョイントの骨ロングジュール。2 種類のジョー幅。

- * 105-17216- Curved 15 cm 6"
- 105-17217- Curved Delicate jaws 15 cm 6"

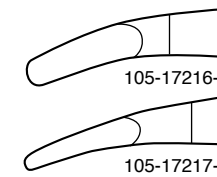

BEYER

反型、デリケートジョーを持つ鼻用ロングジュール。

- * 105-17030- Curved, Delicate 17 cm 6.75"





* Photo shows this instrument

BEYER

Stille オリジナルダブルアクションジョイントの骨口ンジュール。
2 種類のジョー幅。


- * 105-17210- Curved 18 cm 7"
- 105-17211- Curved Delicate 18 cm 7"

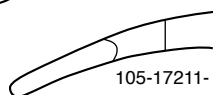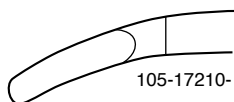

ZAUFAL-JANSEN


Stille オリジナルダブルアクションジョイント、幅広で反型ジョーを持つ
骨口ンジュール。

- * 105-17215- Curved 17 cm 6.75"

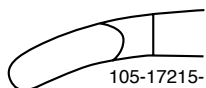



Clamps and forceps

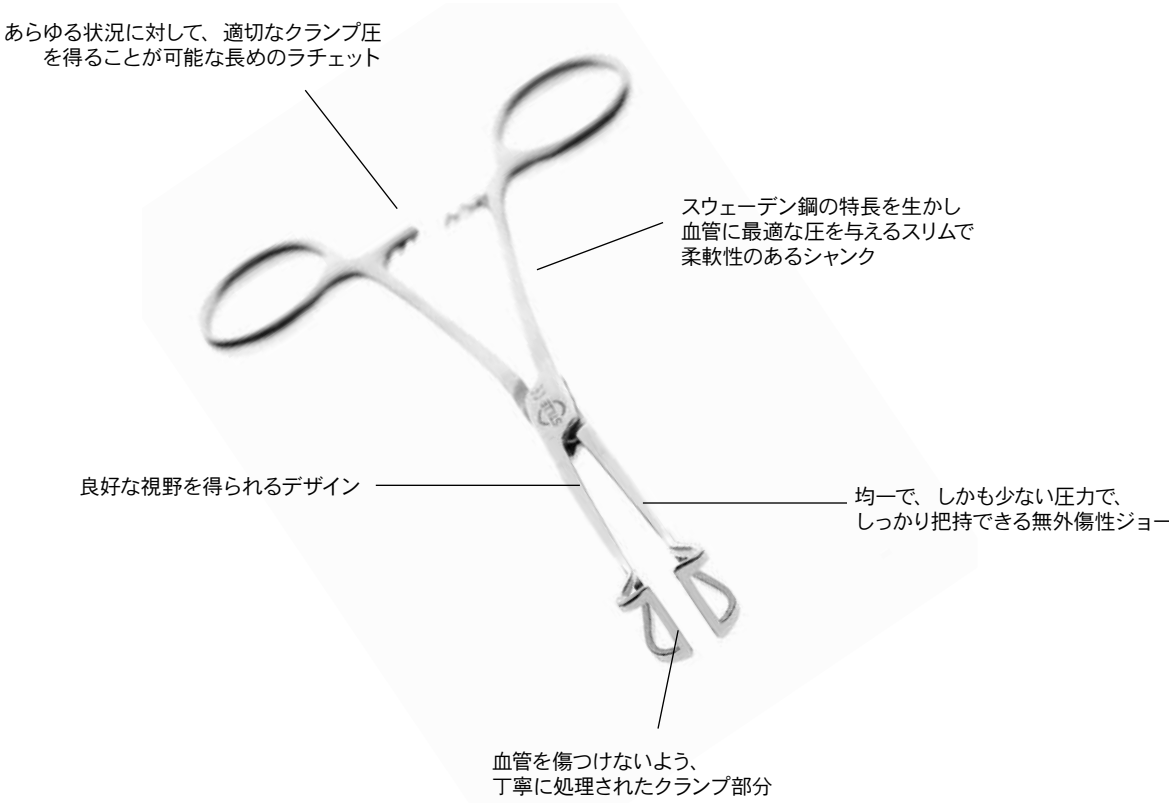

Stille では高まる血管手術の需要に合わせて、高品質のクランプを幅広く提供しています。

血管への損傷を最小限に抑えるために、血管用クランプは、血流を止めるのに十分なだけの圧力を与え、それ以上の圧力は与えないようにします。言い換えると、ジョーはできるだけ均一で、できるだけ少ない圧力で血管を遮断します。

まず、ジョーの遠位部を適度に閉じ、圧力が均等に分配されていることを確認します。多くのラチェットがあるので、術者は血管に適したクランプ圧の使用が可能です。


先端部分は、血管を押しつぶさずに適切な位置でクランプします。クランプ部分のサイズや圧力は、血管のサイズや脈波の強さに応じて設計されています。

- Stille 血管クランプの検査方法
- 両方のジョーが合うまでゆっくり閉じます。ジョーの溝と溝、山と山が重なる場合は位置が不良となっています。
 - ジョーを慎重に調べ、損傷していないことを確認します。
 - 鉗子のリングハンドルを手で把持し、できるだけ大きく開きます。ボックスロックにかなりのあそびがあり、非常に緩いと位置調整不良が生じます。このような場合、この鉗子は修理が必要です。
 - 鉗子の洗浄および滅菌は、必ずラチェットを開いた状態でおこなってください。

COLON CLAMPS

無外傷性コロノ鉗子、適切な調整が出来るよう長めのラチェットを採用。


107-10565 Atraumatic Jaw length 23.5 cm 9.25"
5 cm

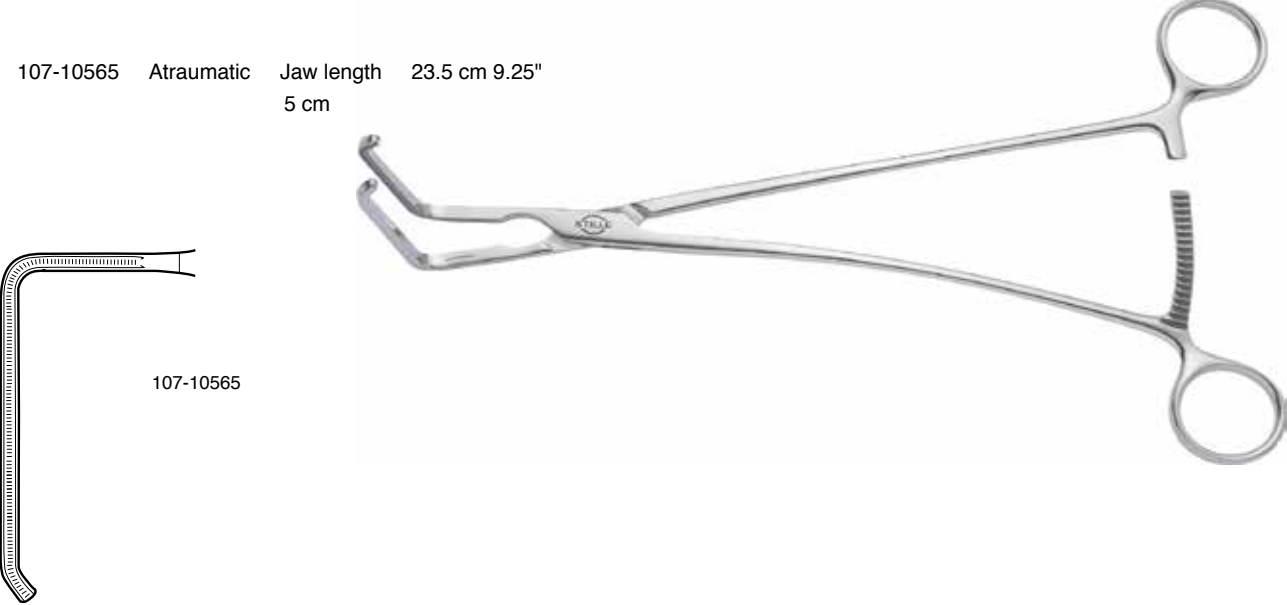

WIKSTRÖM-STILLE

直角鋸歯状ジョーを持つ胆管クランプ。

107-10571-241 Angled 24 cm 9.5"

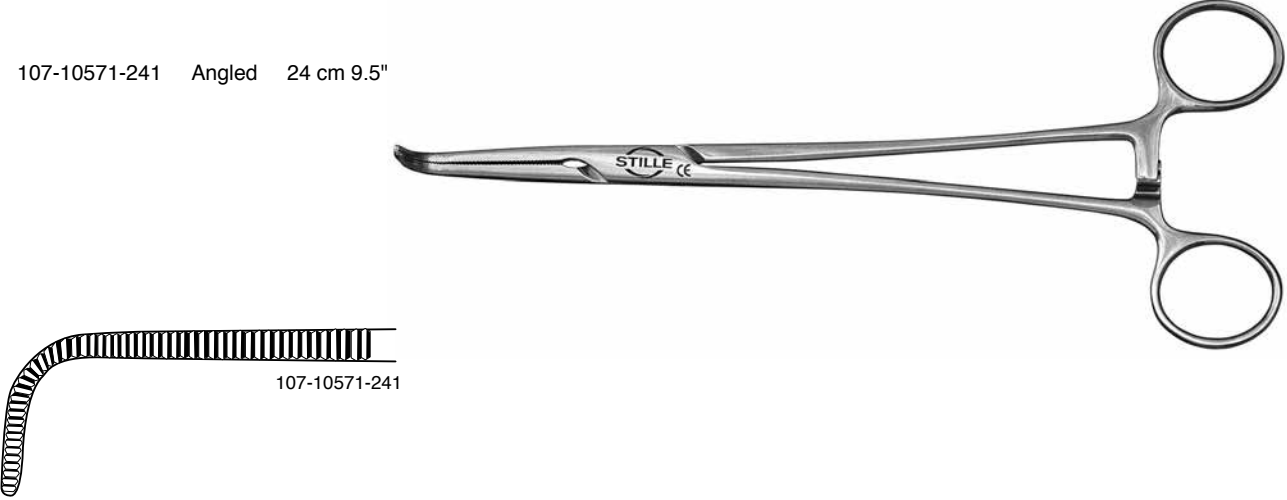



* Photo shows this instrument



UPPSALA-STILLE

S 状、鋸歯状ジョー胆管クランプ。

107-10581-241 S-shaped 24 cm 9.5"

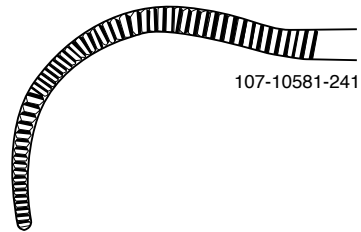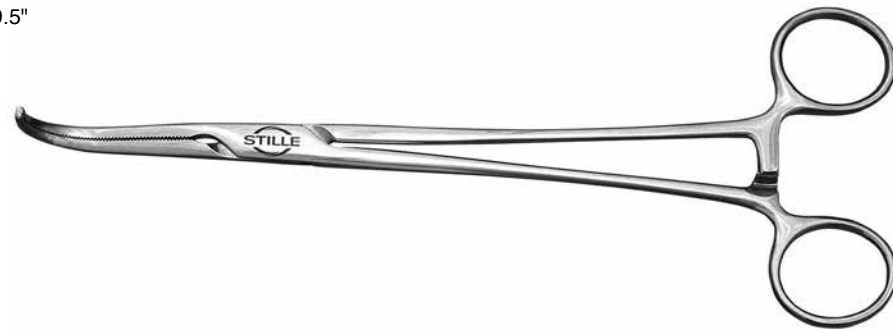



107-10581-241



STILLE MULTI PURPOSE CLAMP

角度付無外傷性ドベイキージョーを持つ多目的クランプ。

* 107-10825-	Atraumatic	Jaw length	23 cm 9"
		6 cm	
107-10826-	Atraumatic	Jaw length	22.5 cm 8.75"
		7.5 cm	

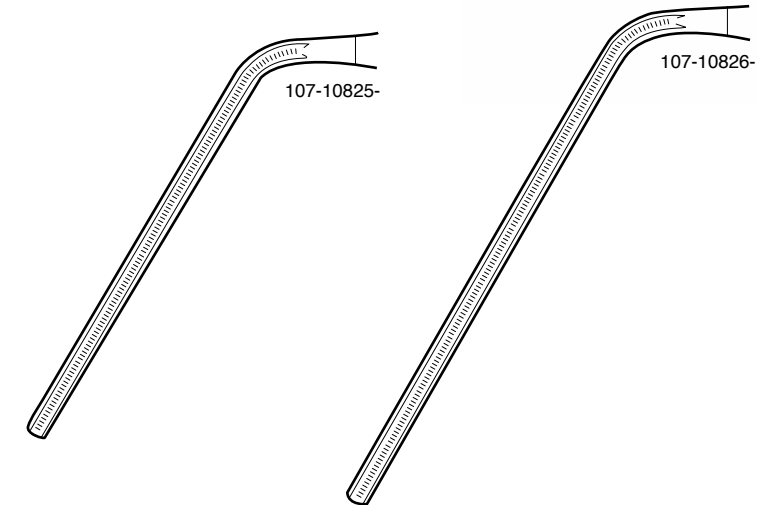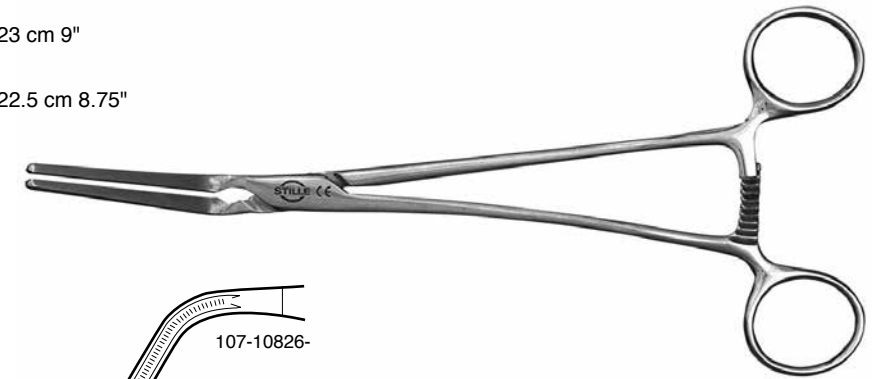



107-10825-

107-10826-

STILLE MULTI PURPOSE CLAMP

角度付無外傷性ドベイキージョーを持つ多目的クランプ。

107-10871-	Atraumatic	Jaw length	20 cm 8"
		6 cm	
107-10872-	Atraumatic	Jaw length	18.5 cm 7.25"
		6 cm	
* 107-10873-	Atraumatic	Jaw length	15.5 cm 6.25"
		3.5 cm	
107-10876-	Atraumatic	Jaw length	20 cm 8"
		8 cm	

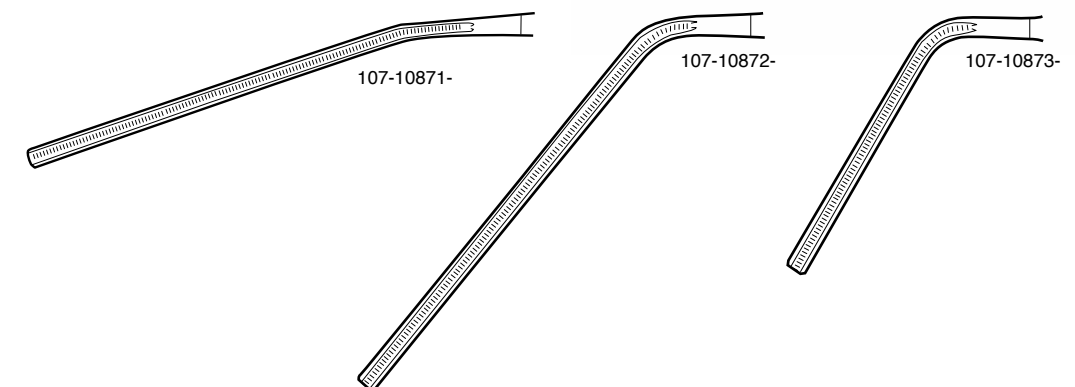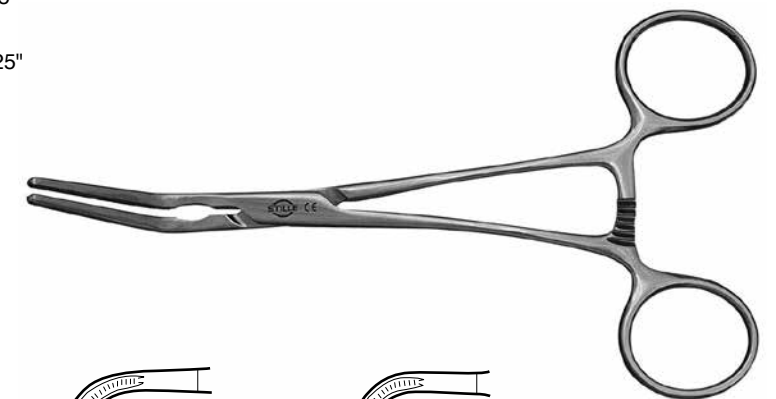

107-10871-

107-10872-


107-10873-



ERICSSON-STILLE

角度付無外傷性ドベイキージョーを持つ頸動脈クランプ。


* 107-10880- Atraumatic 17.5 cm 7"

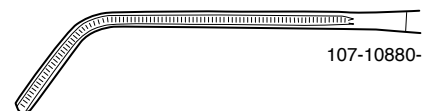

STILLE-ERICSSON

無外傷性ドベイキージョーを持つ大腿深在動脈クランプ。

107-10898- Atraumatic 18 cm 7"

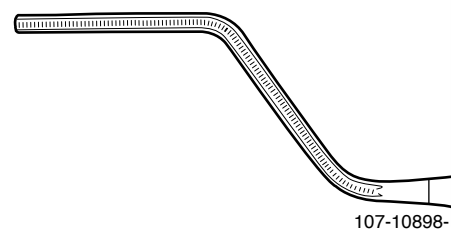


* Photo shows this instrument



STILLE MULTI PURPOSE MINI CLAMP

スプーン型無外傷性ドベイキージョーを持つ多目的血管用ミニクランプ。



* 107-10655- Spoon shaped, Jaw length 15.5 cm 6.25"
smal 20 mm
107-10656- Spoon shaped, Jaw length 15 cm 6"
angled 20 mm

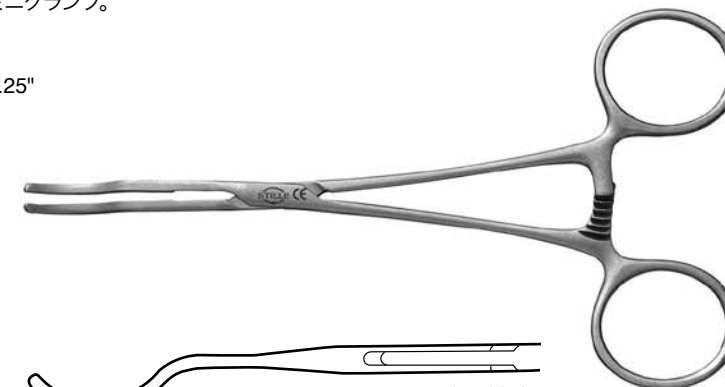

STILLE MULTI PURPOSE MINI CLAMP

角度付無外傷性ドベイキージョーを持つ多目的血管用ミニクランプ。

* 107-10670- Angled 30 Jaw length 15.5 cm 6.25"
30 mm
107-10671 Angled 50 Jaw length 15 cm 6"
30 mm

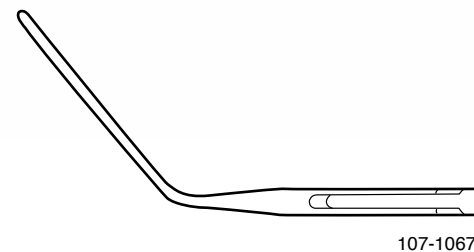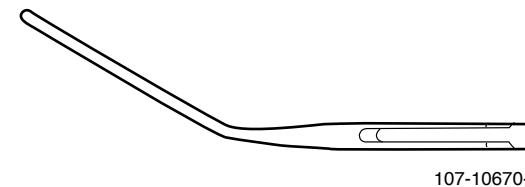

STILLE COARCTATION MINI CLAMP

無外傷性ドベイキージョーを持つ縮窄用ミニクランプ。

* 107-10665- Straight Jaw length 15.5 cm 6.1"
25 mm





* Photo shows this instrument




STILLE TANGENTIAL OCCLUSION MINI CLAMP

種々の長さでジョーサイズの接線閉塞ミニクランプ。
無外傷性ドバイキージョー。


107-10695-	Small	Jaw length 14 mm	14 cm 5.5"
107-10696-	Medium	Jaw length 15 mm	15 cm 6"
107-10697-	Large	Jaw length 24 mm	15 cm 6"

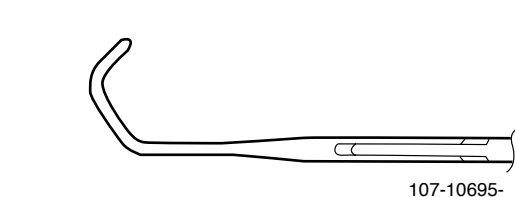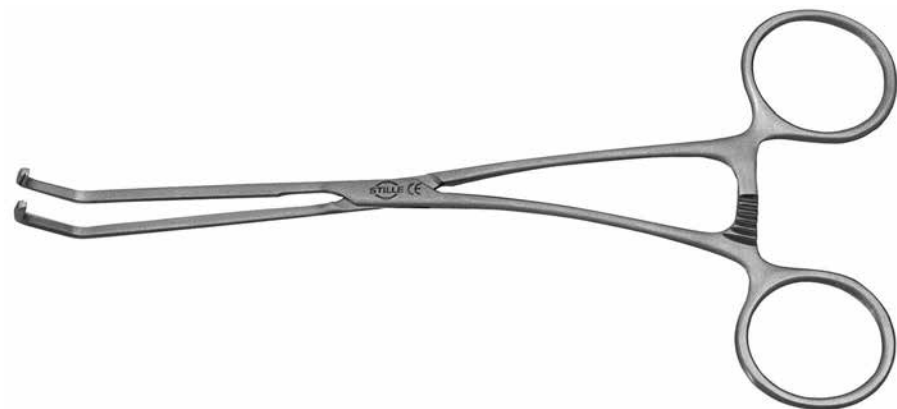

107-10695-

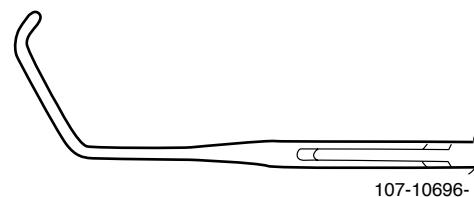

107-10696-

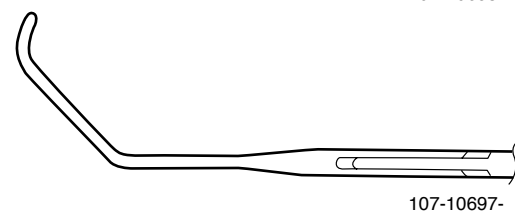

107-10697-


* Photo shows this instrument




STILLE-SATINSKY

無外傷性ドバイキージョーを持つ接線閉塞クランプ。


* 107-10840-	Atraumatic	22 cm 8.75"
107-10841-	Atraumatic	22.5 cm 9"
107-10842-	Atraumatic	23 cm 9"

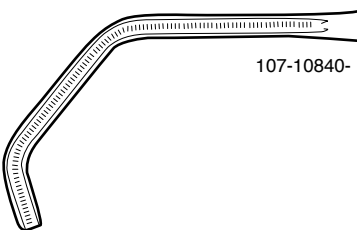

107-10840-

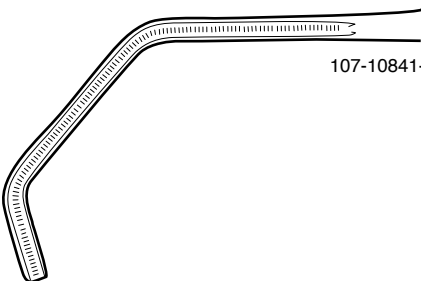

107-10841-

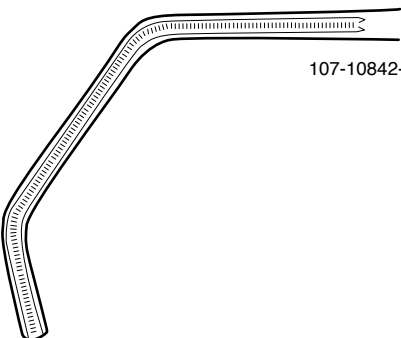

107-10842-


* Photo shows this instrument



LAMBERT-KAY

無外傷性ドベイキージョーを持つ大動脈吻合クランプ。


* 107-10845- Atraumatic 22 cm 8.75"

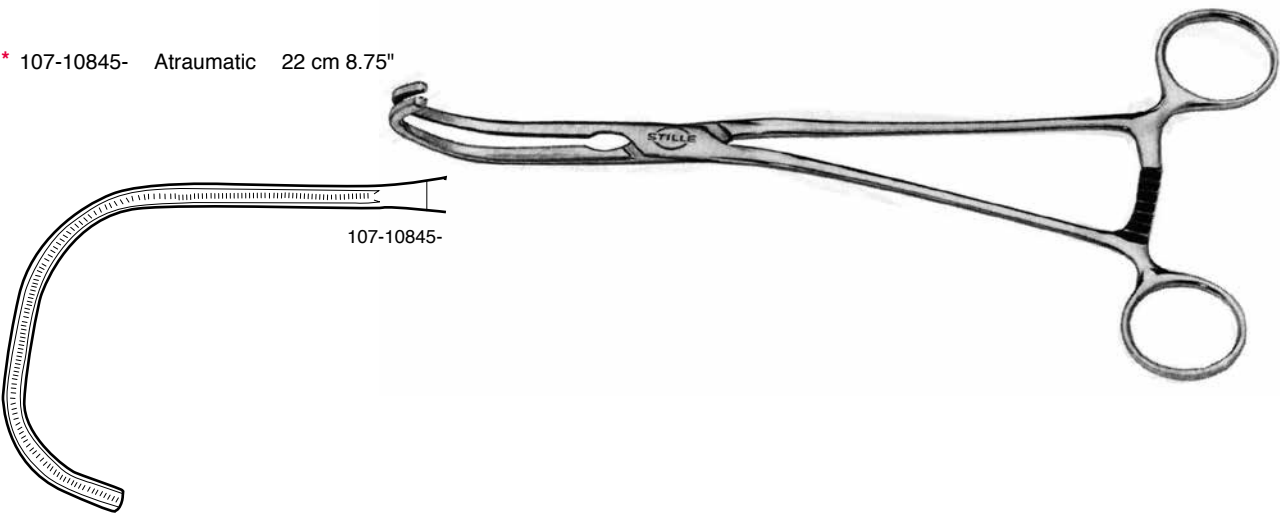

STILLE DE BAKEY

無外傷性ドベイキージョーを持つ吻合クランプ。

* 107-10860- Atraumatic 17.5 cm 7"
107-10861- Atraumatic 17.5 cm 7"
107-10862- Atraumatic 18.5 cm 7.25"

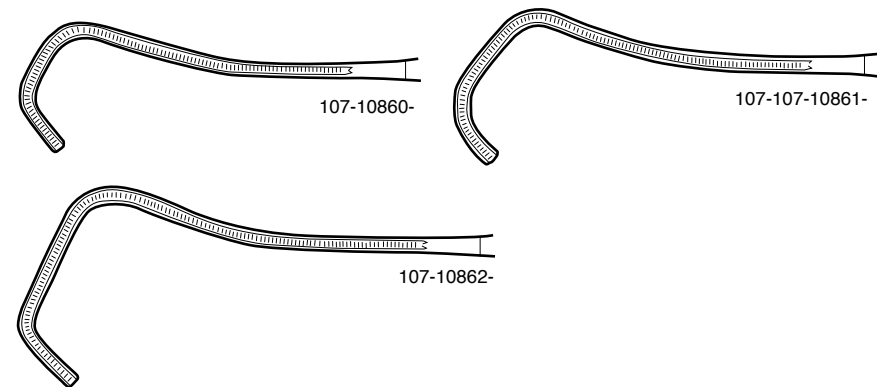


* Photo shows this instrument



STILLE AORTIC ANEURYSM CLAMP

無外傷性ドベイキージョーを持つ大動脈瘤クランプ。

* 107-10846- Atraumatic 26 cm 10.25"
107-10849- Atraumatic 28 cm 11"

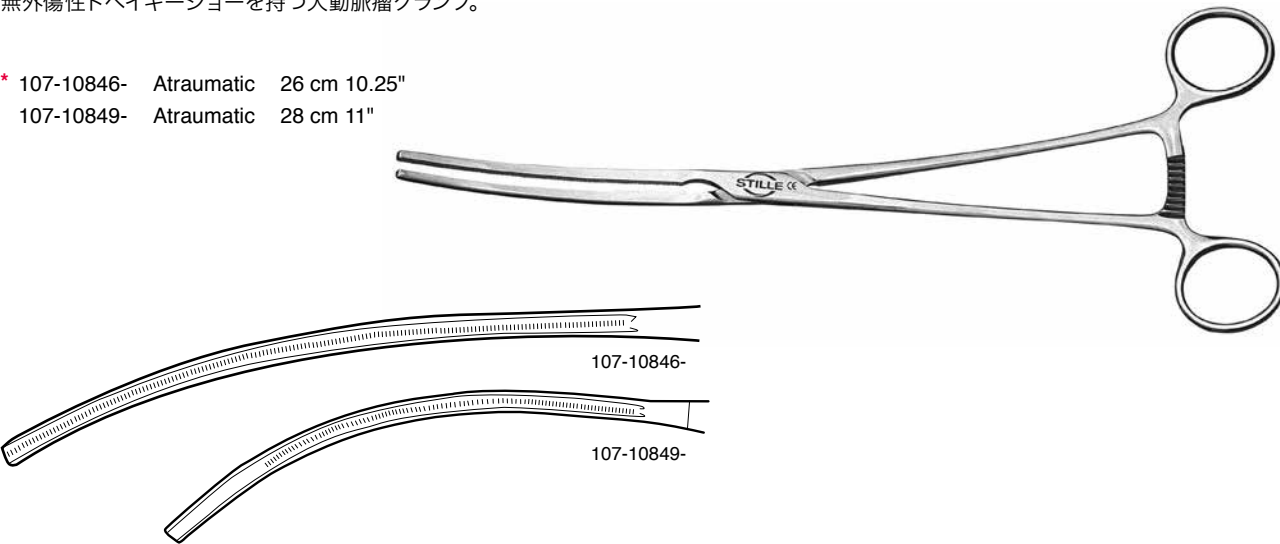

BACKHAUS

タオルクランプ。


* 107-10910- 11 cm 4.25"
107-10912- 13.5 cm 5.25"



BABCOCK

バブコッククランプ。腸管把持などに使用。

* 107-12370-16 16 cm 6.25"
107-12370-20 20 cm 8"

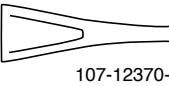

* Photo shows this instrument




FOERSTER

スポンジ保持鉗子。

107-12485-	Small, straight	Serrated loops	24 cm 9.5"
107-12486-	Small, curved	Serrated loops	24 cm 9.5"
107-12487-	Large, straight	Serrated loops	24 cm 9.5"
107-12488-	Large, curved	Serrated loops	24 cm 9.5"
107-12489-	-----, straight	Serrated loops	18 cm 7"
107-12490-	-----, curved	Serrated loops	18 cm 7"




107-12485-

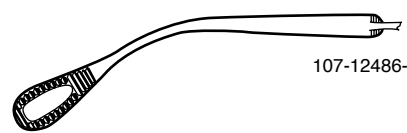

107-12486-



107-12487-

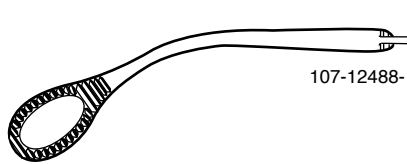


107-12488-

DUVAL

腸管把持鉗子。

* 107-12563-	18 cm 7"
--------------	----------

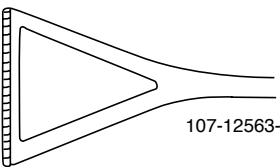

107-12563-




* Photo shows this instrument




ALLIS

組織をしっかり把持するための組織把持鉗子。

* 107-13120-15	5x6 dull teeth	15 cm 6"
107-13120-21	5x6 dull teeth	21 cm 8.25"

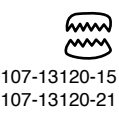


107-13120-15
107-13120-21

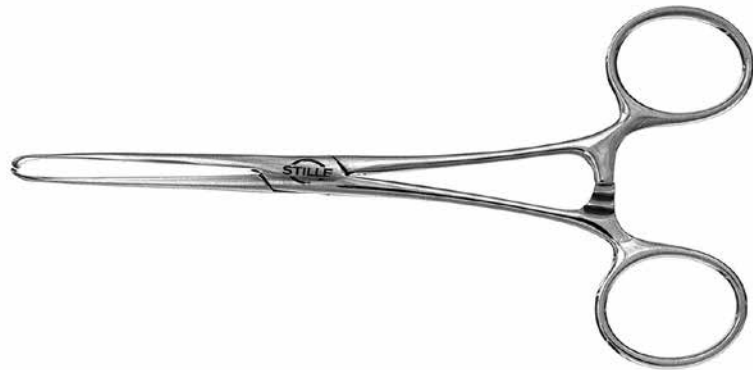

SCHROEDER-STILLE

子宮支持鉤鉗子。

* 107-13280-	24 cm 9.5"
--------------	------------

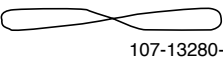

107-13280-



STILLE UTERINE MANIPULATOR

腹腔鏡手術時に子宮をより適切にコントロールできるようデザインされた子宮支持鉗子。環状の先端を持つわずかに湾曲したプローブは組織へ外傷を与えるリスクを軽減します。

* 107-13290	Probe60mm	Curved	26.5 cm 10.5"
-------------	-----------	--------	---------------



* Photo shows this instrument



ALLIS STILLE INTESTINAL GRASPING FORCEPS

無外傷性組織把持鉗子。

107-13130-15	Non-Traumatic	15.5 cm 6"
* 107-13130-19	Non-Traumatic	19 cm 7.5"
107-13130-25	Non-Traumatic	25 cm 10"




107-13130



MAIER STILLE SPONGE HOLDING FORCEPS

鋸齒ジョー ガーゼ鉗子。

* 107-12478	Watch ratchet	Straight	26 cm 10.25"
107-12479	Watch ratchet	Curved	26 cm 10.25"

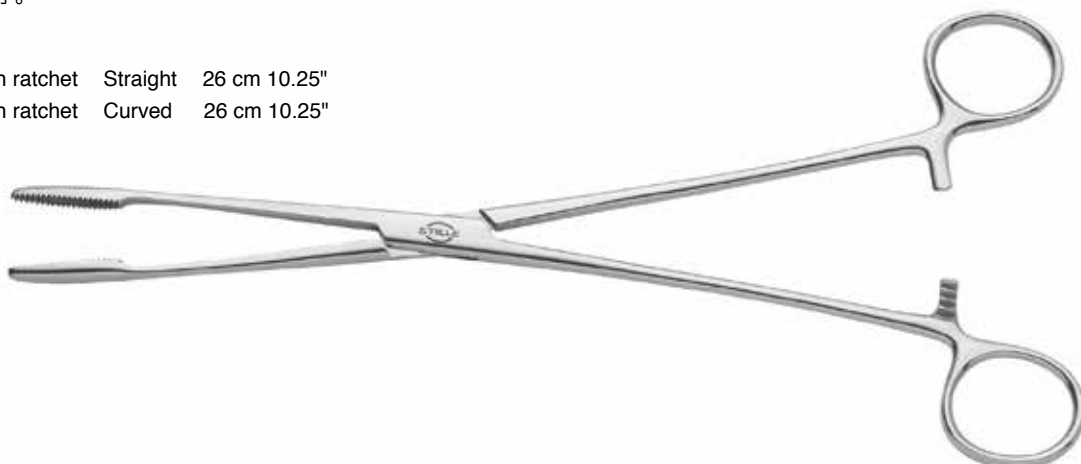



Stille retractors



Stille リトラクターは、高度に磨かれており、直角になっ
たブレードとプロングにより敏感な組織や創部を無外傷
性に扱うことができます。

ハンドルは、握り心地の良いようにデザインされてい
ます。Stille リトラクターは、長年にわたってご使用いた
だけます。

通常、3 種類のリトラクターがあります


- ・切開部や臓器を徒手的に保持するために使用される
ハンドリトラクター
- ・ロッキングメカニズムにより牽引を維持する
レール式留置リトラクター
- ・スプリングハンドル式のスペキュラ



GILLIES

長いフラットシャフトのスキンフック。


* 108-24110-	Small hook	19 cm 7.5"
108-24112-	Large hook	19 cm 7.5"

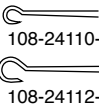

JOSEPH STILLE SKIN HOOK

鋭状スキンフック。形成手術に有用。


108-25011-1	Single hook		16 cm
108-25012-2	Double hook	2 mm	16 cm 6.25"
108-25012-5	Double hook	5 mm	16 cm 6.25"
108-25012-7	Double hook	7 mm	16 cm 6.25"
* 108-25012-10	Double hook	10 mm	16 cm 6.25"

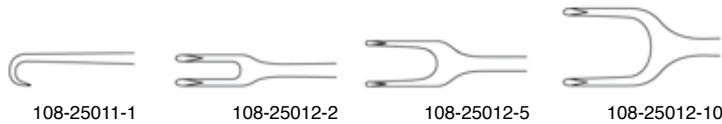

KLEINERT-KUTZ STILLE SKIN HOOK

1 又鋭状スキンフック。顔面、鼻手術に有用。

108-25031-3	Small	3 mm	16 cm 6.25"
108-25031-5	Medium	5 mm	16 cm 6.25"
108-25031-7	Large	7 mm	16 cm 6.25"

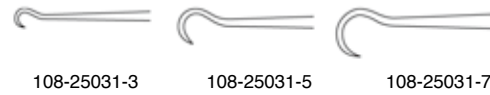


* Photo shows this instrument



STILLE NERVE HOOK

長いフラットシャフトの神経用鈍鉤。

* 108-24320- Slightly curved Blunt 22 cm 8.75"

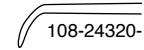

LOVE STILE NERVE HOOK

長いシャフトを有する神経根リトラクター。


* 108-26048-7 7 mm 20.5 cm 8"



MOBERG

顔面および Hand Surgery 用リトラクター。

* 108-24380- 14x5 mm 17 cm 6.75"

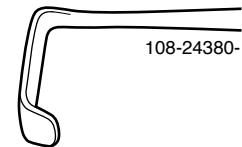



* Photo shows this instrument



STRANDELL

深さ違いの 2 種類リトラクター。





* 108-24385-8 8x5 mm With teeth 19 cm 7.5"
108-24385-15 15x5 mm With teeth 19 cm 7.5"

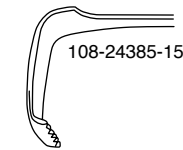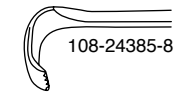

STILLE RETRACTOR

1 叉、2 叉または 3 叉付リトラクター。


* 108-24400-1 Sharp 1 prong 18 cm 7"
108-24400-2 Sharp 2 prongs 18 cm 7"
108-24400-3 Sharp 3 prongs 18 cm 7"
108-24402-2 Blunt 2 prongs 18 cm 7"
108-24402-3 Blunt 3 prongs 18 cm 7"

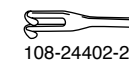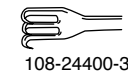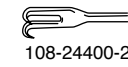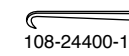

VOLKMANN

1 鋭叉付リトラクター。

108-24680-1 Sharp 1 large prong 21.5 cm 8.5"

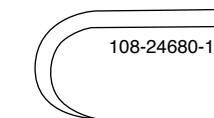


* Photo shows this instrument



VOLKMANN

顔面または乳房手術用の鋭または鈍叉付リトラクター。


108-24680-2	Sharp	2 Prongs	22 cm 8.75"
* 108-24680-3	Sharp	3 Prongs	22 cm 8.75"
108-24680-4	Sharp	4 Prongs	22 cm 8.75"
108-24682-2	Blunt	2 Prongs	22 cm 8.75"
108-24682-3	Blunt	3 Prongs	22 cm 8.75"
108-24682-4	Blunt	4 Prongs	22 cm 8.75"

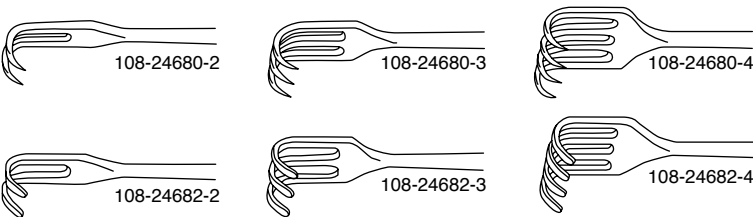

RAGNELL

形成手術および再建手術用の両頭リトラクター。

* 108-24808-	9x3 mm/15x5 mm	15 cm 6"
--------------	----------------	----------

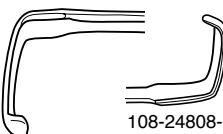

* Photo shows this instrument



SENN

両頭リトラクター。


* 108-25940-	15 x 5 mm	3 sharp prongs	15 cm 6"
--------------	-----------	----------------	----------



DESMARRES STILLE EYE-LID RETRACTOR

眼瞼用リトラクター。絶縁コーティングの有無が選択できます。


* 108-26046-8	8 mm	14.5 cm 5.5"
108-26046-10	10 mm	14.5 cm 5.5"
108-26046-12	12 mm	14.5 cm 5.5"
108-26046-14	14 mm	14.5 cm 5.5"
108-26846-8	Insulated 8 mm	14.5 cm 5.5"
108-26846-10	Insulated 10 mm	14.5 cm 5.5"
108-26846-12	Insulated 12 mm	14.5 cm 5.5"
108-26846-14	Insulated 14 mm	14.5 cm 5.5"

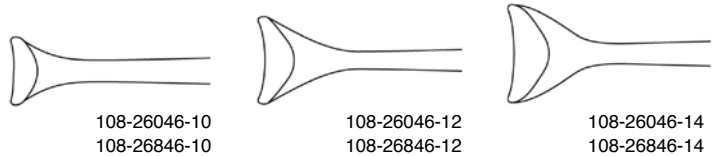

CARLENS-STILLE

両頭気管用リトラクター。

* 108-24805-	Double-ended	22 cm 8.75"
--------------	--------------	-------------

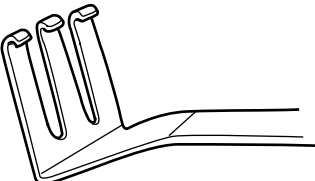

* Photo shows this instrument



LANGENBECK

一般手術用リトラクター。

108-24812-7	20 x 7 mm	21 cm 8.25"
108-24814-10	30 x 10 mm	21 cm 8.25"
108-24814-15	30 x 15 mm	21 cm 8.25"
108-24814-20	30 x 20 mm	21 cm 8.25"
* 108-24816-20	45 x 20 mm	21 cm 8.25"



DOYEN

開腹器。

* 108-24930-20	90 x 20 mm	22 cm 8.75"
108-24930-30	90 x 30 mm	22 cm 8.75"
108-24935-35	110 x 35 mm	22 cm 8.75"
108-24935-40	110 x 40 mm	22 cm 8.75"
108-24935-55	110 x 55 mm	22 cm 8.75"



FINOCHIETTO-STILLE

交換可能なブレードを持つ開胸器。


* 108-26931-	Complete with blades	50 x 50 mm	Max width 220 mm
108-26931-80	Blades	80 x 50 mm	
108-26931-100	Blades	30 x 100 mm	



108-26931-80



108-26931-100

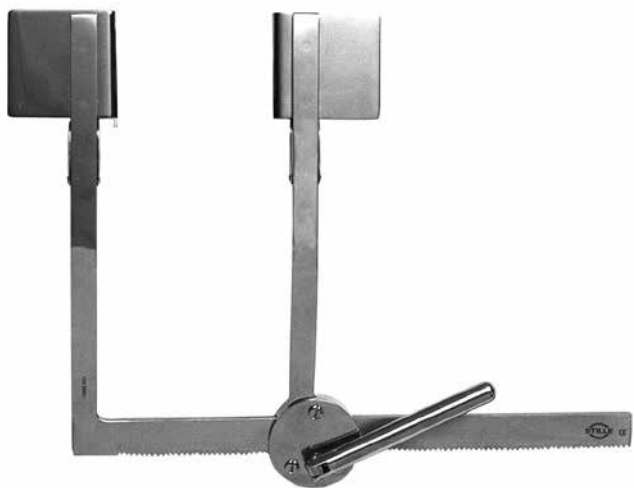

* Photo shows this instrument



WEITLANER STILLE RETRACTOR

様々な手術に使用できる一般的なウエイトライナーリトラクター。


108-26252	2x3 sharp prongs	10.5 cm 4.25"
108-26253	2x3 blunt prongs	10.5 cm 4.25"
* 108-26254	3x4 sharp prongs	13.5 cm 5.25"
108-26255	3x4 blunt prongs	13.5 cm 5.25"
108-26256	3x4 sharp prongs	16.5 cm 6.5"
108-26257	3x4 blunt prongs	16.5 cm 6.5"



ADSON

鋭叉付アドソンリトラクター。

108-26610-	25 mm	4x4 Sharp prongs	32 cm 12.5"
* 108-26615-	45 mm	5x5 Sharp prongs	32 cm 12.5"

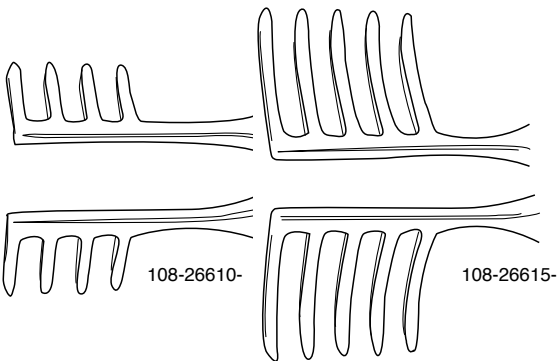

ALM STILLE RETRACTOR

鋭浅裂に有用なリトラクター。

* 108-26261	4x4 sharp prongs	7 cm 2.75"
108-26262	4x4 sharp prongs	10 cm 4"



* Photo shows this instrument



Stille curettes, rasps, raspatories and dissectors




Stille では、鋭利で高品質の鋭匙、ラズプ、ラスパトリ、解剖器具の一連の製品を揃えています。これらの Stille 器具は、力を加えられるので、高い HRC 硬度を有しています。また、この硬度により、これらの器具は長期間、良好な切れ味を維持します。



RÉCAMIER

マレアブル子宮鋭匙。

111-20340-5	5 mm	Sharp	30 cm 12"
111-20340-7	7 mm	Sharp	30 cm 12"
111-20340-8	8 mm	Sharp	30 cm 12"
111-20340-10	10 mm	Sharp	30 cm 12"
111-20350-7	7 mm	Blunt	30 cm 12"
111-20350-8	8 mm	Blunt	30 cm 12"
111-20350-10	10 mm	Blunt	30 cm 12"
* 111-20350-12	12 mm	Blunt	30 cm 12"

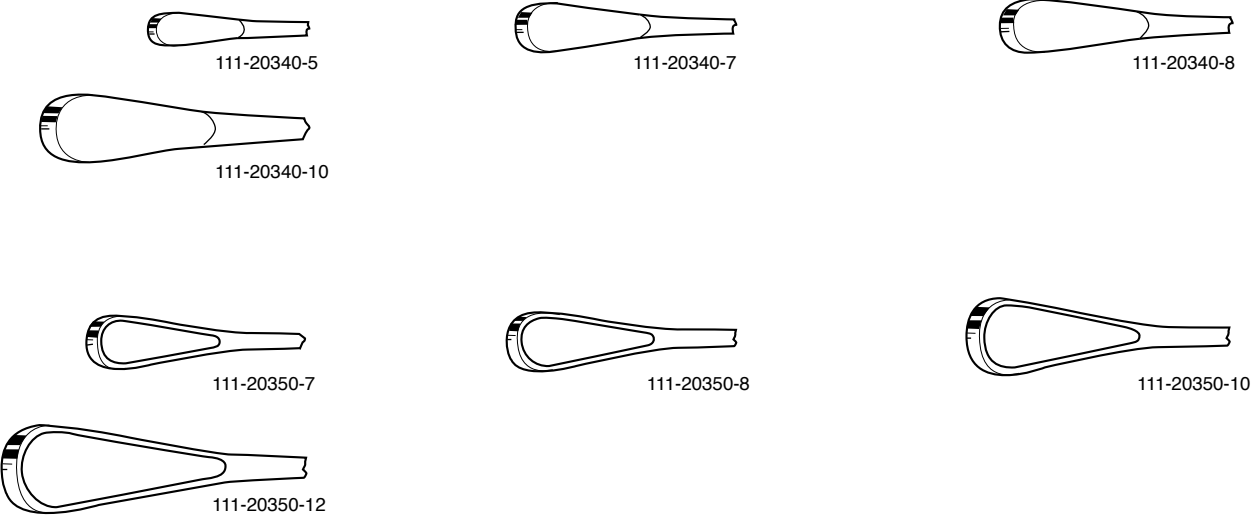


* Photo shows this instrument



STILLE OVAL BONE CURETTE

楕円形鋭型骨鋭匙。


111-20502-2	Oval, sharp	2 mm	17.5 cm 7"
111-20502-3	Oval, sharp	3 mm	18 cm 7"
111-20502-4	Oval, sharp	4 mm	18.5 cm 7.25"
111-20502-5	Oval, sharp	5 mm	18.5 cm 7.25"
111-20502-6	Oval, sharp	6 mm	18.5 cm 7.25"
111-20502-7	Oval, sharp	7 mm	19 cm 7.5"
111-20502-8	Oval, sharp	8 mm	19.5 cm 7.75"
111-20502-10	Oval, sharp	10 mm	21 cm 8.25"
* 111-20502-12	Oval, sharp	12 mm	21 cm 8.25"

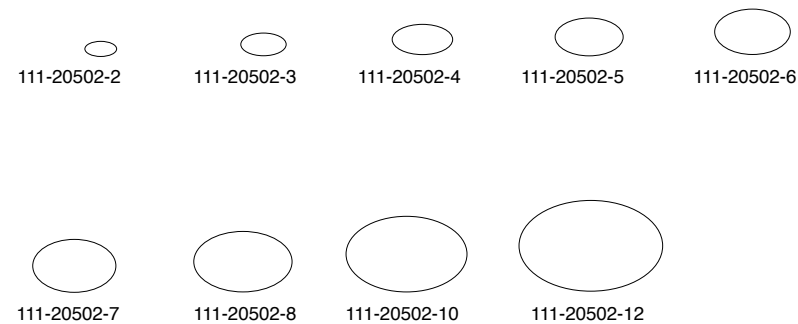

STILLE OVAL

楕円形鋭型骨鋭匙。

111-20503-2	Oval, sharp	2 mm	23 cm 9"
* 111-20503-3	Oval, sharp	3 mm	23 cm 9"
111-20503-4	Oval, sharp	4 mm	23 cm 9"
111-20503-5	Oval, sharp	5 mm	23 cm 9"
111-20503-6	Oval, sharp	6 mm	23 cm 9"

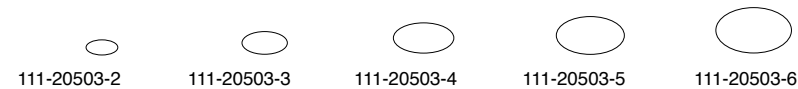

* Photo shows this instrument



OLIVECRONA

ラスパトリー（骨膜剥離器）。


* 111-22150-	Curved	11 mm	17 cm 6.75"
--------------	--------	-------	-------------



LAMBOTTE

ラスパトリー。


* 111-22160-	Curved	23 mm	21 cm 8.25"
--------------	--------	-------	-------------

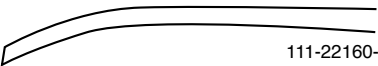

WIBERG

直型ラスパトリー。

* 111-22171-4	Straight	4 mm	17 cm 6.75"
111-22171-7	Straight	7 mm	17 cm 6.75"
111-22171-9	Straight	9 mm	17 cm 6.75"
111-22171-12	Straight	12 mm	17 cm 6.75"

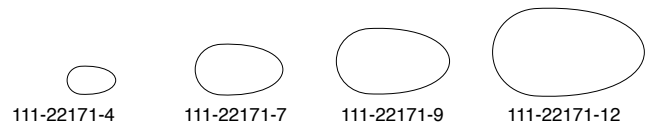

* Photo shows this instrument



RAGNELL

鈍鉤付両頭ラスパトリー。


* 111-22350- Double-ended Blunt 17 cm 6.75"



HOWARTH

鈍鉤付両頭鼻用ラスパトリー。

* 111-22370- Double-ended Sharp 22 cm 8.75"

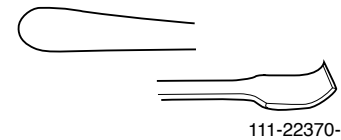

JOSEPH STILLE RASPATORY

フラットハンドルの弱湾ラスパトリー。

* 111-22385-4 4mm 17 cm 6.75"



* Photo shows this instrument



STILLE NASAL RASPATORY

鋭型弱彎曲鼻用ラスパトリー。

* 111-22520-4 Slightly curved sharp 4 mm



FREER STILLE ELEVATOR

両頭エレベータ、デリケートハンドル。


* 111-22140-4 4.5 mm 19.5 cm 7.75"
111-22140-6 6.5 mm 19.5 cm 7.75"



STILLE NASAL ELEVATOR

鈍型鼻用エレベータ。

* 111-22522-4 Slightly curved, 4 mm 18 cm 7"
Blunt

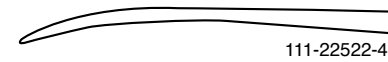


* Photo shows this instrument

STOLTE-STILLE TONSIL ELEVATOR

反型扁挑エレベータ。

* 111-22635- Double-ended Curved 20 cm 8"

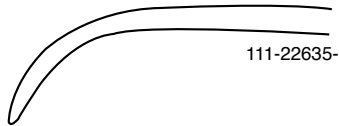


111-22635-


STILLE DISSECTOR

両頭ディセクター。


* 111-22440-18	Fine	With hole	18 cm 7"
111-22440-24	Fine	With hole	24 cm 9.5"
111-22442-19	Coarse	With hole	19.5 cm 7.75"
111-22442-24	Coarse	With hole	24 cm 9.5"
111-22444-	Fine	Without hole	24.5 cm 9.75"
111-22446-	Coarse	Without hole	24.5 cm 9.75"

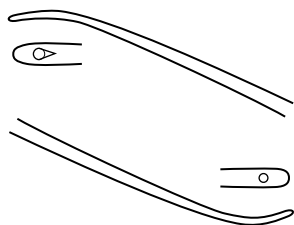


111-22440-18

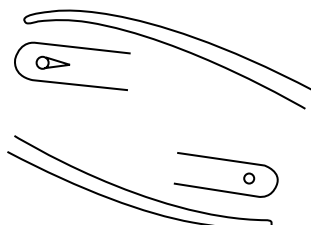


111-22440-24

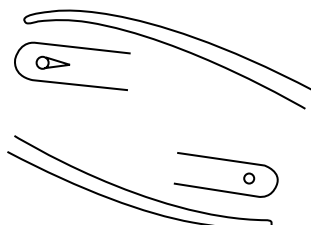


111-22442-19

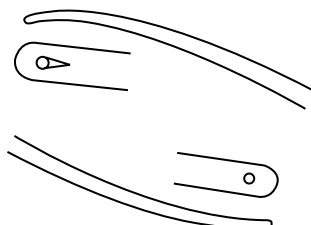

111-22442-24

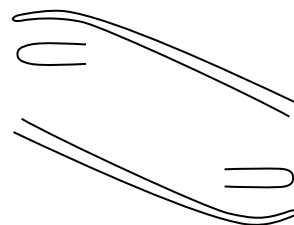


111-22444-

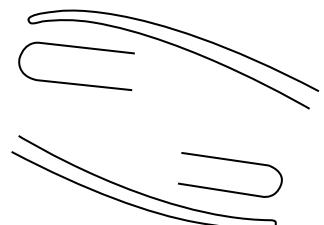

111-22446-



Stille chisels, osteotomes, mallets and instruments

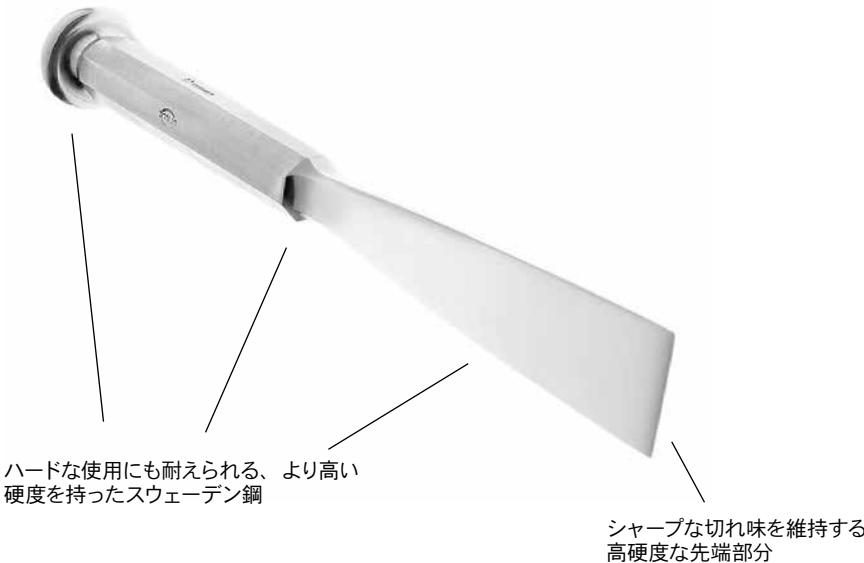

Stille オステオトーム、チゼル、ガウジ、マレットは、高い HRC 硬度を持つ特選ステンレス鋼からできています。

Stille は、世界で最初にオステオトームを製造した会社であり、この卓越した切れ味において世界的に定評があります。


Stille オステオトームおよびチゼル、ガウジはその特殊な研磨により骨組織への損傷を予防する非常に強度の高い先端を持つ、極めて品質の高い器具になっています。フェノール樹脂およびステンレス鋼ハンドルは、滑らないようにデザインされています。

オステオトーム (両刃ノミ)、チゼル (片刃ノミ)、ガウジ (曲刃ノミ) は、これらが受ける応力に耐用するため、非常に硬質でなければなりません。同時に、インプラントに接触する際に、インプラントに損傷を与えないようにすることが重要です。また、この硬度により、これらの器具は長期間、鋭い切れ味を維持します。

STILLE ORIGINAL DELICATE OSTEOTOME

Stille オリジナルデリケートオステオトーム。


111-21305-4	4 mm	21 cm 8.25"
111-21305-6	6 mm	21 cm 8.25"
* 111-21305-8	8 mm	21 cm 8.25"
111-21305-10	10 mm	21 cm 8.25"
111-21305-12	12 mm	21 cm 8.25"

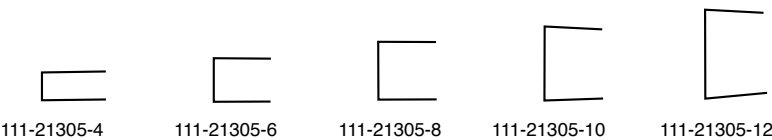

STILLE-KAYE

クロス鋸歯状ヘッドを持つ、デリケートオステオトーム。


* 111-21306-2	2 mm	16.5 cm 6.5"
111-21306-4	4 mm	16.5 cm 6.5"
111-21306-6	6 mm	16.5 cm 6.5"
111-21306-8	8 mm	16.5 cm 6.5"
111-21306-10	10 mm	16.5 cm 6.5"

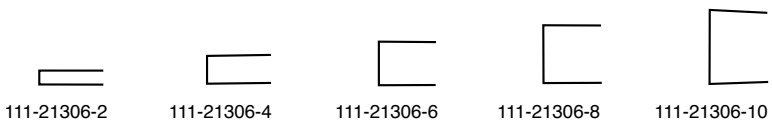

STILLE ORIGINAL OSTEOTOME

Stille-Kaye オステオトームよりもわずかに刃が厚い。

111-21310-6	6 mm	16.5 cm 6.5"
111-21310-8	8 mm	16.5 cm 6.5"
111-21310-10	10 mm	16.5 cm 6.5"
* 111-21310-12	12 mm	16.5 cm 6.5"
111-21310-15	15 mm	16.5 cm 6.5"

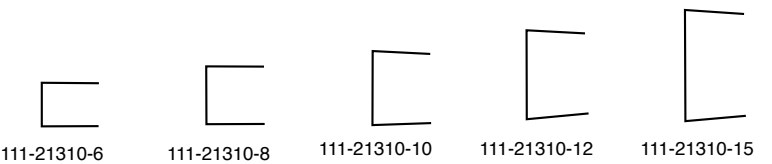


* Photo shows this instrument



STILLE ORIGINAL OSTEOTOME

Stille オリジナルオステオトーム。


111-21330-10	10 mm	21 cm 8.25"
111-21330-12	12 mm	21 cm 8.25"
* 111-21330-15	15 mm	21 cm 8.25"
111-21330-20	20 mm	21 cm 8.25"
111-21330-25	25 mm	21 cm 8.25"
111-21330-30	30 mm	21 cm 8.25"

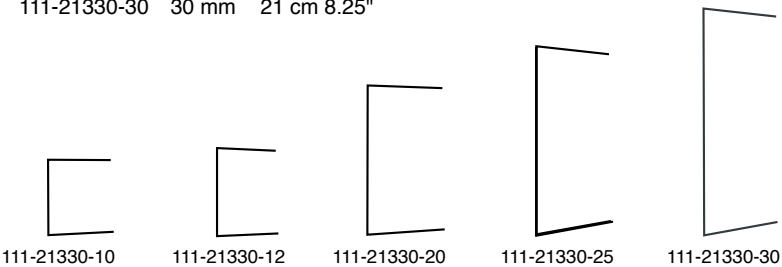

LAMBOTTE STRAIGHT

直型ランボットオステオトーム。


111-21441-7	Straight	7 mm	23 cm 9"
111-21441-15	Straight	15 mm	23 cm 9"
111-21441-20	Straight	20 mm	23 cm 9"
* 111-21441-25	Straight	25 mm	23 cm 9"
111-21441-30	Straight	30 mm	23 cm 9"
111-21441-40	Straight	40 mm	23 cm 9"

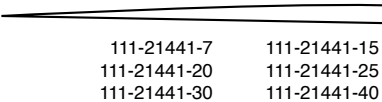

LAMBOTTE CURVED

反型ランボットオステオトーム。

111-21442-7	Curved	7 mm	23 cm 9"
111-21442-15	Curved	15 mm	23 cm 9"
111-21442-20	Curved	20 mm	23 cm 9"
111-21442-25	Curved	25 mm	23 cm 9"

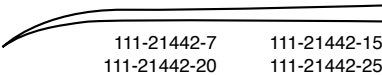

* Photo shows this instrument



MINI LAMBOTTE

デリケートミニランボットオステオトーム。

111-21450-2	Straight	2 mm	12.5 cm 5"
111-21450-3	Straight	3 mm	12.5 cm 5"
111-21450-4	Straight	4 mm	12.5 cm 5"
111-21450-5	Straight	5 mm	12.5 cm 5"
* 111-21450-6	Straight	6 mm	12.5 cm 5"
111-21450-7	Straight	7 mm	12.5 cm 5"
111-21450-8	Straight	8 mm	12.5 cm 5"
111-21450-9	Straight	9 mm	12.5 cm 5"
111-21450-10	Straight	10 mm	12.5 cm 5"
111-21450-11	Straight	11 mm	12.5 cm 5"
111-21450-12	Straight	12 mm	12.5 cm 5"



STILLE OSTEOTOME

フェノール樹脂ハンドル付デリケートオステオトーム。


* 111-21456-2	Straight	2 mm	16 cm 6.25"
111-21456-4	Straight	4 mm	16 cm 6.25"
111-21456-6	Straight	6 mm	16 cm 6.25"
111-21456-8	Straight	8 mm	16 cm 6.25"
111-21456-10	Straight	10 mm	16 cm 6.25"
111-21456-12	Straight	12 mm	16 cm 6.25"



LEXER

フェノール樹脂ハンドル付オステオトーム。

111-21460-10	Straight	10 mm	21 cm 8.25"
* 111-21460-15	Straight	15 mm	21 cm 8.25"
111-21460-20	Straight	20 mm	21 cm 8.25"

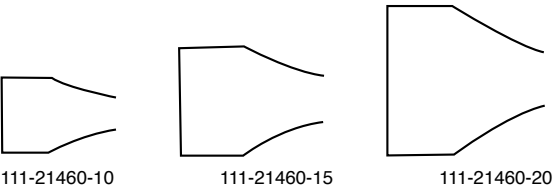

* Photo shows this instrument



NEIVERT STILLE OSTEOTOME

鼻形成、側方骨切用両刃ノミ。片側保護ガイド付き。

111-21501-1	Curved left	20 cm 8"
111-21501-2	Curved right	20 cm 8"
* 111-21501-3	Straight	20 cm 8"



COTTLE STILLE OSTEOTOME

深さ目盛り付き両刃ノミ。


111-21477-4	4 mm	18 cm 7"
111-21477-6	6 mm	18 cm 7"
* 111-21477-8	8 mm	18 cm 7"
111-21477-10	10 mm	18 cm 7"
111-21477-12	12 mm	18 cm 7"



STILLE ORIGINAL CHISEL

Stille オリジナルチゼル。

111-21312-6	6 mm	16.5 cm 6.5"
111-21312-8	8 mm	16.5 cm 6.5"
* 111-21312-10	10 mm	16.5 cm 6.5"
111-21312-12	12 mm	16.5 cm 6.5"
111-21312-15	15 mm	16.5 cm 6.5"

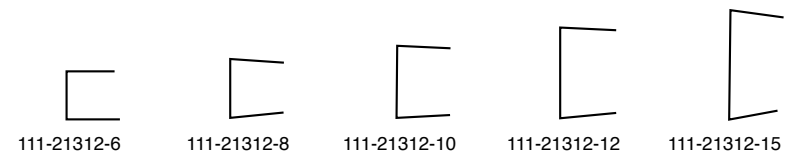


* Photo shows this instrument



STILLE ORIGINAL GOUGE

Stille オリジナルガウジ。


* 111-21315-6	6 mm	16.5 cm 6.5"
111-21315-8	8 mm	16.5 cm 6.5"
111-21315-10	10 mm	16.5 cm 6.5"
111-21315-12	12 mm	16.5 cm 6.5"
111-21315-15	15 mm	16.5 cm 6.5"

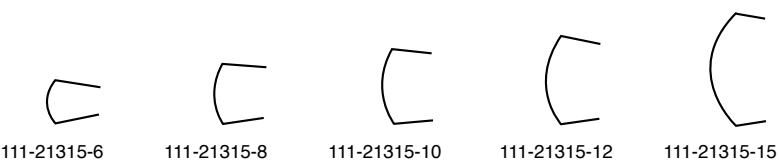

STILLE ORIGINAL GOUGE

Stille オリジナルガウジ。

111-21335-10	10 mm	21 cm 8.25"
* 111-21335-12	12 mm	21 cm 8.25"
111-21335-15	15 mm	21 cm 8.25"
111-21335-20	20 mm	21 cm 8.25"

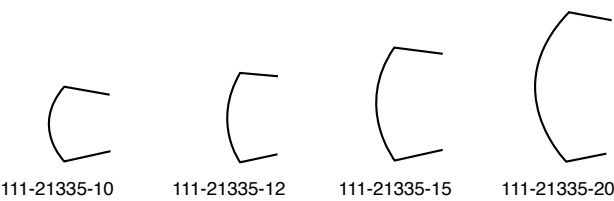

* Photo shows this instrument



STILLE Mallet

ステンレス鋼製マレット。

- * 111-21820- 200 g 7 oz 21.5 cm 8.5"



STILLE Mallet with Phenolic Handle

ステンレス鋼製ヘッド、フェノール樹脂ハンドル、そして、交換可能なテフロンインサートを持つマレット。

- * 111-21825- 145 g 5 oz 17 cm 6.75"
- 111-21825-5 Teflon insert spare



STILLE Mallet

プラスチック製ヘッドとステンレス鋼製ハンドルを持つマレット。

- * 111-21920- 245 g 8.5 oz diam. 40 mm 23.5 cm 9.25"
- 111-21920-5 Spare plastic head



* Photo shows this instrument



STILLE Awl

フェノール樹脂ハンドル付オール。

- * 111-19381- 17 cm 6.75"



STILLE Scalpel Handle

最も一般的なメスハンドル。

- | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|
| * 119-50010-3 | No 3 | Blade 10-15 | 12 cm 5" |
| 119-50010-13 | No 3L | Blade 10-15 | 21 cm 8.25" |
| 119-50010-4 | No 4 | Blade 18-25 | 13 cm 5.25" |
| 119-50010-14 | No 4L | Blade 18-25 | 21 cm 8.25" |
| 119-50010-7 | No 7 | Blade 10-15 | 16 cm 6.25" |



STILLE Barron Scalpel Handle

精密な回転操作が可能な 8 面カットされたメスハンドル。

- * 119-50012 Blade 10-15 14 cm 5.5"



* Photo shows this instrument



STILLE SCALPEL HANDLE

指先での繊細なコントロールを可能にするディンプル付きメスハンドル。


* 119-50015 Blade 10-15 14.5 cm 5.75"



STILLE GIGLI SAW

優れた切断能力を持つ Stille ギグリ線鋸。ループとワイヤー間の滑らかなジョイントが特徴です。

* 125-19150-30	Wire saw	Pkg 25 pcs	30 cm 12"
125-19150-40	Wire saw	Pkg 25 pcs	40 cm 15.75"
125-19150-50	Wire saw	Pkg 25 pcs	50 cm 20"
* 125-19160-	Handle		6.5 cm 2.5"
* 125-19170-	Saw guide/ dura- protector		34 cm 13.5"

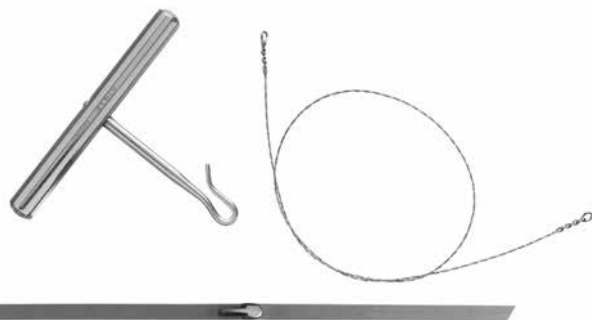



Stille Article number

Scissors

ABC-code	Article number	Page	ABC-code	Article number	Page
B	101-8001	5	B	101-8164	19
C	101-8002	5	C	101-8166	19
B	101-8003	5	B	101-8166-1	19
C	101-8004	5	C	101-8166-2	20
A	101-8010	5	A	101-8167	19
A	101-8010-1	5	A	101-8167-1	19
C	101-8011	5	A	101-8167-151	19
C	101-8011-1	5	A	101-8167-152	20
A	101-8015	5	C	101-8167-181	19
A	101-8015-1	5	A	101-8167-182	20
A	101-8016	5	B	101-8167-2	20
B	101-8016-1	5	C	101-8170-1	19
C	101-8018-1	6	B	101-8171-1	19
C	101-8019-1	6	B	101-8172-18	13
C	101-8019-2	6	B	101-8172-23	13
C	101-8020	7	A	101-8173-15	13
B	101-8021	7	A	101-8173-18	13
C	101-8021-1	7	B	101-8173-20	13
A	101-8022	7	A	101-8174-15	13
C	101-8025	23	A	101-8174-18	13
B	101-8031-1	6	A	101-8174-20	13
B	101-8031-2	7	A	101-8174-23	13
C	101-8042-15	16	C	101-8174-26	13
C	101-8043-15	16	A	101-8175-15	14
C	101-8047-13	16	C	101-8175-152	14
C	101-8047-15	16	A	101-8175-18	14
B	101-8048-15	16	C	101-8175-182	14
C	101-8048-18	16	A	101-8175-20	14
C	101-8060	8	A	101-8175-23	14
A	101-8060-1	8	A	101-8175-26	14
C	101-8060-2	8	C	101-8175-30	14
C	101-8062	8	C	101-8175-33	14
A	101-8062-1	8	C	101-8176-15	14
C	101-8062-2	8	C	101-8176-18	14
A	101-8080-15	9	C	101-8176-20	14
C	101-8080-17	9	C	101-8176-23	14
C	101-8081-15	9	C	101-8176-26	14
A	101-8082-15	9	C	101-8200-125	21
A	101-8082-17	9	B	101-8200-25	21
B	101-8083-15	9	B	101-8200-45	21
A	101-8084-15	10	C	101-8200-60	21
B	101-8084-17	10	C	101-8200-90	21
C	101-8084-19	10	C	101-8201-125	21
C	101-8085-15	10	C	101-8201-25	21
A	101-8085-17	10	C	101-8201-45	21
C	101-8085-19	10	C	101-8201-60	21
A	101-8086-15	10	C	101-8201-90	21
B	101-8086-17	10	C	101-8378	15
C	101-8086-19	10	A	101-8380-12	15
B	101-8087-15	10	B	101-8380-121	15
A	101-8087-17	10	B	101-8380-122	15
C	101-8087-19	10	C	101-8380-15	15
C	101-8090	11	A	101-8380-151	15
B	101-8092	11	C	101-8380-152	15
C	101-8096-20	17	C	101-8380-18	15
C	101-8096-23	17	C	101-8380-181	15
C	101-8097-20	17	B	101-8380-20	15
C	101-8097-23	17	C	101-8380-201	15
B	101-8098-20	17	B	101-8380-23	15
B	101-8098-23	17	C	101-8380-231	15
B	101-8098-30	17	C	101-8411	23
B	101-8099-20	17	B	101-8420	18
A	101-8099-23	17	C	101-8430-171	24
C	101-8099-30	17	C	101-8430-172	24
C	101-8100-15	11	C	101-8431-171	24
B	101-8102-15	11	C	101-8431-172	24
C	101-8110	22	C	101-8433-20	24
C	101-8110-1	22	C	101-8433-202	24
C	101-8115	22	C	101-8435-20	24
C	101-8115-1	22	C	101-8435-202	24
C	101-8120	22	C	101-8440-201	24
C	101-8120-1	23	C	101-8441-201	24
C	101-8122	22	C	101-8452	25
C	101-8123	22	C	101-8456-171	25
C	101-8123-1	23	B	101-8458-17	25
C	101-8125	22	C	101-8458-172	26
B	101-8138	11	A	101-8458-20	25
C	101-8160	12	C	101-8458-202	25
C	101-8161	12	B	101-8459-20	25
B	101-8162	12	B	101-8460	18
A	101-8163	12	C	101-8470	16
C	101-8163-2	12	C	101-8580	18

Forceps

B	102-9019	31	B	102-9019	31
A	102-9020	34	A	102-9020	34
C	102-9020-1	34	C	102-9020-1	34
C	102-9020-15	34	C	102-9020-15	34
A	102-9021	31	A	102-9021	31
B	102-9021-1	31	B	102-9021-1	31
A	102-9022	31	A	102-9022	31
B	102-9022-15	31	B	102-9022-15	31
B	102-9023-12	31	B	102-9023-12	31
C	102-9024	34	C	102-9024	34
A	102-9025	35	A	102-9025	35
C	102-9025-1	35	C	102-9025-1	35
A	102-9027	32	A	102-9027	32
A	102-9028	32	A	102-9028	32
C	102-9030-13	35	C	102-9030-13	35
A	102-9030-15	35	A	102-9030-15	35
A	102-9030-17	35	A	102-9030-17	35
A	102-9030-20	35	A	102-9030-20	35
A	102-9030-25	35	A	102-9030-25	35
B	102-9040-15	35	B	102-9040-15	35
B	102-9040-17	35	B	102-9040-17	35
B	102-9040-20	35	B	102-9040-20	35
A	102-9040-25	35	A	102-9040-25	35
B	102-9040-30	35	B	102-9040-30	35
C	102-9050-13	32	C	102-9050-13	32
A	102-9060-15	33	A	102-9060-15	33
B	102-9060-17	33	B	102-9060-17	33
B	102-9060-20	33	B	102-9060-20	33
A	102-9062-15	33	A	102-9062-15	33
B	102-9062-17	33	B	102-9062-17	33
B	102-9062-20	33	B	102-9062-20	33
A	102-9077-20	36	A	102-9077-20	36
C	102-9078-20	36	C	102-9078-20	36
B	102-9244-15	36	B	102-9244-15	36
A	102-9244-20	36	A	102-9244-20	36
B	102-9244-25	36	B	102-9244-25	36
C	102-9248-15	33	C	102-9248-15	33
B	102-9248-20	33	B	102-9248-20	33
C	102-9248-25	33	C	102-9248-25	33
A	102-9252-20	34	A	102-9252-20	34
B	102-9252-25	34	B	102-9252-25	34
C	102-9252-30	34	C	102-9252-30	34
B	102-9254	36	B	102-9254	36
B	102-9255-20	36	B	102-9255-20	36
B	102-9255-25	36	B	102-9255-25	36
C	102-9270-20	34	C	102-9270-20	34
B	102-9300	37	B	102-9300	37
B	102-9302	37	B	102-9302	37
B	102-9304	37	B	102-9304	37
C	102-9308	37	C	102-9308	37
C	102-9312	37	C	102-9312	37
A	102-9314	37	A	102-9314	37
A	102-9316	37	A	102-9316	37
B	102-9318	37	B	102-9318	37
C	102-9320	37	C	102-9320	37
B	102-9322	37	B	102-9322	37
B	102-9330	37	B	102-9330	37
C	102-9340	37	C	102-9340	37
C	102-9342	37	C	102-9342	37
C	102-9354	37	C	102-9354	37
B	102-9460	38	B	102-9460	38
B	102-9470	38	B	102-9470	38
C	102-9845-15	38	C	102-9845-15	38
A	102-9845-20	38	A	102-9845-20	38
A	102-9845-25	38	A	102-9845-25	38
B	102-9846-20	38	B	102-9846-20	38
B	102-9852-20	39	B	102-9852-20	39
C	102-9852-25	39	C	102-9852-25	39
C	102-9852-30	39	C	102-9852-30	39
C	102-9855-20	39	C	102-9855-20	39
C	102-9855-25	39	C	102-9855-25	39

Artery Forceps

ABC-code	Article number	Page
A	103-10015-131	43
C	103-10026-121	43
A	103-10028-121	43
B	103-10030-121	43
A	103-10032-121	43
B	103-10032-181	43
C	103-10035-121	44
B	103-10037-121	44
C	103-10115-141	44
C	103-10117-141	44
C	103-10150-141	44
C	103-10152-141	44
C	103-10160-161	45
C	103-10162-161	45
C	103-10172	45
B	103-10180-141	45
C	103-10180-161	45
C	103-10180-181	45
A	103-10182-141	45
A	103-10182-161	45
B	103-10182-181	45
C	103-10185	46
C	103-10185-161	46
C	103-10187-141	46
C	103-10187-161	46
C	103-10190	46
B	103-10192	46
C	103-10195	46
C	103-10197	46
B	103-10200-161	46
B	103-10200-181	46
B	103-10202-161	46
A	103-10202-181	46
B	103-10205-161	47
B	103-10205-181	47
B	103-10207-161	47
B	103-10207-181	47
B	103-10210-201	47
A	103-10210-241	47
B	103-10212-201	47
B	103-10212-241	47
C	103-10212-301	47
B	103-10215-201	47
C	103-10215-241	47
B	103-10217-201	47
B	103-10217-241	47
C	103-10220-201	48
B	103-10222-201	48
B	103-10240-161	48
C	103-10260-191	48
C	103-10262-191	48
C	103-10310	49
B	103-10411-201	49
B	103-10413-211	49
B	103-10413-241	49
B	103-10416	50
A	103-10420-201	50
C	103-10421-211	50
C	103-10422-211	50
C	103-10423-1	50
C	103-10423-2	50
C	103-10423-3	50
B	103-10423-4	50
C	103-10425	51
A	103-10430-241	50

Retractors

ABC-code	Article number	Page
C	108-26046-14	91
C	108-26048-7	88
C	108-26846-8	91
C	108-26846-10	91
C	108-26846-12	91
C	108-26846-14	91
C	108-26252	93
C	108-26253	93
C	108-26254	93
B	108-26255	93
C	108-26256	93
C	108-26257	93
C	108-26261	93
C	108-26262	93
B	108-26610	93
B	108-26615	93
B	108-26931	92
C	108-26931-80	92
C	108-26931-100	92

Bone instruments etc

B	111-19381	111
C	111-20340-5	97
C	111-20340-7	97
C	111-20340-8	97
C	111-20340-10	97
C	111-20350-7	97
C	111-20350-8	97
C	111-20350-10	97
C	111-20350-12	97
C	111-20502-2	98
B	111-20502-3	98
B	111-20502-4	98
B	111-20502-5	98
B	111-20502-6	98
C	111-20502-7	98
C	111-20502-8	98
C	111-20502-10	98
C	111-20502-12	98
C	111-20503-2	98
C	111-20503-3	98
C	111-20503-4	98
C	111-20503-5	98
C	111-20503-6	98
B	111-21305-4	105
B	111-21305-6	105
B	111-21305-8	105
B	111-21305-10	105
C	111-21305-12	105
C	111-21306-2	105
B	111-21306-4	105
C	111-21306-6	105
C	111-21306-8	105
C	111-21306-10	105
B	111-21310-6	105
B	111-21310-8	105
B	111-21310-10	105
C	111-21310-12	105
C	111-21310-15	105
C	111-21312-6	108
C	111-21312-8	108
C	111-21312-10	108
C	111-21312-12	108
C	111-21312-15	108
C	111-21315-6	109
C	111-21315-8	109
C	111-21315-10	109
C	111-21315-12	109
C	111-21315-15	109
B	111-21330-10	106
C	111-21330-12	106
B	111-21330-15	106
B	111-21330-20	106
B	111-21330-25	106
B	111-21330-30	106
C	111-21335-10	109
C	111-21335-12	109
C	111-21335-15	109
C	111-21335-20	109

Gigli Saws

ABC-code	Article number	Page
A	125-19150-30	112
A	125-19150-40	112
A	125-19150-50	112
B	125-19160	112
C	125-19170	112

ABC-code	Article number	Page
B	111-21441-7	106
B	111-21441-15	106
B	111-21441-20	106
C	111-21441-25	106
C	111-21441-30	106
C	111-21441-40	106
C	111-21442-7	106
C	111-21442-15	106
C	111-21442-20	106
C	111-21442-25	106
C	111-21450-2	107
C	111-21450-3	107
C	111-21450-4	107
C	111-21450-5	107
C	111-21450-6	107
C	111-21450-7	107
C	111-21450-8	107
C	111-21450-9	107
C	111-21450-10	107
C	111-21450-11	107
C	111-21450-12	107
C	111-21456-2	107
B	111-21456-4	107
B	111-21456-6	107
B	111-21456-8	107
B	111-21456-10	107
B	111-21456-12	107
C	111-21460-10	107
C	111-21460-15	107
C	111-21460-20	107
C	111-21477-4	108
C	111-21477-6	108
C	111-21477-8	108
C	111-21477-10	108
C	111-21477-12	108
C	111-21501-1	108
C	111-21501-2	108
C	111-21501-3	108
B	111-21820	110
C	111-21825	110
A	111-21825-5	110
B	111-21920	110
A	111-21920-5	110
C	111-22140-4	101
C	111-22140-6	101
C	111-22150	99
B	111-22160	99
B	111-22171-4	99
B	111-22171-7	99
B	111-22171-9	99
B	111-22171-12	99
C	111-22350	100
B	111-22370	100
C	111-22385-4	100
B	111-22440-18	102
B	111-22440-24	102
B	111-22442-19	102
B	111-22442-24	102
B	111-22444	102
B	111-22446	102
B	111-22520-4	101
C	111-22522-4	101
B	111-22635	102

Other Instruments

A	119-50010-3	111
B	119-50010-13	111
A	119-50010-4	111
C	119-50010-14	111
B	119-50010-7	111
B	119-50012	111
B	119-50015	112

