

～STILLE修理の真骨頂～

スウェーデンにおけるSTILLE剪刀の寿命に関する調査において、**30年以上使い続けられた器具は70%、50年以上使い続けられた器具は66%** に上る事がわかりました。

Comparison instrument lifetime across hospitals

Hospital	Scissors more than 30 years old (%)	Scissors more than 50 years old (%)	# hospital beds	# Surgeries 2012	Description
Södertälje	83	78	172	6,000	Rural hospital
Ersta	78	74		3,500	Small specialized surgical center
Akademiska	73	68	1,050	28,747	University Hospital
Huddinge	50	50	669	15,000	Part of Karolinska University medical centers which also includes campus in Solna
Average all hospitals	70	66			

この背景には、スウェーデンでは「メンテナンス」に対する意識がとても高い事があげられます。

～ STILLE製品を永くお使い頂くために ～

- ・ お客様における「日頃のメンテナンス」
- ・ STILLEにおける「修理・メンテナンス」

器具の寿命を延ばすのは“腐食の予防”です

◆ STILLE Repair Policy — 品質のリセット

STILLEによる修理は、新品に限りなく近い機能への回復を目指します

- ・ ネジを取り外して分解 — クリーニングと研磨・調整のために
- ・ 刃の研磨は最小限 — 将来の再研磨のために
- ・ 仕上げはポリッシング — 鏡面加工による“腐食の予防”




STILLEは製品を永くお使い頂く事を”最高のサービス”と捉えています。

STILLE製品の修理・メンテナンスは、ガデリウス・メディカルまでご用命ください。


～特殊刃はSTILLEでしか削れない～

STILLEは独自の薄いエッジング加工によって、特有の鋭い切れ味を生み出しています。
この技術はSTILLE以外の研磨業者では再現できません。

【他社研磨の例】

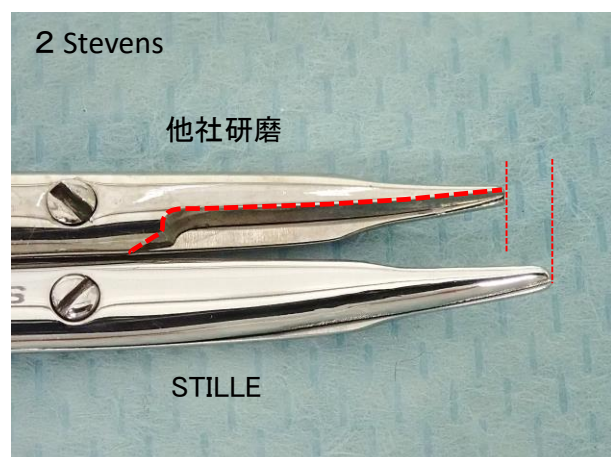

製品の目的を無視した大胆な研磨により、もはや原型を留めていません

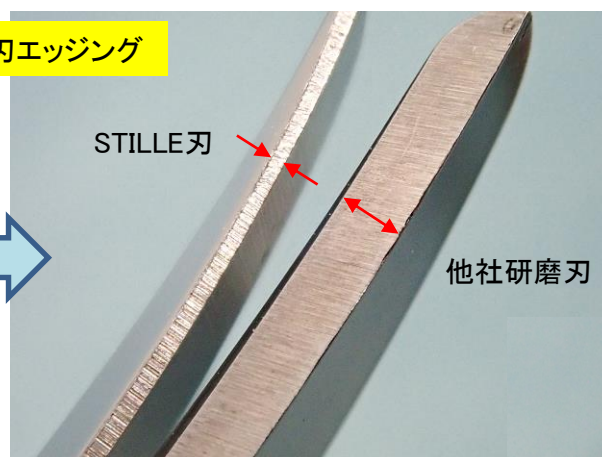



STILLEはスクリューを外して分解し、それぞれのアイテムに最適なエッジング加工をおこないます

STILLE製品の修理・メンテナンスは、ガデリウス・メディカルまでご用命ください。

～ 器具の大敵 “腐食” ～

器具の寿命を延ばすのは “腐食の予防”
日頃のお手入れとSTILLEの定期的なメンテナンスが重要です

【腐食の例】

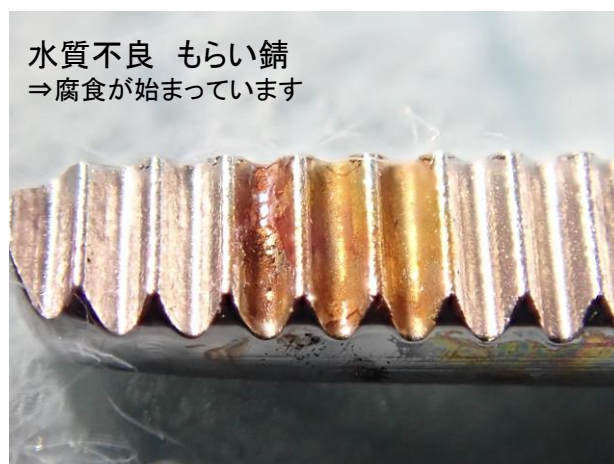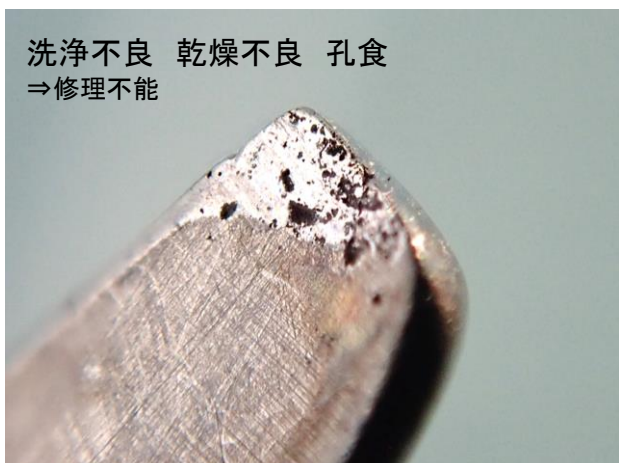

スティーレの修理は、歪みや捻じれを補正し、刃の研磨や噛み合わせ調整をおこない、また、孔食になる前の表面腐食を綺麗にポリッシングします。



修理前
表面腐食が強い状態



修理後（ポリッシング施工）
職人の手で1本1本綺麗に磨かれます



STILLE製品の修理・メンテナンスは、ガデリウス・メディカルまでご用命ください。